

..... MYTREX
REBIVE

Dùng cho
gia đình


Máy massage toàn thân

Hướng dẫn sử dụng

PHIẾU BẢO HÀNH


XIN GIỮ CẨN THẬN

Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm này. Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để dùng đúng cách và đảm bảo an toàn. Trong sách hướng dẫn này có kèm theo phiếu bảo hành. Sau khi đọc xong, xin hãy giữ lại cẩn thận để sử dụng khi cần.

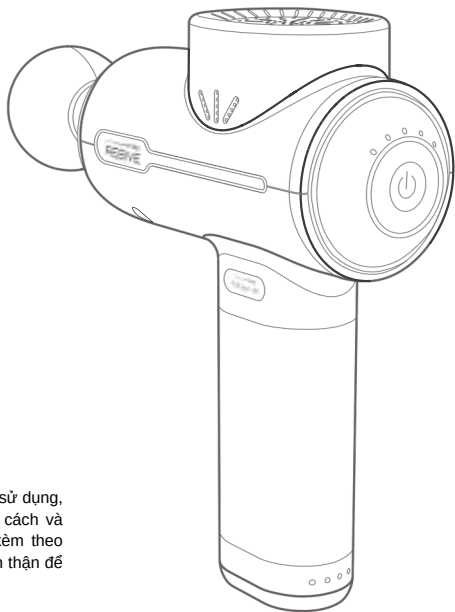

TÊN CỦA TỪNG BỘ PHẬN

Thân máy

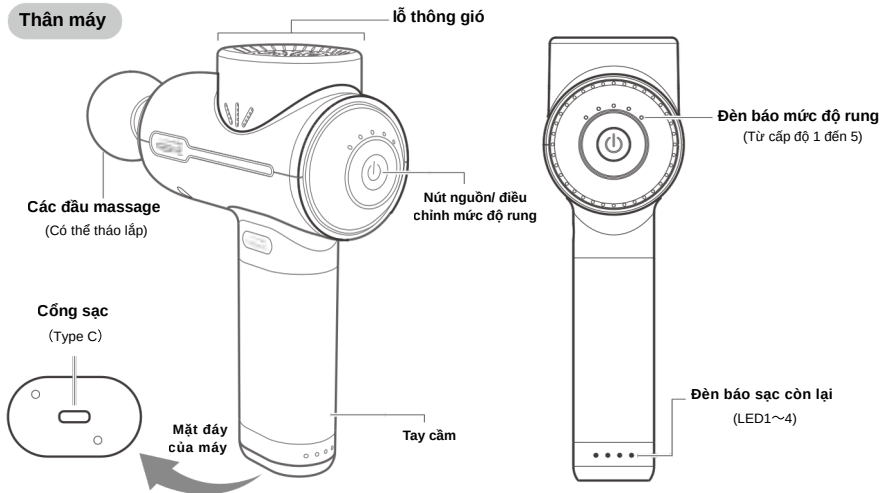

CÁCH SỬ DỤNG


1

Đảm bảo máy đang tắt, sau đó lắp đầu massage vào máy

※ Hãy đẩy thật sâu vào bên trong

※ Nếu đầu massage bị lỏng, hãy thay bằng miếng cao su chặn dành cho đầu phụ kèm theo.

※ Chỉ với đầu phụ hình chữ U, lắp như hình dưới (Căn phần nhô ra của đầu phụ với rãnh trên cổng lắp của thân máy, sau đó đẩy thẳng vào)

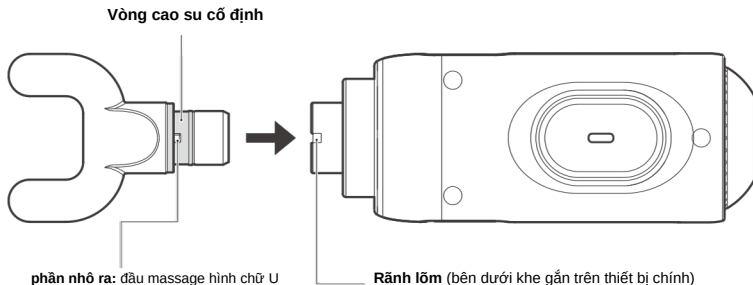

CÁC ĐẦU MASSAGE



Hình cầu

Dùng cho các nhóm cơ lớn như đùi, lưng và mông



Hình trụ

Dùng khi bạn muốn kích thích một vùng cụ thể, chẳng hạn như lòng bàn chân



Hình phẳng

Dùng cho tất cả các vùng trên cơ thể, bao gồm cả bắp chân



Hình đệm

Dùng được cho các cơ như cơ vai




Hình chữ U

Dùng được cho nhóm cơ như cẳng tay, cột sống và cả hai bên gân

SẢN PHẨM BÁN RIÊNG

Dây đai RELEASE BELT chuyên dụng cho MYTREX Revive

Rung ngang lan rộng, kích thích các cơ nông

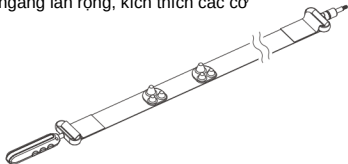

Đầu massage RELEASE POINTER chuyên dụng cho MYTREX Revive


Tập trung vào một điểm tác động sâu và mạnh vào bên trong



2

Nút nguồn / điều chỉnh mức độ:  **Bật nguồn**

※ Khi đèn báo dung lượng pin sáng, nhấn một lần  để bật nguồn

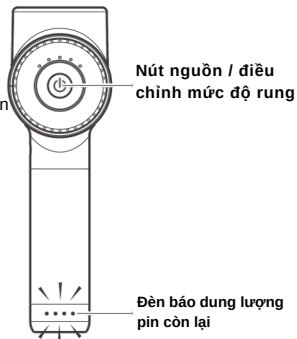


3

 **Nhấn nút 1 lần để chọn mức độ rung**

※ Mỗi lần nhấn nút, mức độ rung sẽ tăng lên một cấp. Bạn có thể chọn mức độ rung trong 5 cấp độ (cấp 1 đến cấp 5). Bằng số đèn sáng trên đèn hiển thị mức rung, bạn có thể xác nhận được mức rung đang được cài đặt

Ví dụ Khi 3 đèn báo mức rung sáng, thì mức rung được cài đặt là mức 3

Mức độ rung động	Số vòng quay mỗi phút
1	2000 lần
2	2300 lần
3	2600 lần
4	2900 lần
5	3100 lần

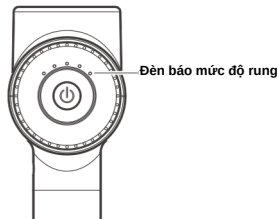

4

Khi sử dụng, hãy cầm chắc phần tay cầm và áp nhẹ lên da

※ Thời gian cho mỗi lần sử dụng nên trong vòng 10 phút. Ngoài ra, không nên sử dụng liên tục trên cùng một vị trí quá 3 phút

5

Để dừng rung khi máy đang hoạt động, hãy  nhấn và giữ trong khoảng 2 giây

Từ trạng thái đang hoạt động, có thể nhấn nút  thêm một lần nữa để dừng lại

※ Sau khi bắt đầu sử dụng được 10 phút, thiết bị sẽ tự động ngừng rung


6

Khi thiết bị đang ở trạng thái dừng rung, nhấn và giữ nút  khoảng 2 giây để tắt nguồn

※ Nếu trạng thái dừng rung kéo dài khoảng 20 giây, thiết bị sẽ tự động tắt nguồn

Cách tháo phụ kiện

Hãy cầm vào phần gốc của phụ kiện (A) và kéo thẳng ra để tháo ra

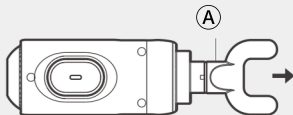

CÁCH VỆ SINH

- Tuyệt đối không rửa thân máy và các phụ kiện kèm theo bằng nước
- Vết bẩn trên thân máy và phụ kiện hãy lau bằng khăn mềm, khô. Nếu vết bẩn khó sạch, hãy nhúng khăn mềm vào dung dịch nước ấm pha loãng với chất tẩy rửa trung tính, vắt thật khô rồi lau nhẹ nhàng bề mặt thân máy. Nếu dầu hoặc chất tương tự bám vào phần cao su chặn của phụ kiện, phụ kiện có thể dễ bị tuột ra. Hãy lau sạch và bảo dưỡng phần cao su chặn này giống như trên
- Đôi khi có thể thấy dầu rỉ ra gần vị trí gắn phụ kiện, đây là dầu bôi trơn bên trong máy và không phải là lỗi của sản phẩm. Nếu để dầu bám lại, phụ kiện có thể dễ bị rơi ra hoặc bụi bám vào gây hỏng hóc sản phẩm. Hãy thường xuyên lau sạch khu vực gắn phụ kiện và lỗ cấm bằng tăm bông, khăn khô hoặc dùng bình xịt khí để loại bỏ bụi
- Không sử dụng các dung môi như cồn, thinner, benzine... vì có thể gây hỏng hóc, nứt vỡ hoặc đổi màu linh kiện

CÁCH BẢO QUẢN

- Khi không sử dụng, tắt nguồn thân máy, rút AC adapter ra khỏi ổ cắm và gỡ các xoắn của dây USB trước khi cất giữ
- Không để máy gần lửa, dưới ánh nắng trực tiếp, trong phòng tắm hay ô tô – những nơi nóng ẩm. Hãy cất ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và có bóng râm
- Cất giữ ở nơi trẻ em không với tới
- Khi không sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc đầy pin thân máy trước khi cất. Mỗi tháng hãy bật máy một lần và sạc lại. Nếu để lâu mà không sạc, pin có thể không nạp được. Do đặc tính của pin, ngay cả khi không sử dụng, pin vẫn sẽ tự xả dần, nên dung lượng pin sẽ giảm theo thời gian khi cất giữ.
- Khi không sử dụng trong thời gian dài, hãy vệ sinh thân máy và phụ kiện trước khi dùng phụ kiện đi kèm...


VỀ PIN SẠC

- Nếu thời gian sử dụng trở nên cực kỳ ngắn dù đã sạc đầy, có thể pin đã hết tuổi thọ. Không sử dụng pin đã giảm hiệu suất. (Tuổi thọ pin thay đổi tùy vào cách sử dụng và bảo quản. Số lần sạc/xả tham khảo khoảng 300–500 lần)
- Pin không thể thay thế

HÃY THÁO RỜI THEO CÁC BƯỚC SAU

1


Dùng tua-vít mở 3 nắp cao su trên thân máy, sau đó dùng tua-vít đập tháo 3 ốc vít

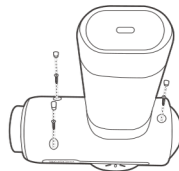

2

Tháo rời các phần ghép nối của thân máy bằng cách nạy bằng tua-vít dẹt hoặc tương tự


※Nếu nhấn mạnh phần ghép nối (A) trong khi tháo rời, việc mở sẽ dễ hơn

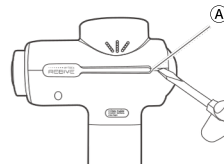

3


Kéo phần trên và phần dưới của thân máy theo chiều dọc để tháo rời

※Sau khi tháo rời, hãy gỡ dây dẫn ra khỏi bo mạch

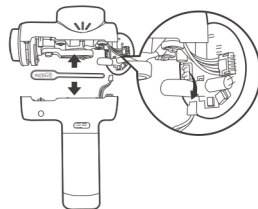


4

Dùng tua-vít dẹt để tháo 4 con ốc

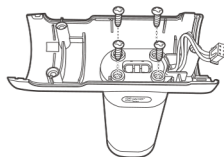

5

Dùng tua-vít dẹt bóc miếng tem che ở mặt đáy của thân máy, sau đó dùng tua-vít dẹt để tháo 2 con ốc

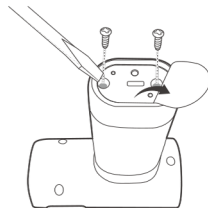

6

Kéo phần tay cầm ra khỏi các bộ phận trên và dưới để tháo rời

※Hãy tháo dây dẫn ra khỏi bo mạch

※Không tháo rời phần tay cầm (phần chứa pin), hãy giữ nguyên và mang trực tiếp đến điểm thu hồi pin sạc để tái chế

