

MYTREX EMS HEAD SPA PRO

Thiết bị làm đẹp chuyên dụng tại nhà

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tài liệu lưu trữ

Có kèm phiếu bảo hành

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng để đảm bảo sử dụng cách và an toàn. Sách hướng dẫn này có đi kèm phiếu bảo hành, xin vui lòng cất giữ cẩn trọng suốt quá trình sử dụng.


Tên gọi và chức năng các bộ phận

Thân máy

Nút nguồn

(Bật/Tắt nguồn,
Chọn tốc độ xoay)

Nút chỉnh mức độ EMS

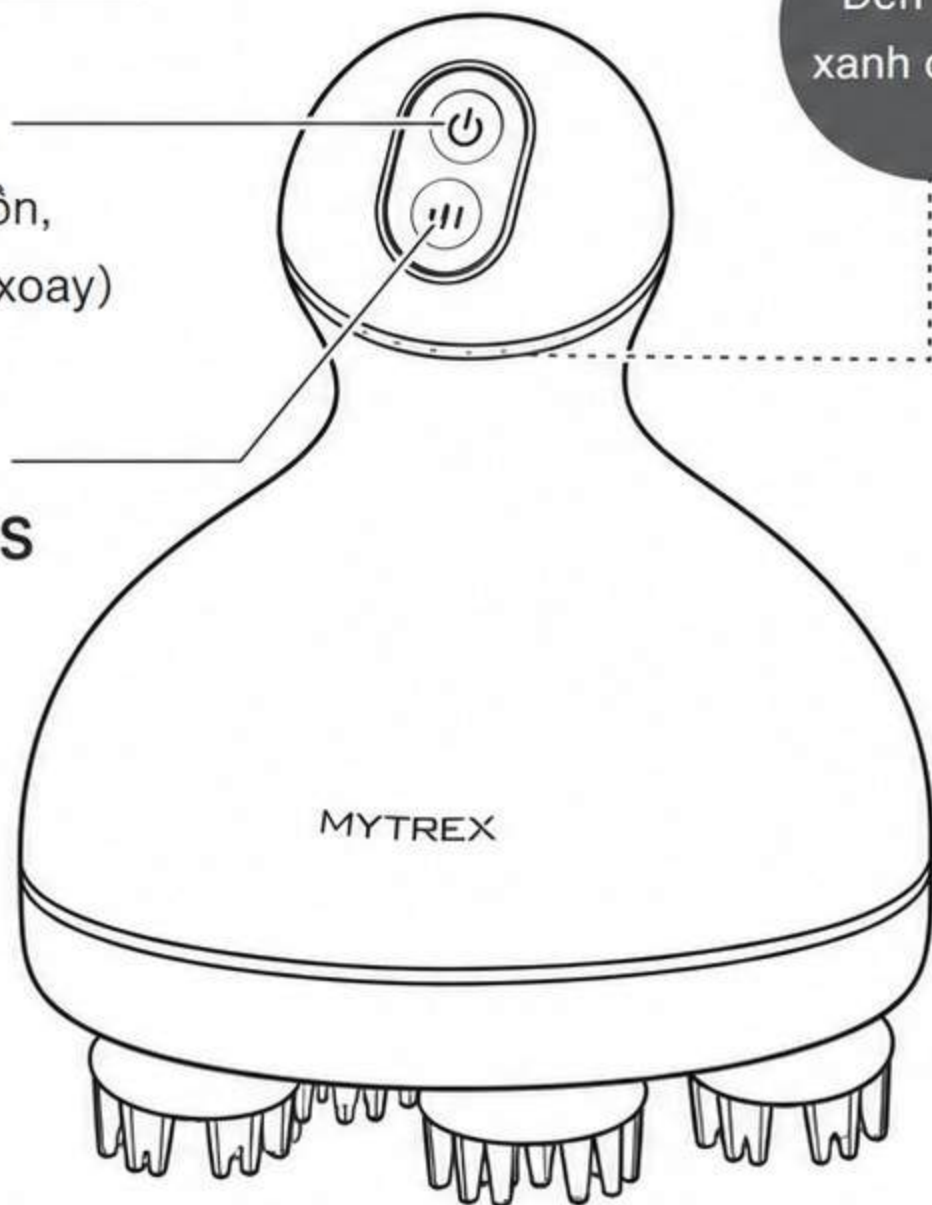

Đèn LED
xanh dương

Hiển thị mức độ EMS (Khi đang hoạt động)



Hiển thị dung lượng pin (Khi bật nguồn* / Khi đang sạc)




* Bạn có thể kiểm tra dung lượng pin còn lại bằng số lượng đèn LED sáng lên trong khoảng 2 giây khi bật nguồn thiết bị.

Thân máy (Mặt sau)

Bộ phận chuyển động

* Vui lòng không dùng lực quá mạnh hoặc kéo căng bộ phận này.

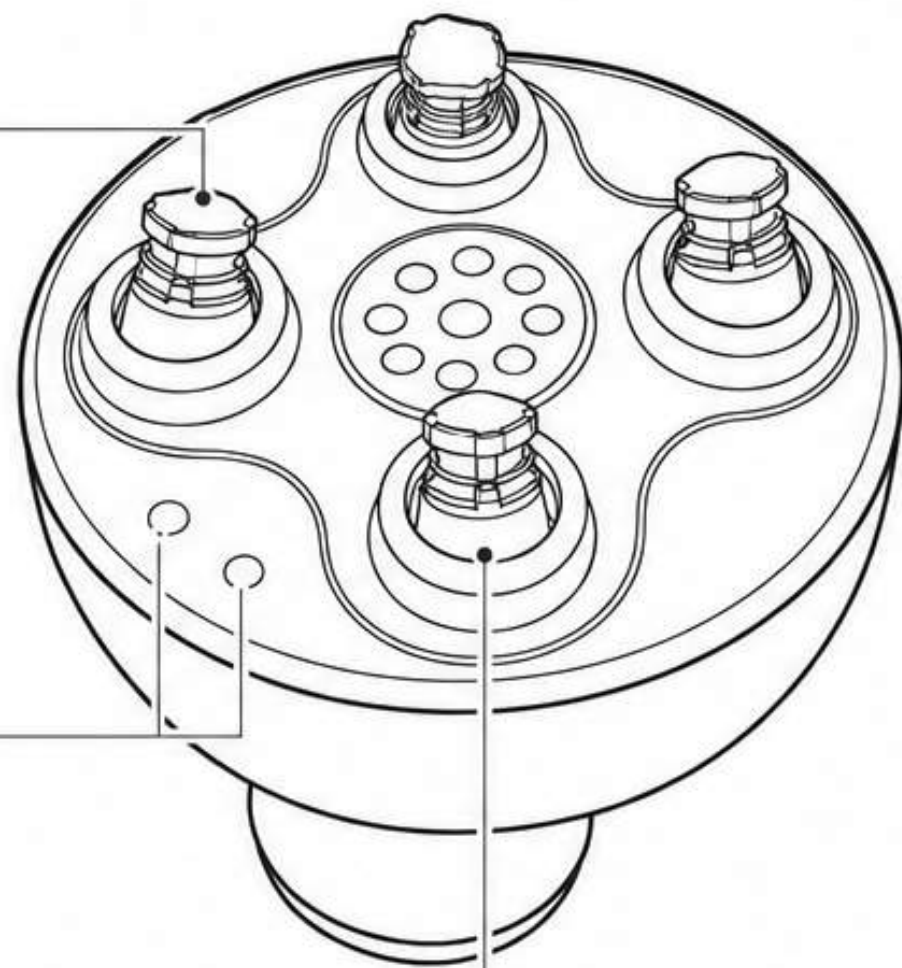


Cổng sạc

Đèn quang trị liệu LED đỏ

Đầu massage thay thế (Linh kiện tiêu hao)


Dành cho da đầu & Toàn thân

* Đầu massage này đã được lắp sẵn vào máy khi mua.

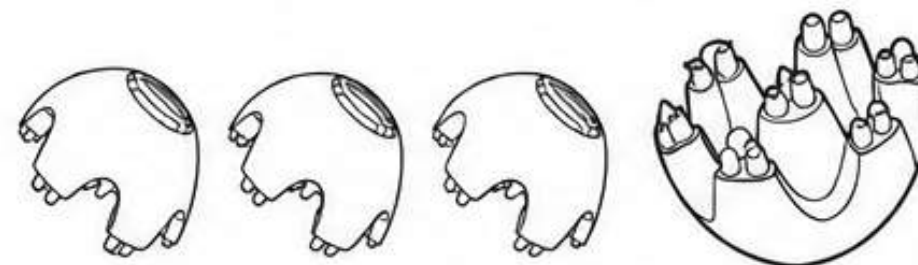


Chuyên dụng cho da đầu

• Dạng kim gai

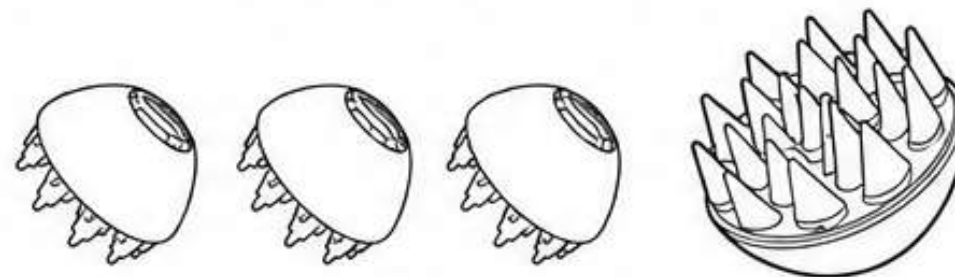

Dành cho da mặt





• Silicon mềm mại

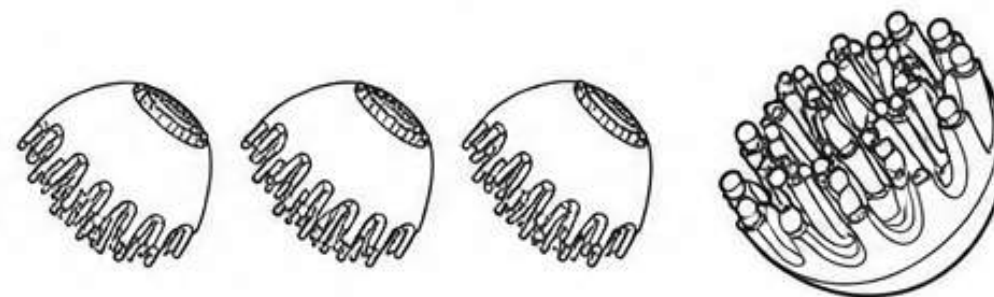

LƯU Ý

- Nếu thiếu bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào trong hộp, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.
- Sản phẩm này có khả năng chống nước. Có thể sử dụng khi tắm, tuy nhiên không sử dụng trong nước quá nóng hoặc không ngâm hoàn toàn thiết bị dưới nước. Không sử dụng khi thiết bị đang ở trạng thái dừng hoạt động.

Phụ kiện đi kèm

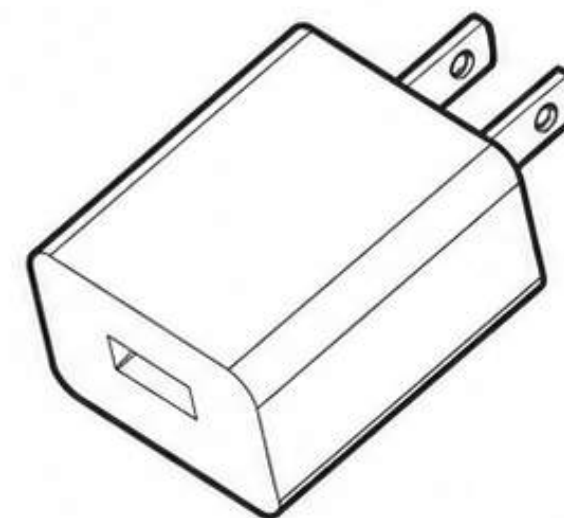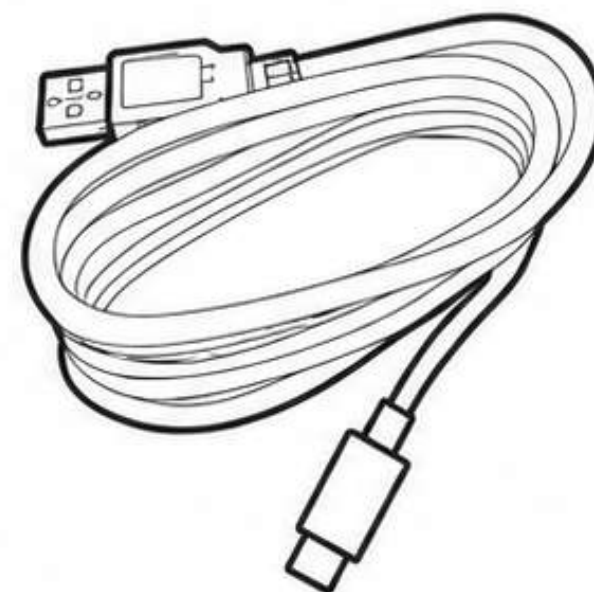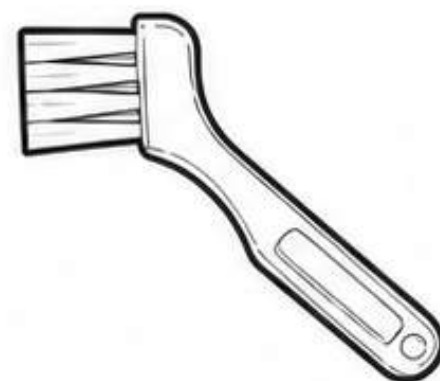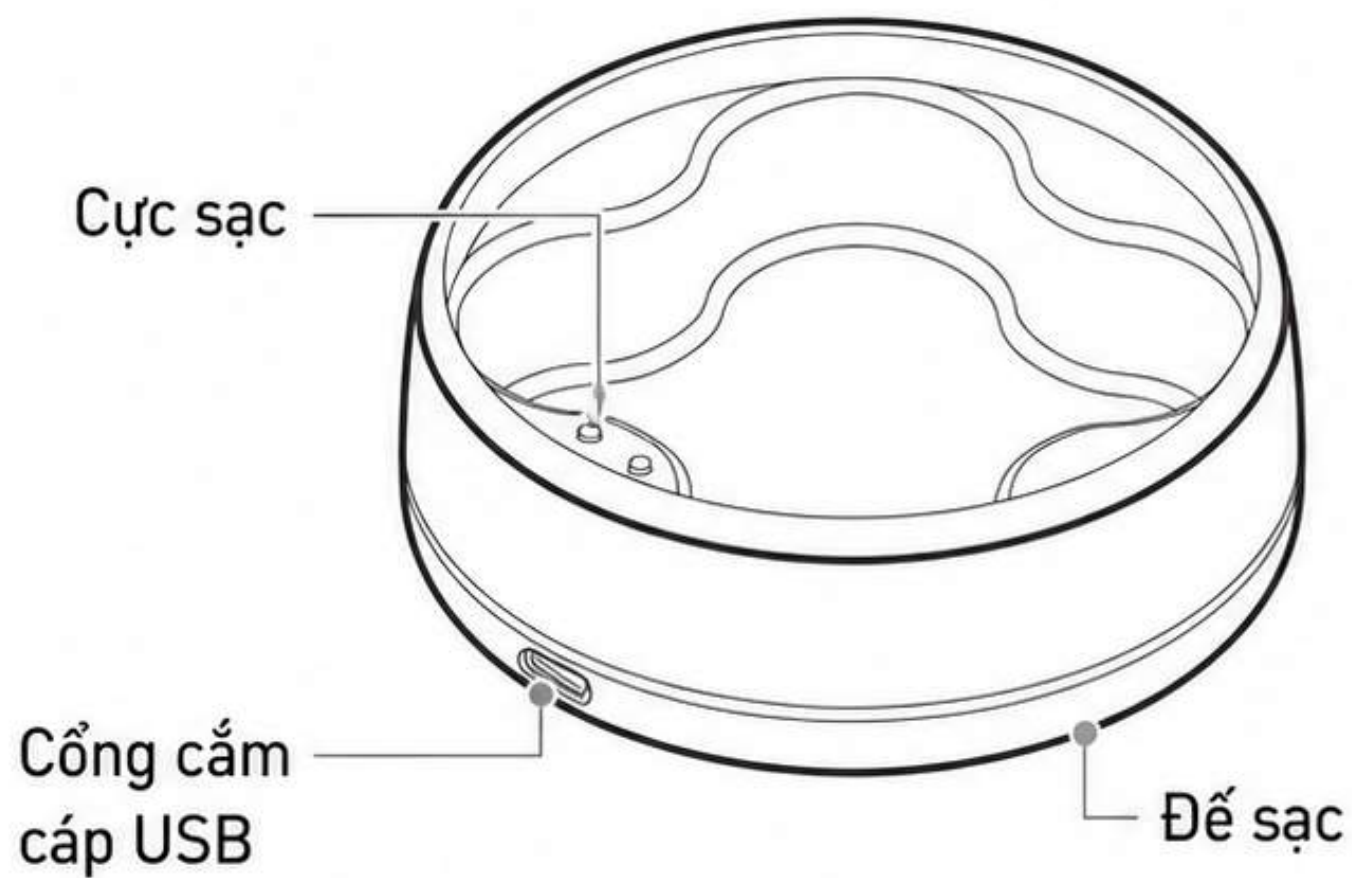

LƯU Ý

- Đế sạc được thiết kế chống nước sinh hoạt (IPX4), vui lòng không xịt nước trực tiếp lên đế sạc.
- Cáp USB và củ sạc AC không chống nước. Vui lòng bảo quản ở nơi khô ráo, không ẩm ướt.
- Phụ kiện đi kèm nên được sử dụng ở nơi khô ráo. Không để đế sạc trong phòng tắm hoặc nơi ẩm ướt.
- Thiết kế và thông số kỹ thuật của phụ kiện có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để nâng cao chất lượng.

Trước khi sử dụng (Phương pháp sạc pin)


Khi sử dụng lần đầu tiên hoặc khi dung lượng pin yếu, hãy tắt nguồn thiết bị trước khi tiến hành sạc.

Yêu cầu

Bắt buộc phải lau sạch nước và để khô ráo hoàn toàn thân máy cũng như đầu massage trước khi đặt lên đế sạc. Việc đặt thiết bị lên đế sạc khi còn ẩm ướt có thể gây ra hỏng hóc, sự cố.

● Khi dung lượng pin yếu

Cứ mỗi 30 giây một lần, các đèn LED xanh dương từ 1 đến 5 sẽ nhấp nháy nhanh 3 lần, đồng thời máy sẽ phát ra tiếng kêu "tít tít tít".

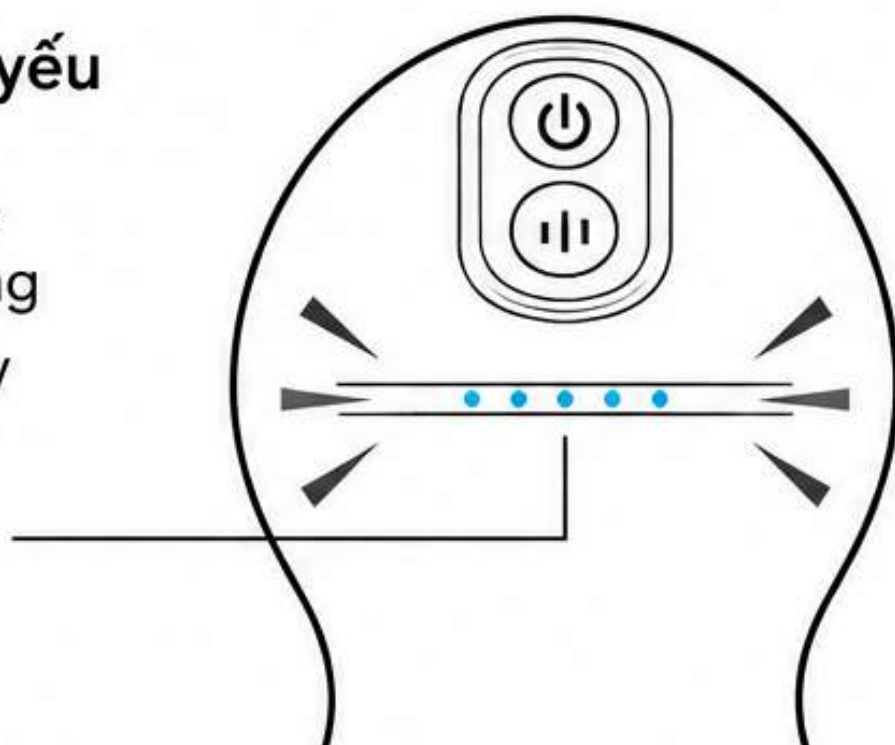

● Thời gian sạc và thời gian hoạt động ước tính*


Thời gian sạc	Thời gian hoạt động
Khoảng 4 giờ	Tối đa khoảng 5 giờ

- * Thời gian hoạt động là giá trị ước tính khi sử dụng ở chế độ cường độ thấp và trong môi trường tiêu chuẩn, và có thể sử dụng khoảng 3,5 giờ ở chế độ cường độ cao (mức EMS 2, nhiệt độ phòng 25°C). Thời gian sạc và thời gian hoạt động có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào dung lượng pin còn lại, môi trường sạc và môi trường sử dụng.
- ※ Nhiệt độ khuyến nghị khi sạc là từ 15°C đến 35°C. Sạc ngoài phạm vi nhiệt độ khuyến nghị có thể khiến thời gian sạc kéo dài hoặc không thể sạc.
- ※ Sau lần sạc đầu tiên, nếu không sử dụng trong thời gian dài rồi mới sạc lại, hoặc sau khi hết pin, thời gian sử dụng pin có thể ngắn. Vui lòng lặp lại quá trình sạc và sử dụng nhiều lần để pin trở về trạng thái bình thường.

1

Kết nối để sạc, cáp USB và củ sạc (đi kèm trong hộp) như hình bên phải.

*Lưu ý cắm đúng chiều để hình dạng đầu nối khớp với cổng cắm.

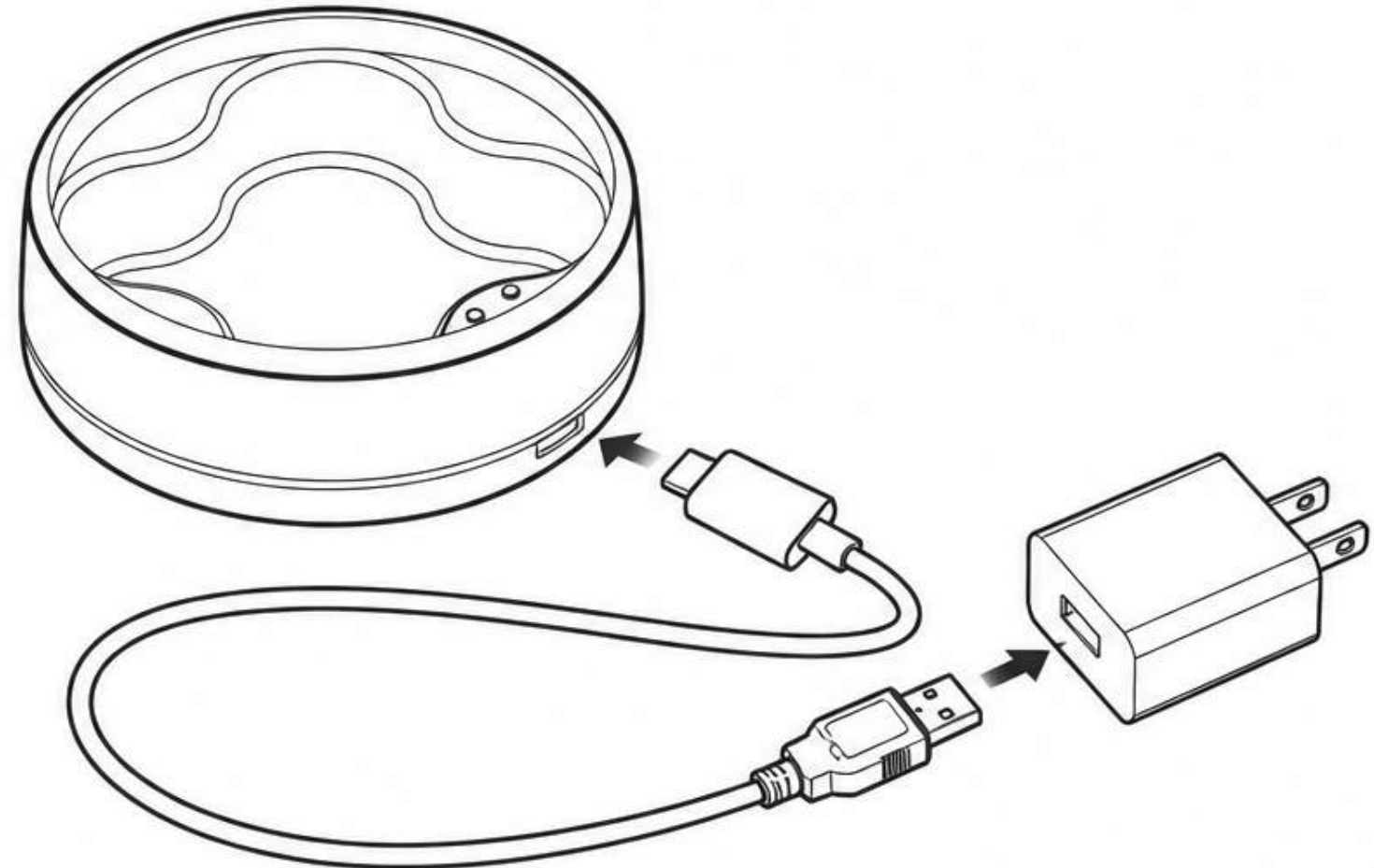

2

Cắm củ sạc (AC adapter) vào ổ cắm điện trên tường.

- ※ Vui lòng sử dụng củ sạc AC adapter đi kèm theo sản phẩm.
- ※ Mặc dù có thể sạc qua cổng USB của máy tính, v.v., nhưng trong một số trường hợp, máy tính hoặc pin dự phòng có thể không cung cấp đủ nguồn điện.
Vui lòng thay đổi nguồn điện và sạc lại.
Việc sử dụng sạc nhanh (fast charger) có thể gây hỏng thiết bị do quá áp, vì vậy vui lòng không sử dụng.

3

Đặt thân máy lên để sạc sao cho các cực sạc của thân máy và đế sạc tiếp xúc khít với nhau.

- ※ Trước khi sạc, hãy lau sạch nước trên thân máy và đế sạc thật kỹ.
Nếu còn nước trên các cực sạc và tiến hành sạc, có thể dẫn đến hỏng hóc.
- ※ Đèn LED sẽ nhấp nháy và việc sạc sẽ bắt đầu.

Yêu cầu

Nếu quá trình sạc không bắt đầu, hãy tháo đầu massage ra và thử đặt lại.
(Có thể do các cực sạc của thân máy và đế sạc chưa tiếp xúc đúng cách).

4

Sau khi sạc đầy, rút củ sạc (AC adapter) ra khỏi ổ cắm điện.

* Trong quá trình sạc, các đèn LED xanh dương sẽ nhấp nháy và sáng dần lên theo thứ tự. Khi cả 5 đèn LED từ 1 đến 5 đều sáng đứng là pin đã được sạc đầy.

Về pin sạc

- Ngay cả khi đã sạc, nếu thời gian sử dụng trở nên rất ngắn, điều đó có thể là do tuổi thọ pin. (Tuổi thọ pin thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng, bảo quản, v.v. Số lần sạc có thể từ 300 đến 500 lần.)
- Pin sạc bên trong máy là loại pin sạc lithium-ion. Pin này là linh kiện tiêu hao nên không thể thay thế. Vui lòng lưu ý.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng sạc lại pin ít nhất 1 lần mỗi tháng để thiết bị hoạt động bình thường. Nếu để pin cạn kiệt trong thời gian dài, pin có thể bị hỏng và không thể sạc được nữa.

Vui lòng đọc trước khi sử dụng

Về thiết bị an toàn

Trong quá trình sử dụng, nếu thiết bị tiếp xúc với da liên tục ở cùng một vị trí trên cơ thể trong hơn 3 giây, cơ chế bảo vệ sẽ tự động ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Để sử dụng tiếp, vui lòng bật lại nguồn điện.

Về đầu massage thay thế

Vui lòng thay đầu massage phù hợp với từng mục đích sử dụng. Đầu massage là vật tư tiêu hao. Trong trường hợp bị mòn, vui lòng thay thế bằng đầu massage mới (bán riêng).

Đầu massage Da đầu · Toàn thân

Có thể sử dụng cho nhiều vùng trên cơ thể như cánh tay, eo, đùi và toàn thân.




Đầu massage Dạng kim gai (Chuyên dụng cho da đầu)*

Mang lại kích thích sâu và mạnh mẽ.
Sử dụng cho da đầu.



Đầu massage Dành cho da mặt



Có thể sử dụng cho vùng mặt, cổ và vùng décolleté (ngực trên).

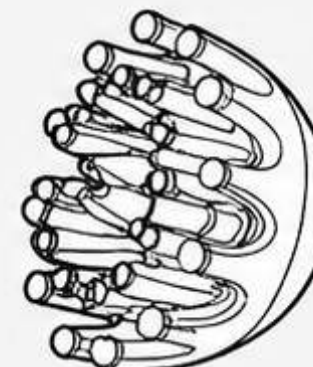

* Tuyệt đối không sử dụng đầu massage dạng kim gai cho vùng mặt hoặc cơ thể. Do lực bám của đầu này rất mạnh, có thể gây kẹt da hoặc tổn thương.

Lưu ý quan trọng về đầu massage

*Sản phẩm sử dụng EMS (kích thích điện) thông qua dẫn điện, nên đầu massage được tích hợp các vật liệu carbon (than). Vì vậy, có thể xuất hiện cặn đen bám trên da hoặc đồ vật do ma sát, vui lòng lưu ý. Tránh sử dụng trực tiếp trên quần áo và nên dùng trên làn da sạch. Ngoài ra, có thể còn sót lại các hạt carbon li ti hoặc cặn bản bám vào da. Trong trường hợp đó, hãy rửa sạch bằng nước.

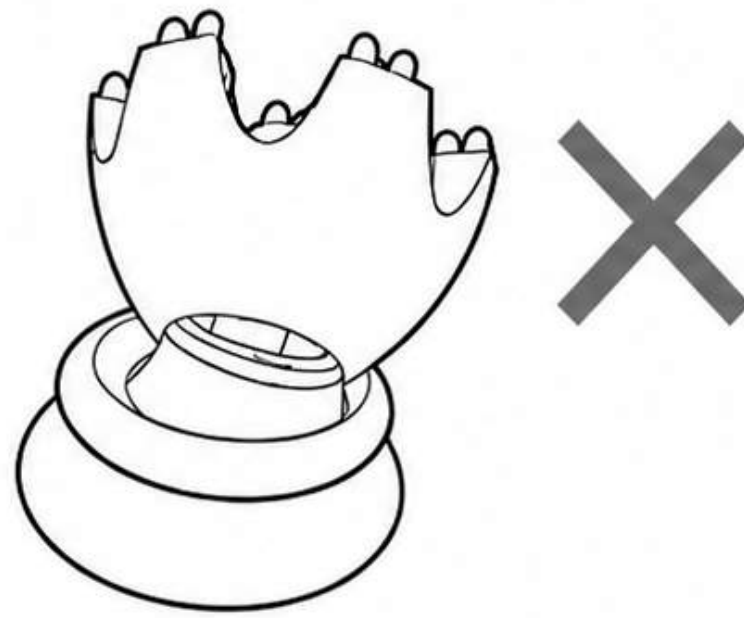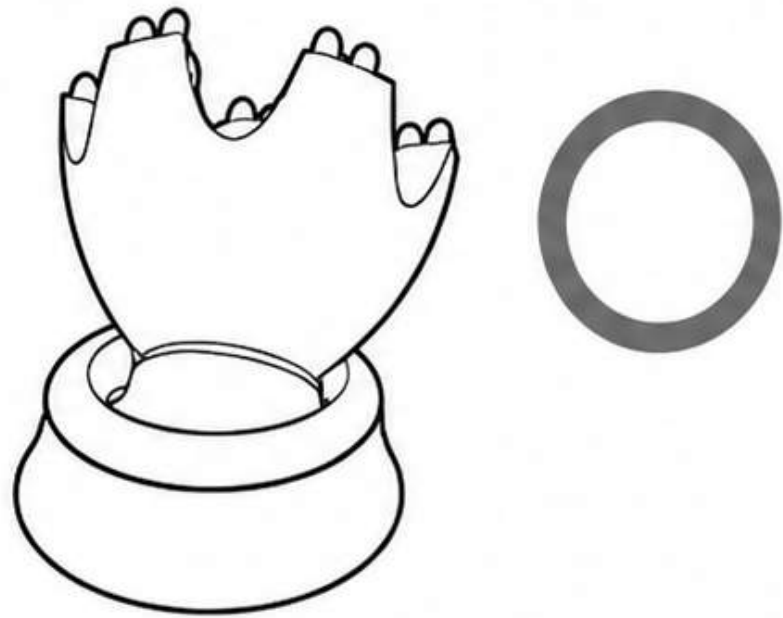

*Hãy ấn mạnh và đảm bảo đầu massage được lắp vào sát cỡ hoàn toàn. Nếu không lắp đúng cách, đầu massage có thể bị tuột ra ngoài trong quá trình sử dụng.

Về công nghệ EMS

EMS (Electrical Muscle Stimulation) là công nghệ kích thích cơ bằng điện, giúp cơ co thắt nhịp nhàng và hỗ trợ chăm sóc cơ thể hiệu quả.

Thiết bị có 5 mức cường độ EMS để lựa chọn.

Lưu ý: Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng, có làn da nhạy cảm hoặc sử dụng ở vùng cổ, vui lòng bắt đầu từ mức EMS Level 1 (chỉ đèn LED 1 sáng).

Lưu ý quan trọng khi sử dụng EMS

[**Dòng điện EMS hoạt động theo cơ chế dẫn truyền thông qua nước hoặc môi trường ẩm ướt.]**

Khi da bị khô, khả năng dẫn truyền EMS sẽ giảm, khiến bạn khó cảm nhận được kích thích. Để đạt hiệu quả tối ưu, hãy luôn giữ ẩm cho vùng da sử dụng bằng cách làm ướt với nước hoặc hơi ẩm.

Đối với vùng da đầu, dù là khu vực khó cảm nhận EMS, nhưng nếu bạn gội đầu và tạo bọt dầu gội, đồng thời sử dụng sản phẩm sao cho dầu massage tiếp xúc nhẹ nhàng với da đầu, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được kích thích EMS hơn so với khi da đầu khô.


Cảm nhận kích thích EMS có thể khác nhau tùy theo cơ địa của mỗi người.

Ngay cả với tóc khô hoặc làn da khô, vẫn có thể cảm nhận được kích thích ở một số người, trong khi ở người khác thì có thể khó cảm nhận hơn.

Về công nghệ EMS

Thiết bị sử dụng năng lượng điện để kích thích và tác động sâu vào các cơ. Bạn có thể lựa chọn linh hoạt giữa 5 cấp độ EMS.

Đối với người mới sử dụng lần đầu, người có làn da nhạy cảm hoặc khi dùng cho vùng da cổ, bắt buộc phải bắt đầu từ Mức độ 1 (chỉ có 1 đèn LED sáng).

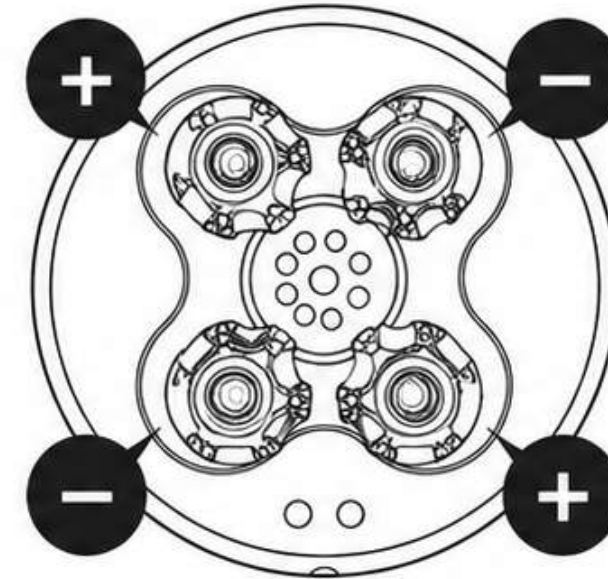

Lưu ý quan trọng khi sử dụng EMS

Dòng điện EMS hoạt động theo cơ chế dẫn truyền thông qua nước hoặc môi trường ẩm ướt.]

Nếu làn da bị khô, bạn sẽ rất khó cảm nhận được sự kích thích từ dòng điện EMS. Để trải nghiệm hiệu quả rõ rệt nhất, hãy luôn làm ẩm vùng da cần chăm sóc bằng nước sạch hoặc nước ấm trước khi dùng.


Da đầu vốn là vùng da ít nhạy cảm với EMS hơn các vùng khác. Tuy nhiên, nếu bạn làm ướt tóc thật kỹ, tạo bọt với dầu gội và để các đầu massage chạm sát vào da đầu thì sẽ dễ dàng cảm nhận được xung điện EMS rõ hơn.

Cường độ cảm nhận EMS sẽ khác nhau tùy thuộc vào cơ địa mỗi người. Bạn vẫn có thể dùng máy trên tóc khô hoặc da khô, nhưng hiệu quả kích thích điện sẽ giảm đi đáng kể.

Kiểm tra độ kích ứng da (Patch test)

Khi sử dụng sản phẩm lần đầu tiên, hãy bắt buộc thực hiện kiểm tra độ kích ứng để ngăn ngừa các vấn đề về da.

Vui lòng sử dụng đầu massage dành cho da đầu & toàn thân.

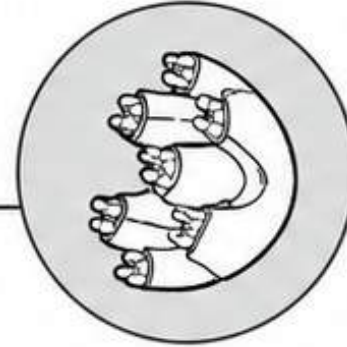

1

Làm sạch vùng da cần kiểm tra.

* Rửa sạch vùng da mặt trong cánh tay bằng xà phòng.

2

Làm ướt ẩm vùng mặt trong cánh tay với nước, bật nguồn thiết bị và massage trong khoảng 1 phút.

* Sử dụng ở chế độ tốc độ thấp và mức EMS 1 (chỉ 1 đèn LED sáng).

* Di chuyển thiết bị từ từ trên vùng da, giữ tiếp xúc nhẹ nhàng.

* Nếu trong quá trình thực hiện xuất hiện đỏ, ngứa, rát hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.



3

Theo dõi và đảm bảo không có biểu hiện bất thường nào trên da (như đau rát hoặc nóng bừng) trong vòng 24 giờ.

* Sau khi sử dụng thiết bị, làn da có thể bị ửng đỏ tạm thời do các kích thích điện. Hiện tượng này hoàn toàn bình thường và sẽ tự biến mất sau một khoảng thời gian. Tuy nhiên, nếu tình trạng đỏ rát không thuyên giảm, hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.



Tuyệt đối không sử dụng thiết bị nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên da.

Hướng dẫn sử dụng

Nhiệt độ nước khuyến nghị khi sử dụng là từ 5°C đến 42°C.

1

Lựa chọn dầu massage phù hợp và lắp vào thân máy.

- Vui lòng đưa dầu massage vào theo phương thẳng đứng, không xoay hoặc vặn để tránh gây hư hỏng hoặc lỗi cho thiết bị.

2


Làm ướt ẩm vùng da đầu hoặc làn da của bạn.

- ◎ **Da đầu:** Làm ướt bằng nước sạch, dầu gội, v.v.
- ◎ **Da mặt & Cơ thể:** Làm ướt bằng nước sạch, nước ấm, lotion, gel dưỡng, v.v.
- Các xung điện EMS hoạt động dựa trên cơ chế dẫn truyền qua môi trường nước hoặc ẩm. Vì vậy, cần đảm bảo da hoặc da đầu được làm ướt đầy đủ để đạt hiệu quả tối ưu.
- Tuyệt đối không sử dụng với các loại dầu (dầu massage, dầu tẩy trang, dầu dưỡng tóc, v.v.) hoặc các hạt tẩy tế bào chết, vì có thể gây tắc nghẽn hoặc làm hư hỏng thiết bị.

3

Cầm chắc thân máy bằng tay như hình bên phải.

* Khi tay dính dầu gội hoặc mỹ phẩm dưỡng da, hãy rửa sạch trước khi sử dụng để tránh trơn trượt và rơi máy gây hư hỏng.

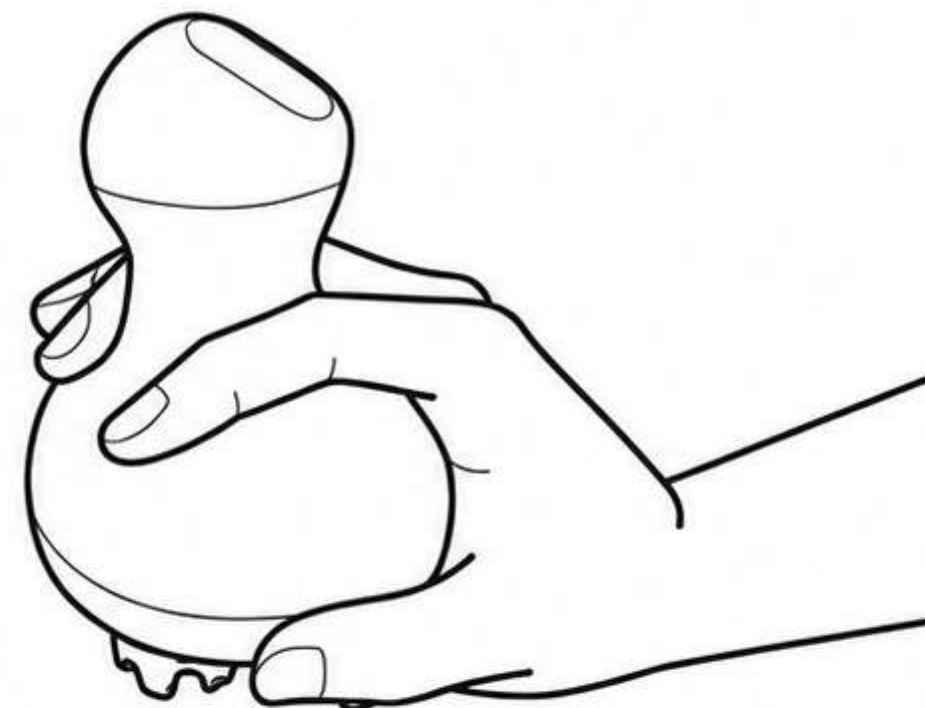


4

Nhấn giữ nút nguồn để bật máy, sau đó lựa chọn tốc độ xoay phù hợp.

* Mỗi lần nhấn ngắn nút nguồn, chế độ tốc độ sẽ tự động thay đổi theo thứ tự:

Chế độ tốc độ thấp ⇒ Chế độ tốc độ trung bình ⇒ Chế độ tốc độ cao

- * Khi mới sử dụng hoặc chưa quen, vui lòng bắt đầu từ chế độ tốc độ thấp.
- * Khi máy được bật, đèn LED màu đỏ ở đáy máy sẽ sáng lên. Ánh sáng LED này có tác dụng chăm sóc da (liệu pháp ánh sáng).
Lưu ý: Không thể tắt riêng đèn LED đỏ.

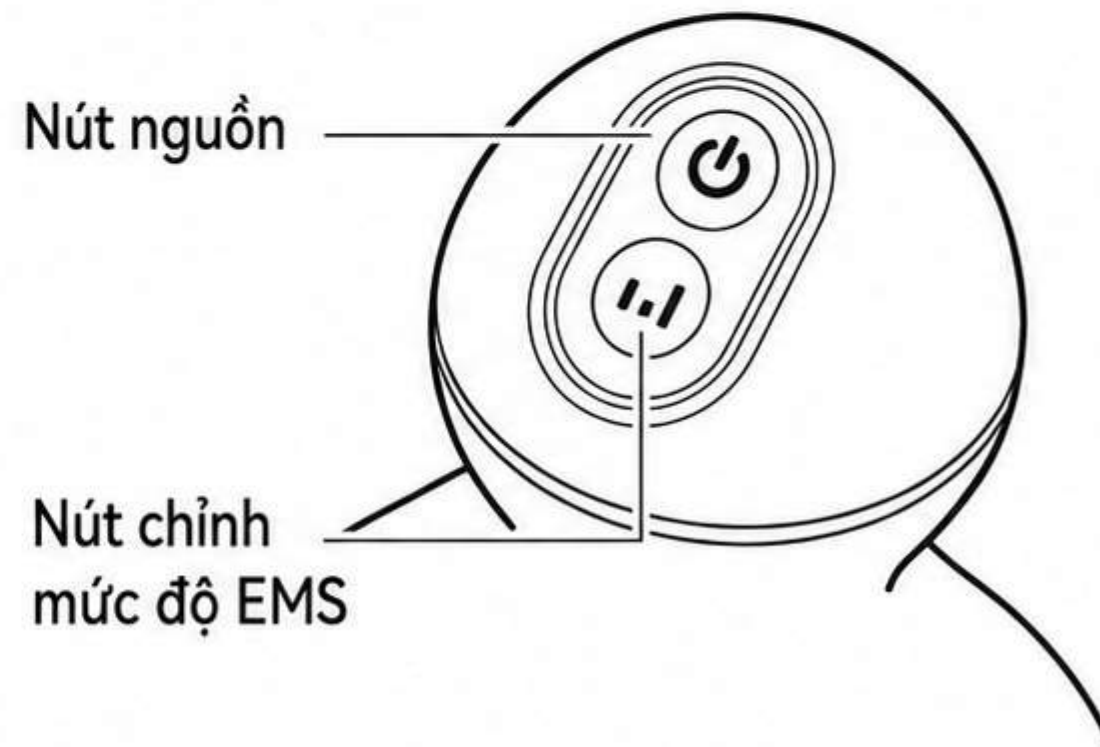

5

Nhấn nút chỉnh mức độ EMS để lựa chọn mức độ phù hợp.

- ※ Có thể lựa chọn mức EMS từ 5 cấp độ. Mức mặc định là Level 1.
- ※ Khi mới bắt đầu sử dụng hoặc nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc vùng cổ dễ bị kích ứng, vui lòng bắt đầu từ Level 1 (LED 1 sáng).
- ※ Sản phẩm có thể sử dụng cho da đầu, mặt và toàn thân. Cảm giác kích thích điện có thể khác nhau tùy theo từng vùng sử dụng. Khi thay đổi vùng sử dụng, vui lòng luôn điều chỉnh lại từ Level 1 để đảm bảo an toàn.

6

Tiến hành chăm sóc da theo các hướng dẫn tham khảo dưới đây.

Chăm sóc da đầu

Sử dụng dầu massage dành cho da đầu và toàn thân hoặc dầu massage dạng kim gai theo các bước dưới đây.

- ※ Da đầu là vùng khó cảm nhận EMS do ít dễ tiếp xúc trực tiếp với da, nên để tăng hiệu quả, hãy gội đầu thật kỹ và tạo nhiều bọt, sau đó sử dụng sản phẩm sao cho các đầu massage tiếp xúc chắc chắn với da đầu.
Cảm giác kích thích EMS có thể khác nhau tùy theo từng người.



● Ấn nhẹ lên da

➔ Di chuyển theo hướng mũi tên

BƯỚC 1


Chăm sóc vùng trán và vùng thái dương.

- ① Giữ máy tại đường chân tóc khoảng 5 giây.
- ② Từ vị trí đó, di chuyển máy chậm rãi lên hướng đỉnh đầu khoảng 5 giây.

※ Lặp lại ① và ② 2 lần.

※ Khi bắt đầu, hãy di chuyển máy theo chuyển động lắc nhỏ giúp đầu massage tiếp xúc dễ dàng hơn với da đầu.


※ Vui lòng không ấn quá mạnh.
Ấn nhẹ và đều tay tuyệt đối.

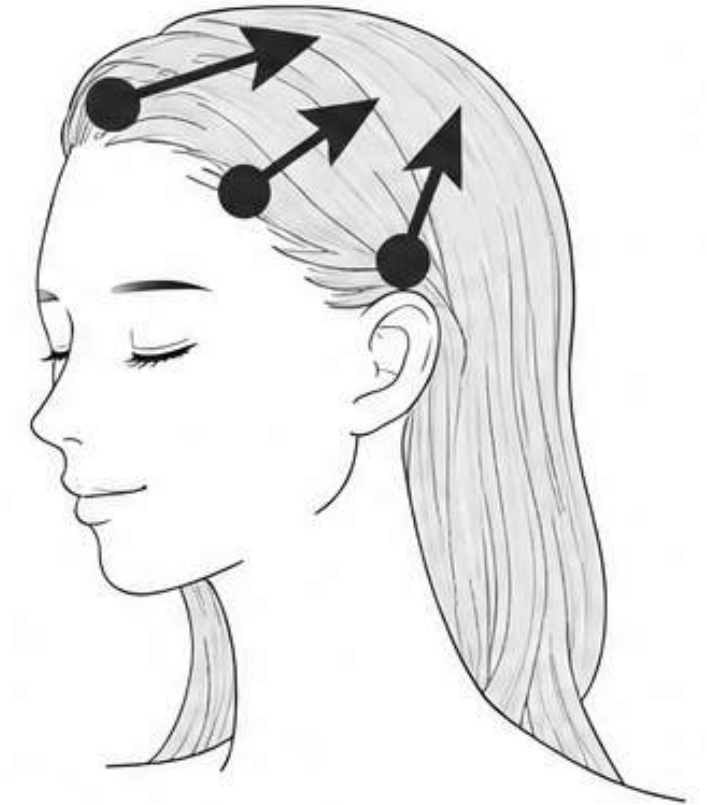

BƯỚC 2

Chăm sóc vùng sau gáy.


Thực hiện theo các bước và phương pháp tương tự như BƯỚC 1, di chuyển máy từ đường chân tóc vùng gáy lên hướng đỉnh đầu.

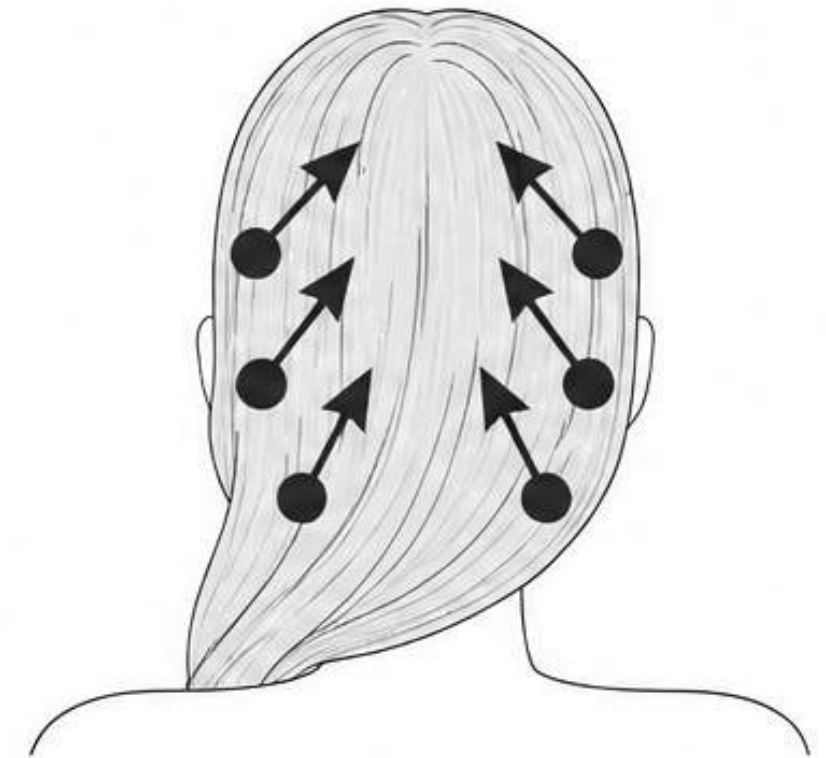

BƯỚC 3

Chăm sóc chuyên sâu vùng đỉnh đầu và sau gáy.

Ấn nhẹ máy tại các vị trí như hình minh họa theo thứ tự từ đỉnh đầu dọc xuống phần chân tóc sau gáy, giữ khoảng 5 giây tại mỗi điểm rồi di chuyển.

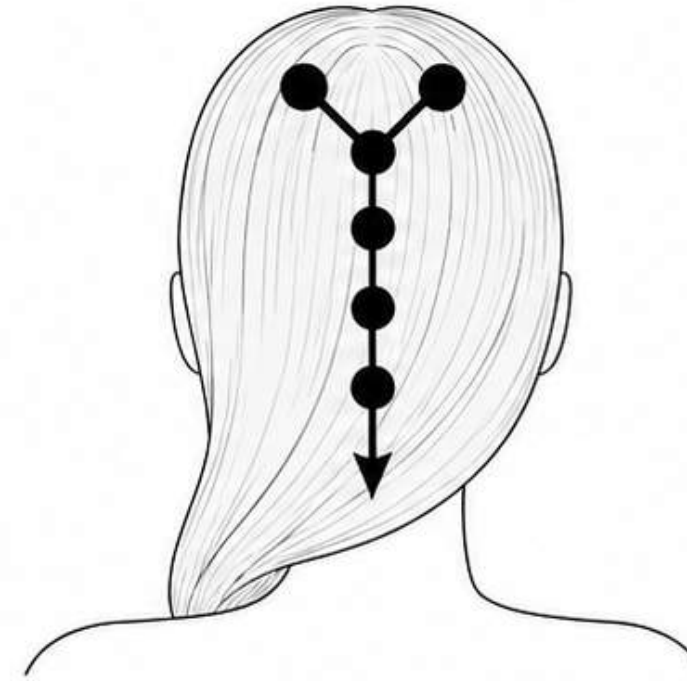

● Hướng dẫn đặt đầu chổi massage đúng cách



Toàn bộ bề mặt chổi tiếp xúc phẳng và áp sát vào da đầu.



Một phần của đầu chổi bị hở, lệch và không chạm vào da đầu.

Chăm sóc da mặt


Sử dụng đầu massage chuyên dụng cho da mặt và tiến hành chăm sóc theo các bước dưới đây.

* Lưu ý: Bắt buộc phải làm ẩm da thật kỹ bằng nước sạch, lotion (nước hoa hồng) hoặc gel dưỡng trước khi bắt đầu sử dụng máy.

● Ấn nhẹ lên da → Di chuyển theo hướng mũi tên

- ① Từ cằm, di chuyển máy dọc theo đường viền hàm lên đến phía dưới tai.
- ② Từ khóe miệng, di chuyển máy hướng lên thái dương.
- ③ Từ hai cánh mũi, di chuyển máy hướng lên thái dương.
- ④ Từ giữa trán, di chuyển máy hướng lên đường chân tóc.

※ Lặp lại ① → ② → ③ → ④ 3 lần.

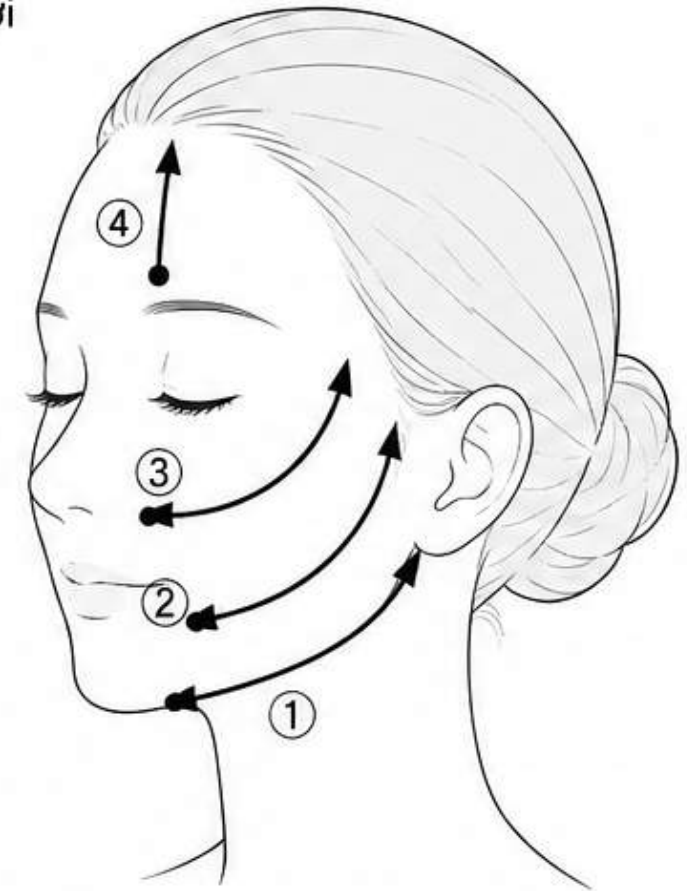

※ Nếu da bị khô, bạn có thể cảm thấy EMS không rõ rệt. Để cảm nhận được EMS rõ ràng hơn, hãy đảm bảo làm ẩm da thật kỹ bằng nước sạch hoặc nước ấm trước khi sử dụng.

※ Khi sử dụng trên mặt, hãy tẩy trang sạch sẽ.

※ Vui lòng sử dụng ở chế độ EMS mức thấp, nhấn nhẹ và di chuyển máy chậm rãi, không ấn quá mạnh.

※ Khi sử dụng ở vùng cổ, bạn có thể cảm nhận EMS mạnh hơn, vui lòng thận trọng.

**Chăm
sóc
cơ thể**

Sử dụng đầu massage chuyên dụng cho "Da đầu · Toàn thân", thiết bị hỗ trợ chăm sóc hiệu quả cho các vùng cơ thể như bắp tay, eo, đùi, bắp chân, v.v.

- ※ Không sử dụng đầu massage dạng kim (needle-shape) trên cơ thể. Lực tác động quá mạnh khi ấn có thể gây đau hoặc tổn thương da.
- ※ Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ phần "Lưu ý an toàn" và không sử dụng thiết bị ở những vị trí ngoài vùng chỉ định. Lưu ý: Khi ở trong nước, thiết bị sẽ tự động dừng hoạt động.

7

Sau khi hoàn thành quá trình chăm sóc, nhấn giữ nút nguồn để tắt thiết bị.

- ※ Ngay cả khi bạn không nhấn giữ nút nguồn, thiết bị sẽ tự động tắt sau khoảng 15 phút kể từ khi bắt đầu hoạt động để đảm bảo an toàn.
- ※ Khi tắt nguồn, các đầu massage di động sẽ tự động quay về vị trí gốc được chỉ định trong vài giây. Đây là cơ chế bình thường, không phải là lỗi.
- ※ Để giữ thiết bị luôn sạch sẽ và bền, vui lòng vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng. Tham khảo mục "Cách vệ sinh" trong hướng dẫn sử dụng.

8

Để sử dụng cho da đầu, hãy xả sạch dầu gội đầu và tiến hành các bước chăm sóc tóc thông thường (như dùng kem ủ/dầu xả).

※ Vì dầu massage có chứa thành phần carbon (than hoạt tính) để dẫn truyền điện EMS, màu của carbon có thể bám vào tế bào chết hoặc bã nhờn trên da, tạo thành lớp bột mịn màu đen. Nếu gặp tình trạng này, bạn chỉ cần rửa sạch lại bằng nước.



Li-ion

Thiết bị này (thân máy) có chứa pin sạc Lithium-ion tích hợp bên trong. Khi muốn tiêu hủy hoặc vứt bỏ sản phẩm, vui lòng tuân thủ đúng quy định về phân loại và tái chế rác thải tại địa phương của bạn.

Bạn có thể kiểm tra các lưu ý quan trọng về sản phẩm chứa pin Lithium-ion tại đường link dưới đây:

<https://mytrex.jp/support/safety/battery/>

Hướng dẫn vệ sinh máy

1

1 Đảm bảo rằng nguồn điện của thiết bị đã được tắt hoàn toàn.

2

2 Xả sạch tóc rụng, bọt xà phòng hoặc vết bẩn bám trên thân máy dưới vòi nước.

3


3 | Tháo đầu massage ra khỏi thân máy (Xem Hình 1).

*Lưu ý: Hãy thao tác thật nhẹ nhàng khi tháo để tránh làm rách đầu silicon.



Tuyệt đối không kéo căng bộ phận chuyển động.

*Việc dùng lực kéo quá mạnh có thể gây nguy cơ rách hoặc hỏng hóc.

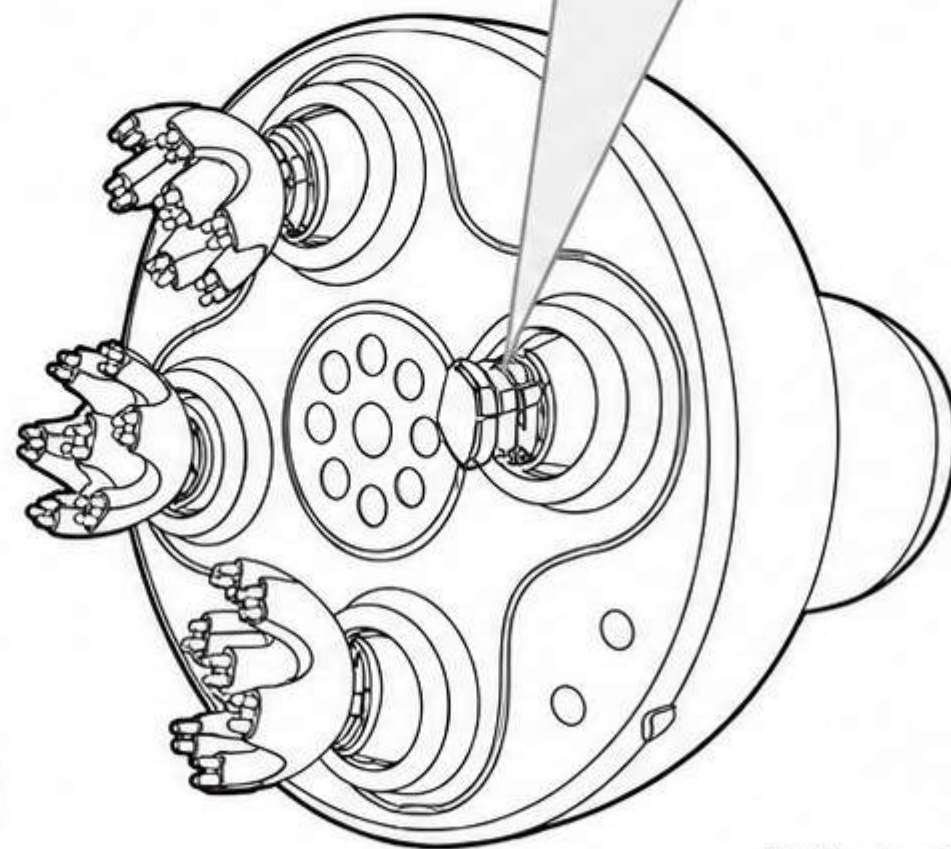


(Hình 1)

4


Sử dụng chổi vệ sinh đi kèm để làm sạch các vết bẩn ở từng bộ phận, sau đó xả sạch lại bằng nước.

*Vui lòng vệ sinh bộ phận chuyển động của thân máy và đầu massage thay thế giống như trong Hình 2 và Hình 3.

*Đối với các vết bẩn cứng đầu khó làm sạch, bạn có thể sử dụng một ít chất tẩy rửa trung tính đã được pha loãng.

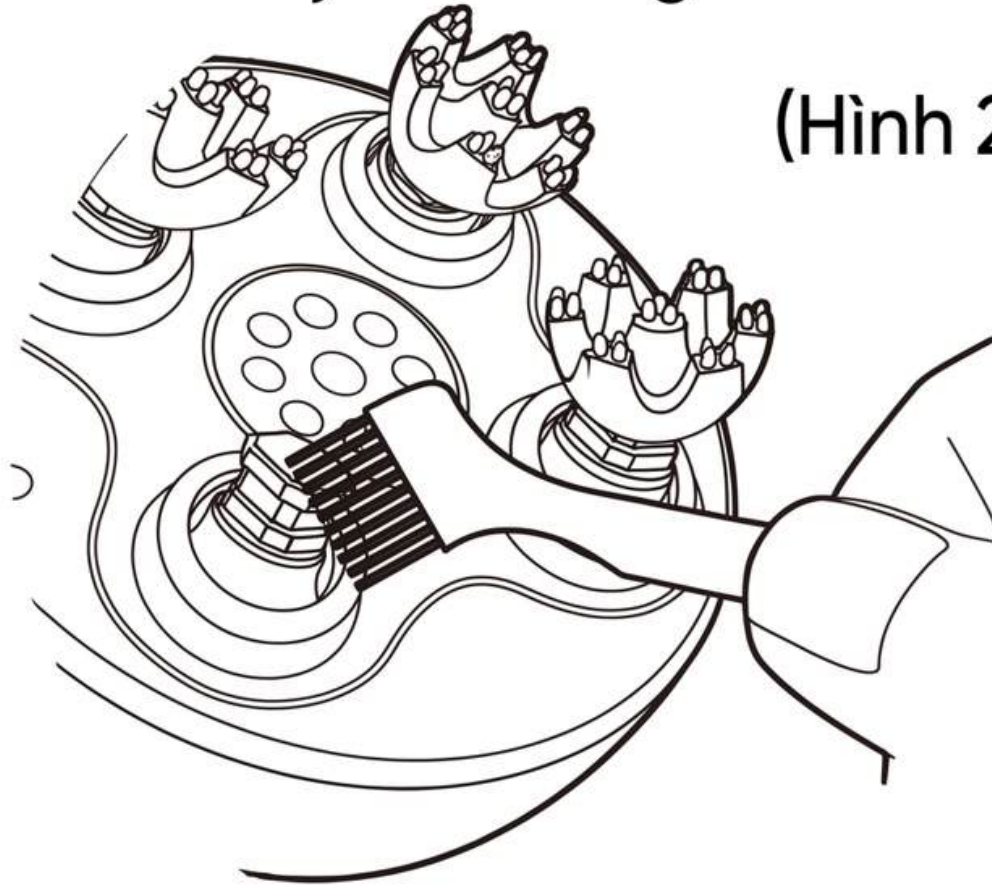

(Hình 2)

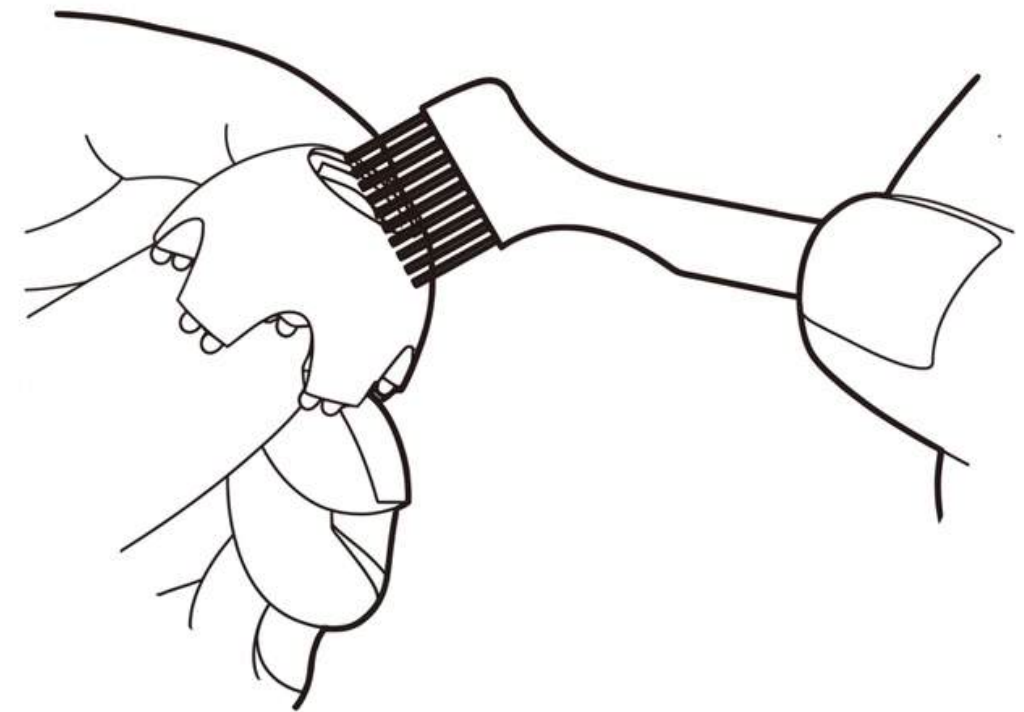

(Hình 3)

5

Dùng khăn mềm hoặc vải khô lau sạch toàn bộ nước trên thân máy và đầu massage, sau đó để khô tự nhiên ở nơi thoáng gió.

- ※ Sau khi dùng, nước có thể đọng lại ở bộ phận chuyển động hoặc bên trong nắp dưới đáy. Tuy nhiên, kết cấu bên trong máy đạt chuẩn chống nước tối ưu IPX7 nên hoàn toàn không có hiện tượng rò rỉ nước vào trong. Nếu muốn làm sạch kỹ hơn, bạn chỉ cần lắc nhẹ thân máy để nước bên trong thoát hết ra ngoài.
- ※ Vì đầu massage tích hợp thành phần carbon (than hoạt tính) để hỗ trợ dẫn truyền điện EMS, một lượng nhỏ carbon có thể hòa vào nước sau khi dùng khiến máy hoặc đầu massage hơi sẫm màu. Bạn nên dùng một chiếc khăn tối màu hoặc khăn để làm sạch để lau máy.
- ※ **Đặc biệt lưu ý:** Hãy lau thật khô vùng cực sạc trên thân máy, tuyệt đối không để đọng nước.
- ※ Tuyệt đối không đặt máy lên đế sạc hoặc bỏ mặc khi thiết bị còn ẩm ướt. Điều này có thể gây ra mùi hôi, biến đổi màu sắc hoặc dẫn đến hỏng hóc động cơ.

6

Khi thân máy và các đầu massage đã khô ráo hoàn toàn, tiến hành lắp đầu massage trở lại thân máy.

- ※ Hãy thao tác thật nhẹ nhàng và khéo léo khi lắp để tránh làm rách lớp silicon của đầu massage.