


Thân máy

Bộ phận dẫn điện*1

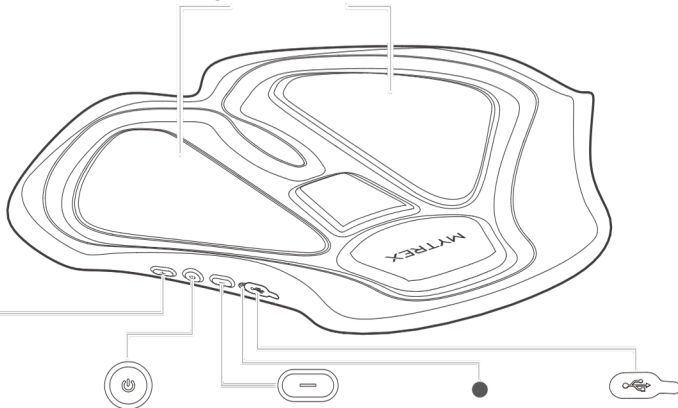

NÚT TĂNG

Khi nhấn, mức độ máy sẽ tăng một cấp.

NÚT KHỞI ĐỘNG

Nhấn và giữ để khởi động/tắt nguồn

NÚT GIẢM

Khi nhấn, mức độ máy sẽ giảm 1 cấp.

ĐÈN LED*2

Màu sắc và trạng thái biến đổi trong quá trình hoạt động và sạc.

CỔNG SẠC ĐIỆN

Mở nắp để tìm cổng sạc.

CÁCH SẠC PIN

*1 Lưu ý về các bộ phận có điện áp

*Carbon được thêm vào bộ phận dẫn điện để thực hiện EMS (kích thích điện). Do đó, làn da của bạn có thể trở nên sạm màu và bẩn.


Trong trường hợp này, hãy rửa sạch bằng nước.

*Sau khi sử dụng, một lượng nhỏ than có thể hòa tan vào nước và chuyển sang màu đen, nhưng điều này là hoàn toàn bình thường.

Nếu nó bị bẩn, hãy rửa sạch bằng nước.

Thiết bị
phụ trợ

Bộ chuyển đổi nguồn AC
chuyên dụng

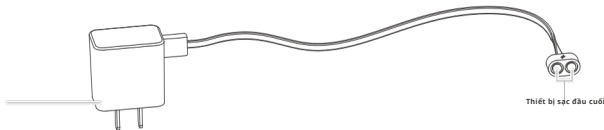

* Thân chính có khả năng chống nước IPX-8 (cấp bảo vệ chống nước JIS).

Đậy nắp cổng sạc và ngâm vào nước nóng.

Vui lòng lấy nó ra khỏi nước nóng sau mỗi lần sử dụng và không để nó trong nước quá lâu.

*Bộ chuyển đổi AC chuyên dụng không có khả năng chống thấm nước.

Nên bảo quản ở nơi khô ráo và không bao giờ sử dụng khi ướt hoặc sạc trong phòng tắm.

*2 Về đèn LED

	Màu ánh sáng	Trạng thái đèn
Đang hoạt động	Xanh dương (sáng)	Bật nguồn
Đang sạc pin	Đỏ (nhấp nháy)	Đang sạc
	Xanh dương (sáng)	Sạc đầy

Trước khi tiến hành sử dụng (phương pháp sạc)

Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên hoặc khi pin sắp hết, hãy tắt nguồn thiết bị trước khi tiến hành sạc.

Đảm bảo làm sạch hơi ẩm khỏi cực sạc của bộ phận chính bằng tấm bông, v.v. và lau khô hoàn toàn.
Điều này có thể dẫn đến sự cố.

•Thời gian sạc/hoạt động dự kiến*

Thời gian sạc pin	Thời gian hoạt động
Khoảng 2 giờ	Khoảng 15 giờ

•Khi pin ở mức thấp

"Boo, boo" mỗi 30 giây một lần
Nó sẽ rung hai lần.

*Thời gian hoạt động là hướng dẫn sử dụng ở mức độ kích thích 1. Ở cấp độ 10, thiết bị có thể hoạt động trong khoảng 6 tiếng rưỡi, và ở cấp độ 20, thời gian sử dụng khoảng 4 tiếng rưỡi.

Thời gian sạc và thời gian hoạt động có sự khác biệt lớn tùy thuộc vào mức pin còn lại, môi trường sạc và điều kiện sử dụng.

*Nhiệt độ sạc được khuyến nghị là từ 15oC đến 35oC. Nếu nhiệt độ nằm ngoài khoảng khuyến nghị, thời gian sạc có thể kéo dài hơn hoặc pin có thể không được sạc. *

Thời lượng pin có thể bị giảm sút khi sạc lần đầu hoặc sau một thời gian dài không sử dụng. Tuy nhiên, nó sẽ trở lại bình thường sau khi được sạc và sử dụng nhiều lần.

Trước khi tiến hành sử dụng (phương pháp sạc)

1

Mở nắp cổng sạc của thiết bị chính và kết nối thiết bị phụ với thiết bị chính.

* Không nên kéo nắp một cách cưỡng bức.


Cắm bộ chuyển đổi nguồn AC chuyên dụng vào ổ cắm trên tường.

2

Đèn LED sẽ nhấp nháy màu đỏ và quá trình sạc sẽ được khởi động.

3

**Sau khi hoàn tất việc sạc (đèn LED phát sáng màu xanh),
Hãy ngắt kết nối bộ chuyển đổi AC chuyên dụng khỏi ổ cắm và đóng nắp cổng sạc lại.**

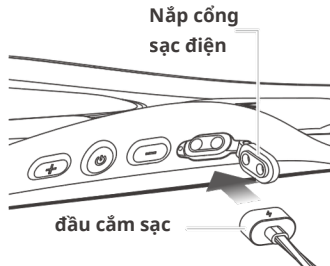

Về ắc quy sạc

- Nếu thời gian sử dụng trở nên rất ngắn ngay cả sau khi đã sạc, pin có thể đã hết tuổi thọ. (Tuổi thọ pin thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, bảo quản, v.v.. Số lần sạc và xả pin ước tính là từ 300 đến 500 lần.)
- Pin không thể thay thế.
- Khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy sạc đầy thiết bị trước khi cất giữ. Vui lòng vận hành sản phẩm này mỗi ba tháng một lần và sạc lại. Nếu để nó không được sạc trong thời gian dài, có thể nó sẽ không sạc được.

Cách sử dụng sản phẩm

Sản phẩm này được sử dụng trong bồn tắm. Tiếp cận khu vực thân dưới của bạn trong khi tắm.

1

Đảm bảo nắp cổng sạc đã được đóng kín và đặt vào bồn tắm.

2

Đặt mông hoặc chân của bạn lên phần có điện của thiết bị chính.


* Hãy đảm bảo rằng làn da của bạn tiếp xúc đều với các bộ phận có năng lượng bên trái và bên phải.

3



Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 2 giây.

• Thiết bị sẽ rung 2 lần và khởi động ở mức kích thích 1.

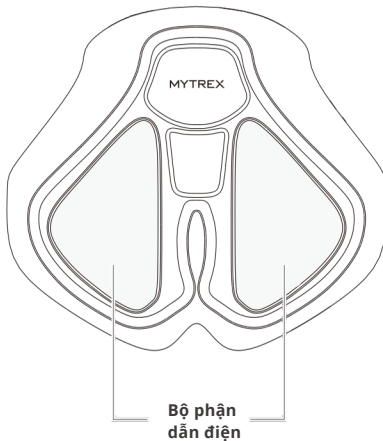

4

Chọn mức độ kích thích bằng các nút điều chỉnh cường độ (/).

- **Mỗi lần bạn nhấn nút, nút sẽ rung một lần và mức độ sẽ thay đổi.**

- * **Mức độ kích thích có thể được lựa chọn từ cấp độ 1 đến 20. Mặc định là mức độ kích thích 1.**

- * **Nếu bạn nhấn nút tăng khi đang ở cấp độ 20 hoặc nhấn nút giảm khi đang ở cấp độ 1, nó sẽ rung 3 lần**

*Để nâng cấp nó lên cấp độ 2 hoặc cao hơn, hãy đảm bảo rằng nó được vận hành dưới nước. Nếu bạn lấy nó ra khỏi nước khi đang sử dụng ở cấp độ 2 hoặc cao hơn, nó sẽ trở về cấp độ 1 sau khoảng 3 giây để đảm bảo an toàn.

5



Để tạm dừng hoạt động, hãy nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 2 giây.

- **Thiết bị sẽ rung một lần và sau đó tắt.**

Nguồn sẽ tự động ngắt sau 15 phút kể từ khi bắt đầu hoạt động.

| Về cách sử dụng máy |

Bằng cách điều chỉnh góc ngồi hoặc thay đổi vị trí của thiết bị, bạn có thể tiếp cận toàn bộ vùng thân dưới.

* Nếu sử dụng ở nhiều vị trí, vui lòng đảm bảo tổng thời gian cho mỗi lần sử dụng không vượt quá 15 phút.

* Không sử dụng ở phần trên cơ thể (Trên phần rốn)

V
í
d
ụ
á
p
d
ụng

