


# MYTREX ANGEL

*Kiến tạo vòng eo săn chắc*

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## PHIẾU BẢO HÀNH

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của MYTREX. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để đảm bảo vận hành sản phẩm đúng cách và an toàn. Tài liệu này có kèm theo thẻ bảo hành, vì vậy sau khi đọc xong, quý khách vui lòng lưu giữ cẩn thận để sử dụng khi cần thiết

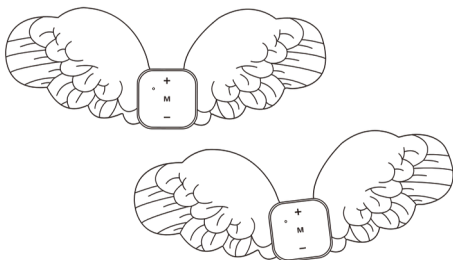


## PHỤ KIỆN BÁN RIÊNG

Miếng Wing Pad là phụ kiện tiêu hao. Khi bề mặt dính (mặt gel) bị hư hỏng hoặc giảm độ bám, vui lòng thay thế bằng miếng pad chính hãng được bán riêng của công ty chúng tôi. Vui lòng không sử dụng các loại pad không phải chính hãng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố hoặc hư hỏng nào phát sinh do việc sử dụng sản phẩm không chính hãng. Để mua sản phẩm chính hãng, vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm hoặc Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Công ty Sotsu Medical Co., Ltd


**Tên sản phẩm:** Miếng dán cánh thay thế MYTREX Angel  
**Mã sản phẩm:** MEMS-1812GEL

## 2 TÊN CÁC BỘ PHẬN

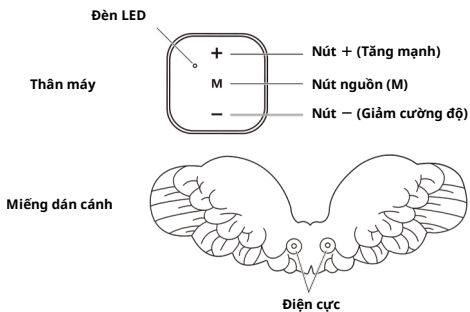


### MẶT SAU CỦA THÂN MÁY

**Điện cực (thân máy)**

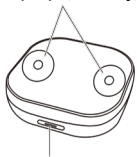

**Cổng Micro USB  
(dùng để sạc)**

**Bề mặt dính (bề mặt gel)**

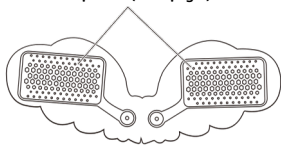

### BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM

- Thân máy . . . . . 2 cái
- Miếng dán Wing Pad\* . . . . . 2 miếng
- Bộ chuyển đổi AC chuyên dụng . . . . . 1 cái
- Cáp USB chuyên dụng . . . . . 1 sợi
- Tấm đế bảo quản . . . . . 1 tấm
- Sách hướng dẫn sử dụng . . . . . 1 cuốn

※ Miếng dán Wing Pad là phụ kiện tiêu hao. Khi sử dụng nhiều lần, bụi bẩn hoặc tế bào da bám trên bề mặt dính sẽ làm giảm độ bám dính của miếng pad. Nếu tiếp tục sử dụng trong tình trạng này, miếng điện cực có thể bị bong ra hoặc không bám chặt vào cơ thể, có thể gây ra bóng, đỏ da hoặc đau. Khi bề mặt dính (mặt gel) bị hư hỏng hoặc bị khô, vui lòng thay thế bằng miếng pad chính hãng được bán riêng của công ty chúng tôi

## 3. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (CÁCH SẠC PIN)

Khi sử dụng lần đầu hoặc khi dung lượng pin giảm (đèn đỏ nhấp nháy 3 lần liên tiếp mỗi 5 giây, và thiết bị phát tiếng “bíp” mỗi 1 phút), vui lòng tắt nguồn thiết bị trước khi tiến hành sạc

### ● Thời gian sạc dự kiến

Thời gian sạc	Thời gian hoạt động
Khoảng 2,5 giờ	Khoảng 3 giờ (khi sạc đầy)


- ※ Nhiệt độ khuyến nghị khi sạc là từ 15°C đến 35°C. Nếu sạc ngoài khoảng nhiệt độ này, thời gian sạc có thể kéo dài hoặc thiết bị có thể không sạc được
- ※ Thời gian sạc và thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy thuộc vào mức dung lượng pin còn lại và môi trường sạc

### 1 Kết nối bộ chuyển đổi AC, cáp USB và thân máy đi kèm như hình minh họa bên dưới

※ Hãy đảm bảo đầu cắm đúng chiều với cổng kết nối và nhẹ nhàng cắm vào đến hết phần chân cắm. Có thể sạc đồng thời 2 thân máy.

### 2 Cắm bộ chuyển đổi AC vào ổ điện trên tường.

※ Trong khi sạc, đèn đỏ sẽ sáng

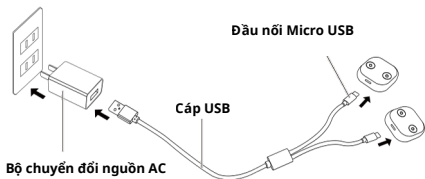

### 3 Sau khi sạc xong, rút bộ chuyển đổi AC ra khỏi ổ điện

※ Khi đèn trắng sáng, nghĩa là quá trình sạc đã hoàn tất.  
Tháo thân máy ra khỏi cáp USB

### 4 Tháo thân máy ra khỏi cáp USB


### ● Về tuổi thọ của pin sạc tích hợp

Pin sạc là phụ kiện tiêu hao. (Thời gian bảo hành là 6 tháng kể từ ngày mua.) Nếu thời gian sử dụng trở nên rất ngắn dù đã sạc đầy, có thể pin đã đến cuối tuổi thọ. (Số lần sạc tham khảo khoảng 400 lần.) Tuổi thọ pin có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào cách sử dụng và điều kiện bảo quản

# 4 Cách sử dụng


## 1 Lắp thiết bị chính vào miếng đệm cánh.

※ Hãy thực hiện sau khi xác nhận nguồn của thiết bị chính đã được tắt. Hãy xác nhận xem các điện cực bên trái và bên phải đã được lắp chắc chắn chưa.

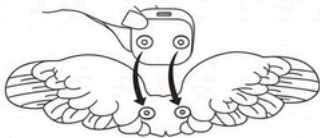

## 2 Bóc lớp màng bảo vệ của bề mặt dính (bề mặt gel).

※ Để bề mặt gel không bị bong ra khỏi miếng đệm cánh, hãy dùng móng tay ấn nhẹ vào mép của bề mặt gel và bóc từ từ.

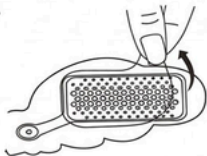

## 3 Dán vào vùng da muốn sử dụng.



### Lưu ý

- Không bật nguồn trước khi dán thiết bị lên cơ thể. Nếu dòng điện truyền qua ngón tay hoặc các bộ phận khác, có thể gây cảm giác đau mạnh
- Trước khi dán, hãy lau sạch mồ hôi và kem dưỡng da trên vùng da sử dụng. Nếu không, độ bám của bề mặt gel có thể bị giảm
- Bề mặt gel phải được dán sát hoàn toàn lên da ở cả hai bên. Nếu có khe hở giữa bề mặt gel và da, dòng điện có thể không truyền đều, gây kích thích mạnh hoặc cảm giác đau
- Nếu vùng sử dụng có lông, nên xử lý lông trước để bề mặt gel bám sát da tốt hơn. Tuy nhiên, không nên sử dụng thiết bị ngay trong ngày vừa xử lý lông
- Sản phẩm này không có chức năng chống nước. Không sử dụng ở nơi có nước hoặc nơi có độ ẩm cao
- Không dán thiết bị lên vùng gần tim hoặc các vùng niêm mạc như bộ phận sinh dục
- Không sử dụng khi đang vận động mạnh. Mồ hôi có thể gây kích ứng da hoặc làm giảm độ bám của bề mặt gel


### ● Các vùng có thể sử dụng

- Vùng eo / thắt lưng
- Đùi và bắp chân
- Mông
- Bắp tay

## 4. Cách sử dụng

### 4. Nhấn nút nguồn (M) để bật máy


- Máy sẽ phát tiếng "bíp" khi khởi động
- Mặc định ở chế độ tự động, cường độ 0 (rất nhẹ)
- Sau khi chọn chế độ, nhấn "+" để bắt đầu

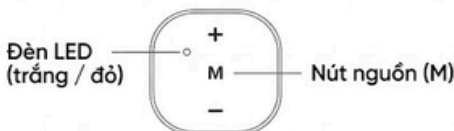

### 5. Nhấn nút (M) để chuyển đổi chế độ

- Mỗi lần nhấn sẽ đổi chế độ
- Chế độ tự động (khoảng 15 phút)
  - Đèn trắng nhấp nháy
  - Máy tự thay đổi tần số từ 5Hz - 60Hz
  - Tác động từ cơ nông đến cơ sâu
  - Lặp lại chu kỳ trong 15 phút

30Hz      5Hz      15Hz ~ 60Hz      60Hz ~ 15Hz      20Hz

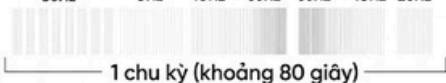


Dần dần thay đổi tần số để kích thích cơ từ từ cơ nông đến cơ sâu

### ● Chế độ HIIT EMS (khoảng 5 phút)

- Đèn trắng và đỏ nhấp nháy xen kẽ
- 20 giây máy kích thích cơ
- 40 giây tự vận động
- Lặp lại 5 lần

15Hz ~ 60Hz      60Hz ~ 15Hz      Tạm dừng kích thích

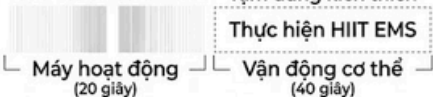

## 4. Cách sử dụng


### 6 Điều chỉnh cường độ

Dùng nút + / - để chọn mức độ

- Có 20 mức cường độ để lựa chọn
- Khi bật máy hoặc đổi chế độ → bắt đầu từ mức 0 (rất nhẹ)
- Nhấn + để bắt đầu

Lưu ý:

- Lần đầu nên dùng mức nhẹ
- Sau đó tăng dần

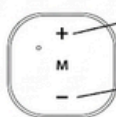

**nút (tăng)**

Nhấn sẽ có tiếng “bíp”,  
tăng 1 mức

**nút (giảm)**

Nhấn sẽ có tiếng “bíp”,  
giảm 1 mức



Lưu ý

- Mỗi vùng chỉ dùng 1 lần/ngày
- Không dùng quá 15 phút liên tục → Tránh tổn thương cơ hoặc da
- Không để miếng dán quá lâu trên da → Có thể gây kích ứng

### 7 Nhấn giữ nút M trong 3 giây để tắt

- Máy phát tiếng “bíp” khi tắt
- Tự động tắt sau khi hoàn thành

### 8 Gỡ miếng dán khỏi cơ thể

- Đảm bảo máy đã tắt
- Gỡ nhẹ từ mép

### 9 Dán lại miếng gel vào tấm bảo quản

- Có thể dùng cả 2 mặt



## 5. Bảo quản & vệ sinh



Lưu ý

- Luôn tắt nguồn trước khi vệ sinh  
→ Tránh gây kích thích hoặc đau
- Không dùng cồn, xăng hoặc dung dịch mạnh để lau
- Bề mặt gel chỉ chạm bằng tay sạch
- Tránh để nước dính vào thân máy
- Không bảo quản ở nơi nhiều bụi

### ● Vệ sinh thân máy

- ① Dùng khăn mềm lau sạch mồ hôi và độ ẩm
- ② Nếu bẩn:
  - Dùng khăn mềm thấm dung dịch trung tính pha loãng
  - Vắt khô và lau nhẹ nhàng

### ● Vệ sinh miếng dán (wing pad)

- ① Làm ẩm đầu ngón tay, lau nhẹ bề mặt gel
- ② Để khô tự nhiên ở nơi thoáng mát (tránh nắng trực tiếp)
- ③ Dán lại vào tấm bảo quản

※ Không vệ sinh quá thường xuyên hoặc quá lâu → Có thể làm giảm tuổi thọ gel

※ Miếng dán là vật tiêu hao → Nếu gel bị khô/hỏng → thay mới

### ● Bảo quản

- Dán vào tấm để để bảo quản
- Tránh: nhiệt độ cao / ẩm / ánh nắng trực tiếp
- Không gập hoặc để các mặt gel dính vào nhau → Dễ hỏng hoặc giảm độ bám
- Nếu không dùng lâu:  
→ Bọc trong túi để tránh bụi và khô
- Nếu miếng dán bị nứt/hỏng → thay mới
- Nếu không dùng trong thời gian dài:  
→ Sạc đầy trước khi cất  
→ Mỗi 3 tháng nên sạc lại 1 lần



Sản phẩm sử dụng pin lithium-ion  
Vui lòng xử lý theo quy định địa phương



Li - ion

## 6. Khi nghĩ máy đang bị lỗi

Không bật được nguồn	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pin yếu → sạc lại</li><li>• Chưa bấm nút nguồn? → nhấn nút M</li></ul>
Không sạc được	<ul style="list-style-type: none"><li>• Để lâu không dùng → pin bị xả hết → Sạc lại mỗi 3 tháng</li></ul>
Miếng gel không dính / dễ bong / bị hỏng	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chưa tháo film bảo vệ → tháo ra</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gel bị bẩn → vệ sinh</li><li>• Không dính nữa → thay mới</li><li>• Gel khô/hỏng → thay mới</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gel chưa dính sát → dán diện đất lại</li></ul>
Không cảm nhận xung điện / xung yếu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gel chưa dính sát → dán lại</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gel bị hỏng → thay</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gel bẩn → làm sạch</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cường độ thấp → nhấn +</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pin yếu → sạc</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Da khô → làm ẩm</li></ul>
Xung điện mạnh / gây đau	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cường độ cao → nhấn -</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gel chưa dính → dán lại</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gel hỏng → thay</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dùng quá lâu → tối đa 15 phút</li></ul>

Nếu có bất thường → ngưng sử dụng và liên hệ hỗ trợ