


# MYTREX iRhythm



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

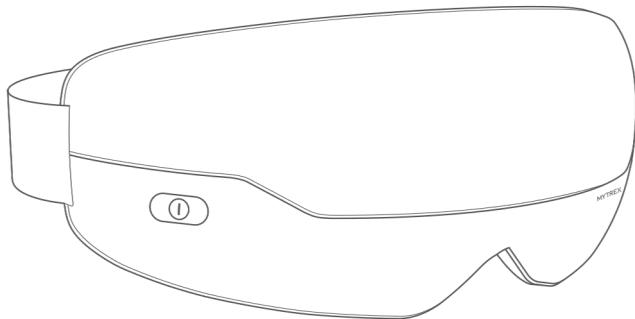

**PHIẾU BẢO HÀNH**


**XIN GIỮ CẨN THẬN**

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và sử dụng sản phẩm một cách đúng cách, an toàn. Phiếu bảo hành được đính kèm trong sách hướng dẫn này. Sau khi đọc xong, xin vui lòng bảo quản cẩn thận để dùng khi cần

## TÊN CÁC BỘ PHẬN

### Đèn báo chế độ

Khi bật nguồn,  
đèn sẽ sáng

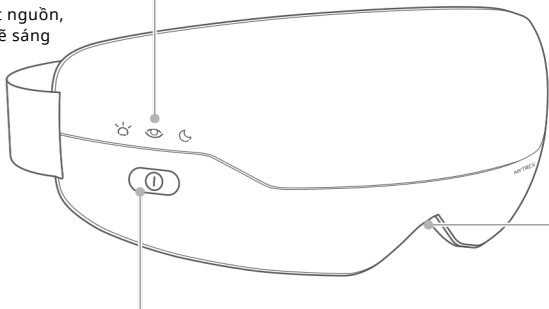

### Cổng sạc điện

### Nút nguồn / nút chọn chế độ

<b>Nhấn giữ (nhấn lâu)</b>	Bật / tắt nguồn
<b>Nhấn ngắn (1 lần)</b>	Mỗi lần nhấn, sẽ chuyển đổi chế độ
<b>Nhấn nhanh 2 lần (nhấn đúp nhanh)</b>	Bật / tắt nhạc nền (BGM)



## VỀ CHẾ ĐỘ RUNG THEO NHỊP

*Sản phẩm được trang bị bốn chế độ*



### **Chế độ chăm sóc mắt**

Khi bạn muốn làm tươi tỉnh vùng mắt trong thời gian ngắn. Tác động mạnh, tập trung chính xác vào vùng quanh mắt



### **Chế độ làm đẹp**

Rung theo nhịp trên diện rộng giúp cải thiện ấn tượng vùng mắt. Hướng đến vùng mắt tươi sáng hơn



### **Chế độ ban đêm\***

Với nhịp rung êm dịu, thư thái giúp bạn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng kích thích vùng mắt một cách dễ chịu



### **Chế độ tự động**


Chế độ kết hợp 3 chế độ ở trên. Phù hợp khi bạn muốn chăm sóc vùng mắt với nhiều kiểu rung khác nhau

※ Khi tắt nguồn rồi bật lại, thiết bị sẽ bắt đầu từ chế độ đã sử dụng lần trước (có chức năng ghi nhớ chế độ).

\* Vui lòng sử dụng trước khi đi ngủ. Không ngủ khi vẫn đang đeo sản phẩm này

## VỀ NHẠC NỀN (BGM)

Khi sử dụng chế độ chăm sóc mắt, chế độ làm đẹp hoặc chế độ tự động, có thể phát nhạc nền (BGM)

Khi đang sử dụng ở mỗi chế độ, nhấn nhanh nút  hai lần để chuyển đổi bật/tắt nhạc nền (BGM)



### Chế độ chăm sóc mắt

Nhạc nền (BGM) mang hình ảnh tươi mát như đang ở giữa khu rừng



### Chế độ làm đẹp

Nhạc nền (BGM) mang cảm giác như đang ở bên dòng sông chảy êm đềm



### Chế độ tự động

Nhạc nền (BGM) tiếng sóng lăn tăn, gợi cảm giác như đang thư giãn trên một bãi biển yên tĩnh

※ Khi sử dụng ở chế độ ban đêm, dù chọn bật BGM thì nhạc nền cũng sẽ không phát

※ Không có chức năng ghi nhớ trạng thái tắt BGM

## TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (CÁCH SẠC)

Khi sử dụng lần đầu hoặc khi dung lượng pin còn lại giảm,  
Vui lòng tắt nguồn thiết bị trước khi sạc, khi pin yếu, Khi dung lượng pin giảm thấp

**Phát thông báo: "Vui lòng sạc pin"**



**Đèn nháy màu đỏ 5 lần**

### Thời gian sạc dự kiến

**Thời gian sạc: khoảng 3 giờ**

**Thời gian hoạt động: khoảng 4 giờ**

※ Nhiệt độ khuyến nghị khi sạc là từ 15°C đến 35°C. Nếu sạc ngoài khoảng nhiệt độ này, thời gian sạc có thể kéo dài hoặc có thể không sạc được. ※ Tùy vào dung lượng pin còn lại, môi trường sạc và môi trường sử dụng, thời gian sạc và thời gian hoạt động có thể thay đổi đáng kể. ※ Khi sạc lần đầu hoặc sạc sau một thời gian dài không sử dụng, thời lượng pin có thể ngắn hơn bình thường. Sau khi lặp lại vài lần sạc và sử dụng, pin sẽ trở lại trạng thái bình thường

**1**

**Kết nối đầu Type-C của cáp sạc USB đi kèm vào cổng sạc ở mặt đáy của thiết bị**

**2**


**Sau đó, kết nối đầu Type-A của cáp USB vào cổng USB của bộ đổi nguồn AC (adapter) hoặc thiết bị tương thích mà bạn đang sử dụng**

🔔 Đèn sẽ sáng màu đỏ và phát thông báo: “Bắt đầu sạc pin”

※ Vui lòng sử dụng cổng USB (5V/1A hoặc 5V/2A) của máy tính có khả năng cấp nguồn, pin sạc dự phòng hoặc bộ đổi nguồn AC (adapter) bán trên thị trường. Không sử dụng adapter có dòng điện vượt quá 2A. Không sử dụng bộ sạc nhanh vì có thể gây hư hỏng thiết bị.

※ Trong một số trường hợp, một số máy tính, pin sạc dự phòng hoặc adapter có thể không sạc được. Hãy thay đổi nguồn cấp điện và thử sạc lại.

※ Trong khi sạc, không thể bật nguồn thiết bị.

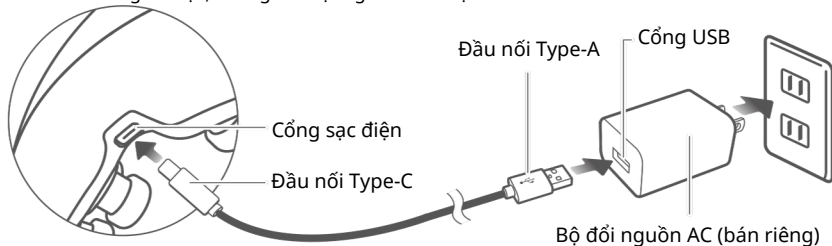

3



**Khi đèn chuyển sang màu xanh lá, hãy tháo cáp USB khỏi thiết bị**

Khi quá trình sạc hoàn tất, thiết bị sẽ phát thông báo bằng giọng nói: “Sạc pin đã hoàn tất.”

## VỀ PIN SẠC

- Nếu sau khi sạc mà thời gian sử dụng trở nên cực kỳ ngắn, có thể pin đã hết tuổi thọ. (Tuổi thọ pin thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng và bảo quản. Số lần sạc/xả ước tính khoảng 400–600 lần.) • Không hỗ trợ thay pin. • Khi không sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc đầy thiết bị trước khi bảo quản. Ngoài ra, mỗi tháng một lần hãy vận hành thiết bị và sạc lại. Nếu để lâu không sạc, có thể pin sẽ không sạc được nữa



Li-ion

Sản phẩm này (thân máy) được tích hợp pin lithium-ion. Khi thải bỏ sản phẩm, vui lòng tuân theo quy định phân loại rác thải của địa phương

## CÁCH SỬ DỤNG

### 1 Đeo thiết bị vào và cố định bằng dây đai

- ※ Khi sử dụng, hãy nhắm mắt và nằm ngửa hoặc ngồi trên ghế
- ※ Không đeo thiết bị ngược lại hoặc sử dụng khi nằm sấp

Cách điều chỉnh dây đai


Tháo miếng dán (velcro), sau đó kéo dây đai sang hai bên để điều chỉnh kích thước



### 2 ① Nhấn giữ nút khoảng 3 giây để bật nguồn.

Đèn chế độ đang sử dụng sẽ sáng và thiết bị bắt đầu hoạt động

- ※ Sau khi bật nguồn, thiết bị sẽ tự động dừng sau khoảng 15 phút
- ※ Nếu muốn tắt nguồn giữa chừng, hãy nhấn giữ nút ① khoảng 3 giây

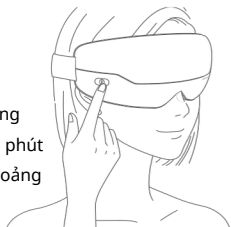

**3****① Nhấn nhẹ nút để chuyển đổi chế độ**

※ Nếu muốn chuyển đổi chế độ ngay sau khi khởi động, hãy thực hiện sau khi thiết bị đã hoạt động ít nhất 3 giây.

**4****① Để chuyển đổi bật/tắt nhạc nền (BGM), hãy nhấn nhanh nút 2 lần**

※ Khi sử dụng ở chế độ ban đêm, dù chọn bật BGM thì nhạc nền cũng sẽ không phát

**LƯU Ý KHI SỬ DỤNG**

- Vui lòng sử dụng với tần suất mỗi ngày 1 lần, khoảng 15 phút làm thời gian tham khảo.
- Khi mới bắt đầu sử dụng, hãy dùng trong thời gian ngắn và theo dõi tình trạng sức khỏe cũng như tình trạng da của bạn.
- Nếu sử dụng khi vẫn đang trang điểm, lớp trang điểm có thể bị trôi hoặc bị lem màu sang thân máy.
- Sau khi sử dụng, có thể để lại vết hằn của thiết bị trên mặt. Nếu sử dụng khi đang ra ngoài hoặc trước khi ra ngoài, vui lòng lưu ý. (Thông thường vết sẽ mờ dần theo thời gian nên không có vấn đề gì, nhưng nếu triệu chứng không cải thiện, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa)
- Không làm việc khác hoặc ngủ khi vẫn đang đeo sản phẩm này

## HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BLUETOOTH

Có thể kết nối với điện thoại thông minh hoặc thiết bị bạn đang sử dụng để phát những bản nhạc yêu thích từ thiết bị

1 Bật cài đặt Bluetooth® trên thiết bị cần kết nối

2 Bật nguồn thiết bị chính

3 Trong danh sách trên thiết bị cần kết nối, chọn tên thiết bị hiển thị

### Chọn “MYTREX iRhythm”

Thiết bị sẽ phát thông báo “Đã bật kết nối Bluetooth”, và việc kết nối sẽ được hoàn thành

### Khi ngắt kết nối, sẽ phát thông báo: “Bluetooth đã tắt”

※ Không thể điều chỉnh âm lượng trên thiết bị chính. Vui lòng điều chỉnh âm lượng trên thiết bị đã kết nối

※ Khi đang kết nối Bluetooth, nếu chọn “Chế độ ban đêm” hoặc “BGM tắt”, nhạc sẽ tạm dừng

※ Khi đang kết nối Bluetooth, nếu chọn “BGM tắt”, âm thanh thông báo bằng giọng nói cũng sẽ bị tắt



# CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

## CÁCH VỆ SINH

- Nhất định phải tắt nguồn và rút cáp USB trước khi vệ sinh.
- Tuyệt đối không rửa thân máy và cáp USB bằng nước.
- Hãy lau sạch bụi bẩn trên thân máy bằng khăn mềm khô. Nếu vết bẩn khó làm sạch, hãy nhúng khăn mềm vào dung dịch nước ấm pha loãng với chất tẩy rửa trung tính, vắt thật kỹ rồi lau nhẹ nhàng bề mặt thiết bị.
- Không sử dụng các dung môi như cồn, thinner hoặc benzen. Những chất này có thể gây hỏng hóc, nứt vỡ hoặc đổi màu linh kiện

## CÁCH BẢO QUẢN

- Khi không sử dụng, hãy tắt nguồn thiết bị và rút cáp USB khỏi máy tính hoặc thiết bị cấp nguồn trước khi bảo quản
- Không đặt thiết bị gần lửa, nơi có ánh nắng trực tiếp, trong phòng tắm, trong xe hơi hoặc những nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao. Hãy bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp
- Bảo quản ngoài tầm với của trẻ em
- Khi không sử dụng trong thời gian dài, hãy vệ sinh thiết bị, sạc đầy pin rồi mới cất giữ. Ngoài ra, mỗi tháng một lần hãy cho thiết bị hoạt động và sạc lại. Nếu để lâu không sạc, có thể pin sẽ không sạc được nữa