

MYTREX AQUA QUTTO

HDSD

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để bảo quản
có bảo hành

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm này. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và đảm bảo sử dụng sản phẩm một cách đúng đắn và an toàn. Hướng dẫn sử dụng này đi kèm với chế độ bảo hành. Hãy bảo quản nó ở nơi an toàn ngay cả sau khi đã đọc xong.

BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN

Hãy tuân thủ các quy trình quy định và sử dụng sản phẩm một cách an toàn. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, hãy ngừng ngay việc sử dụng sản phẩm và liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Việc tiếp tục sử dụng sản phẩm khi có sự cố có thể gây hại cho cơ thể bạn, vì vậy xin vui lòng không sử dụng sản phẩm.



MỐI NGUY HIỂM



cấm
đoán

Không sử dụng sản phẩm này nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử y tế nào dưới đây. Tránh tiếp xúc với bất kỳ ai đang sử dụng sản phẩm này. Điều này có thể gây ra sự cố cho thiết bị điện tử y tế và dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Có:

- ◎ Máy điều hòa nhịp tim và các thiết bị y tế điện tử cấy ghép khác
- ◎ Các thiết bị y tế điện tử hỗ trợ sự sống như máy tim-phổi
- ◎ Các thiết bị y tế điện tử có thể đeo như máy điện tâm đồ



CẢNH BÁO



cấm
đoán

● Không sử dụng nếu có bất kỳ điều nào sau đây. Ngay cả khi không có điều nào sau đây áp dụng cho bạn, nếu bạn lo lắng về việc sử dụng sản phẩm hoặc đang trong quá trình điều trị, xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Người mắc các bệnh về da như viêm da dị ứng và chàm
- Người bị dị ứng hoặc có làn da đặc biệt nhạy cảm
- Người đang mang thai, cho con bú hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt
- Người mắc bệnh tự miễn
- Người bị lạc nội mạc tử cung hoặc u xơ tử cung
- Người gặp vấn đề hoặc rối loạn về da do các sản phẩm silicon, v.v.
- Người mắc bệnh cấp tính hoặc bệnh truyền nhiễm
- Người có khối u ác tính
- Người mắc bệnh truyền nhiễm
- Người mắc bệnh lao
- Người mắc bệnh nội tạng
- Người có các bất thường về xương như gãy xương hoặc loãng xương
- Người bị rối loạn thần kinh hoặc rối loạn nhạy cảm với da
- Người không thể tự mình thực hiện các hoạt động, những người cần nghỉ ngơi tại giường, những người bị khuyết tật chân tay
- Những người không thể bày tỏ ý chí, những người bị liệt hoặc suy giảm cảm giác
- Những người có các bất thường về máu như rối loạn chảy máu và bệnh máu khó đông
- Người bị huyết áp cao

Biện pháp bảo vệ an toàn



cảnh
báo



cấm
đoán

- Không sử dụng nếu có bất kỳ điều nào sau đây. Ngay cả khi không có điều nào sau đây áp dụng cho bạn, nếu bạn lo lắng về việc sử dụng sản phẩm hoặc đang trong quá trình điều trị, xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ.
 - Người mắc bệnh tim hoặc có cục máu đông
 - Người cảm thấy không khỏe
 - Người có vật kim loại như bu lông cắm vào cơ thể
 - Người có bệnh hoặc có tiền sử điều trị tại cơ sở sử dụng
 - Người đã uống rượu hoặc mắc bệnh nặng
- Trường hợp mệt mỏi:
 - Người đang sử dụng thuốc gây buồn ngủ
 - Người đang dùng thuốc (thuốc có chứa thành phần gây khó đông máu, chẳng hạn như thuốc chống đông máu)
 - Những người bị bác sĩ cấm sử dụng thiết bị massage hoặc EMS
 - Những người đang được bác sĩ điều trị
 - Người bị sốt (38°C trở lên)
 - Không sử dụng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em đang phát triển.
- Không để họ sử dụng
- Không sử dụng trên vật nuôi.
- Không để nó tiếp xúc với kim loại hoặc các thiết bị điện khác trong quá trình sử dụng. Hành động này có thể dẫn đến chấn thương hoặc hư hại thiết bị chính.



cảnh
báo



cấm
đoán

- Không sử dụng trên các khu vực ngoài khu vực được chỉ định hoặc trên các khu vực sau. Hành động này có thể dẫn đến tai nạn hoặc các vấn đề về da/thể chất.
 - ⊙ Những vùng bạn đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ
 - ⊙ Những vùng da có bất thường như viêm da hoặc cháy nắng nghiêm trọng
 - ⊙ Những vùng bị mụn trứng cá, sẹo, chàm, sưng tấy hoặc các bệnh có mủ
 - ⊙ Những vùng bị ngứa hoặc cảm giác nóng rất
 - ⊙ Nốt ruồi phồng lên/mụn cóc do virus
 - ⊙ Phần trên cơ thể (phía trên đám rối thái dương), mặt, đầu, các vùng xung quanh tim
 - ⊙ Màng nhầy
 - ⊙ Bụng trong thời kỳ kinh nguyệt
 - ⊙ Các bộ phận được triệt lông trong cùng ngày
 - ⊙ Các bộ phận có kim loại, silicone, nhựa, v.v. gắn vào
 - ⊙ Các bộ phận có hình xăm
- Không để chân cấm hoặc bụi bám vào cực sạc của bộ phận chính hoặc đầu nối sạc. Hành động này có thể dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc cháy nổ do hiện tượng đoản mạch.
- Sử dụng máy sấy tóc để làm khô bộ phận chính và các phụ kiện, v.v.
Không khô ráo.
Hành động này có thể dẫn đến việc biến dạng hoặc hư hỏng các bộ phận.

Biện pháp bảo vệ an toàn



cảnh
báo



cấm
đoán

- Không sử dụng đồng thời thiết bị EMS hoặc thiết bị điện tử không thuộc dòng Mitrex Aqua. Hành động này có thể dẫn đến thương tích, tai nạn hoặc sự cố.
Không tiếp xúc với nước có nhiệt độ cao (trên 60°C).
 - Làm như vậy có thể dẫn đến việc phần thân chính bị biến dạng hoặc bị tan chảy.
 - Đừng để nguồn điện mở.
 - Hành động như vậy có thể dẫn đến chấn thương hoặc tai nạn.
 - Không uốn cong thân chính. Hơn nữa, không làm trầy xước hoặc đâm thủng nó.
 - Hành động này có thể làm giảm hiệu suất chống nước hoặc gây ra sinh nhiệt, cháy nổ hoặc trục trặc do đứt dây.
- Tránh chỉ sử dụng bởi trẻ em và người khuyết tật.



Hạn chế
của người
sử dụng

- Nếu bạn là thanh thiếu niên, hãy sử dụng sản phẩm với sự đồng ý của cha mẹ và dưới sự giám sát của họ.
Ngoài ra, hãy để sản phẩm xa tầm tay trẻ em.
- Hành động này có thể dẫn đến tai nạn hoặc chấn thương.



cảnh
báo



- Không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích đã được mô tả trong hướng dẫn sử dụng. Hành động này có thể dẫn đến thương tích hoặc hư hỏng thiết bị chính.



- Không làm hỏng, sửa đổi, bó lại hoặc tác động lực quá mạnh lên bộ đổi nguồn AC chuyên dụng. Ngoài ra, không đặt vật nặng lên, cầm nắm mạnh hoặc véo.



- Không sử dụng bộ đổi nguồn AC chuyên dụng nếu nó bị hỏng hoặc ổ cắm điện không chắc chắn. Hành động này có thể dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc cháy nổ do đoản mạch.



- Đừng để nó ở một vị trí không ổn định. Hơn nữa, tránh làm rơi hoặc va chạm với thiết bị chính hoặc phụ kiện. Hành động này có thể dẫn đến chấn thương hoặc hư hại thiết bị chính.

Biện pháp bảo vệ an toàn



Cấm sạc
trong phòng
tắm

- Không bao giờ sạc pin trong nhà tắm. Hành động này có thể dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc cháy nổ do đoản mạch.




Không sử
dụng khi có
mùi lạ hoặc
sốt.

- Không sử dụng thiết bị chính hoặc phụ kiện nếu chúng phát ra mùi lạ hoặc tỏa nhiệt bất thường. Điều này có thể dẫn đến hư hỏng hoặc cháy nổ.



Cẩn
thận
với
nguy
cơ cháy
nổ

- Không sử dụng hoặc để sản phẩm gần lửa, nơi có nhiệt độ cao hoặc nơi nhiều bụi bẩn. Hơn nữa, không ném sản phẩm vào lửa, không làm nóng, sạc hoặc sử dụng ở nhiệt độ cao. Cũng không nên đặt sản phẩm trong lò vi sóng hoặc gần các thiết bị sinh nhiệt. Sản phẩm này được trang bị pin sạc tích hợp. Hành động như vậy có thể dẫn đến việc sinh nhiệt, cháy nổ hoặc hỏng hóc.

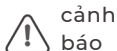

cảnh
báo



Cấm phân hủy
sinh học

- Không tháo rời, sửa chữa hoặc thay đổi sản phẩm. Hành động này có thể dẫn đến cháy nổ, điện giật hoặc chấn thương. Để được sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.



rút bộ
chuyển đổi ra
ngoài

- Trong những trường hợp hiếm hoi xảy ra hiện tượng bất thường, hãy tắt nguồn của thiết bị chính. Ngoài ra, khi sạc, hãy ngắt kết nối ngay bộ chuyển đổi AC chuyên dụng khỏi ổ cắm. Không sử dụng sản phẩm trong các điều kiện bất thường như có khói, âm thanh lạ hoặc mùi hôi.



Hãy
đảm
bảo
rằng
bạn bảo
vệ

- Đảm bảo rằng không có nước trên bộ phận chính hoặc đầu sạc của đầu nối sạc trước khi tiến hành sạc. Hành động này có thể dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc cháy nổ do đoản mạch.
- Nếu bạn cảm thấy đau đốn, buồn nôn hoặc phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên da khi sử dụng sản phẩm, hãy ngừng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Biện pháp bảo vệ an toàn



cảnh
báo



Hãy
đảm
bảo
ràng
bạn
bảo vệ.

- Đảm bảo sử dụng bộ chuyển đổi nguồn AC chuyên dụng đi kèm với sản phẩm này. Tránh sử dụng phụ kiện đi kèm với các sản phẩm khác.
- Sử dụng với điện áp AC từ 100V đến 240V. Khi sử dụng sản phẩm ở nước ngoài, hãy đảm bảo kiểm tra hình dạng phích cắm và điện áp trước khi sử dụng. Bộ đổi nguồn AC chuyên dụng có thể được cắm trực tiếp vào ổ cắm tường mà không cần thêm dây điện.
Hành động này có thể dẫn đến cháy nổ, điện giật hoặc sự cố.
- Luôn tắt nguồn khi không sử dụng thiết bị chính hoặc khi vệ sinh thiết bị chính.
Khi làm sạch bộ đổi nguồn AC chuyên dụng, hãy nhớ ngắt kết nối nó khỏi ổ cắm.
Hành động này có thể dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc cháy nổ do đoản mạch.
- Khi rút bộ chuyển nguồn AC chuyên dụng ra khỏi ổ cắm, hãy giữ đầu dây thay vì kéo dây. Ngoài ra, cần tránh việc cắm và rút phích cắm bằng tay ướt.
Hành động này có thể dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc cháy nổ do đoản mạch.



Chú ý



cấm đoán

- Không để sản phẩm ngâm trong nước hoặc bồn tắm. Hành động này có thể dẫn đến việc thiết bị chính bị đổi màu, hư hỏng hoặc gặp sự cố.
- Không sử dụng nó ở bất kỳ đâu khác ngoài phòng tắm. Không sử dụng ở bất kỳ đâu khác ngoài dưới nước.
- Sản phẩm này được chế tạo để sử dụng trong bồn tắm.
- Không chạm tay vào các bộ phận mang điện trong quá trình sử dụng. Bạn có thể trải nghiệm sự kích thích điện mạnh mẽ.
- Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem bộ phận chính có bị trầy xước hay không, và nếu có bất kỳ hư hỏng nào thì không nên sử dụng.
Hành động như vậy có thể dẫn đến chấn thương hoặc sự cố.
- Không sử dụng sản phẩm này cho hai hoặc nhiều người cùng một lúc.
Không sử dụng nếu trọng lượng của bạn vượt quá 100 kg.
Hành động như vậy có thể dẫn đến chấn thương hoặc sự cố.
- Không làm sạch bộ phận chính hoặc các phụ kiện bằng dung môi như cồn, chất pha loãng, benzen hoặc nước tẩy sơn móng tay.



Chú ý




cấm
đoán

- Không sử dụng trong suối nước nóng hoặc suối nước nóng có chứa chất phụ gia tắm. Không sử dụng ở những nơi nóng và ẩm như phòng xông hơi. Điều này có thể gây ra mùi, đổi màu hoặc trực trặc. Nếu sản phẩm tiếp xúc với nước nóng có chứa muối tắm, hãy rửa sạch bằng nước.



Hãy
đảm
bảo
rằng
bạn
bảo vệ.

- Ngay cả khi bạn không cảm thấy bất kỳ sự kích thích nào từ EMS, hãy điều chỉnh mức độ một cách từ từ. Xin vui lòng không nâng cấp độ bằng vũ lực.
- Sử dụng một lần mỗi ngày, không quá 15 phút. Sử dụng lực quá mạnh hoặc lặp lại nhiều lần có thể dẫn đến mỏi cơ, cảm giác tê bì và nổi mẩn đỏ trên da.
- Loại bỏ các sản phẩm từ tính, đồ kim loại và phụ kiện (vòng cổ, khuyên tai, v.v.) trước khi sử dụng. Hành động như vậy có thể dẫn đến tai nạn hoặc chấn thương.

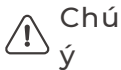

Hãy
đảm
bảo
ràng
bạn
bảo vệ.

- Hãy lưu ý đến nhiệt độ nước và thời gian tắm, đồng thời sử dụng nó trong giới hạn không gây căng thẳng cho cơ thể. Điều này có thể dẫn đến các cơn bốc hỏa hoặc sức khỏe kém.
- Nếu bạn sử dụng lần đầu hoặc nếu bạn là người cao tuổi, hãy nhớ sử dụng nó trong khoảng thời gian ngắn và ở mức độ kích thích thấp (Cấp độ 1).
Làm như vậy có thể dẫn đến tai nạn hoặc chấn thương. Điều chỉnh cường độ sau khi cơ thể bạn đã thích nghi với nó.
Sau khi sử dụng, hãy nhớ rửa sạch mọi vết bẩn bằng nước chảy và phơi khô ở nơi thoáng mát, trong bóng râm. Ngoài ra, tránh để nó ở những nơi có nhiệt độ cao và ẩm ướt.
- Để bộ phận chính bị ướt có thể dẫn đến hiện tượng ăn mòn.

Đặt nội dung.

Nếu có bất kỳ nội dung nào thiếu trong bộ này, xin vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.


	MYTREX QUTTO: 1 CÁI BỘ
	CHUYỂN ĐỔI NGUỒN AC CHUYÊN DỤNG: 1 CÁI
	SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 1 BẢN

- Thiết kế và thông số kỹ thuật của thiết bị chính và phụ kiện có thể được điều chỉnh mà không cần thông báo trước nhằm cải thiện chất lượng.
- Sản phẩm này không được coi là thiết bị y tế.

*Xin lưu ý: Do đặc tính của nguyên liệu thô được sử dụng, khi mở lần đầu hoặc bảo quản trong thời gian dài, bụi bẩn có thể xuất hiện nhưng điều này không ảnh hưởng đến sản phẩm. Hãy rửa sạch bằng nước trước khi sử dụng.

Các bộ phận máy

Thân chính

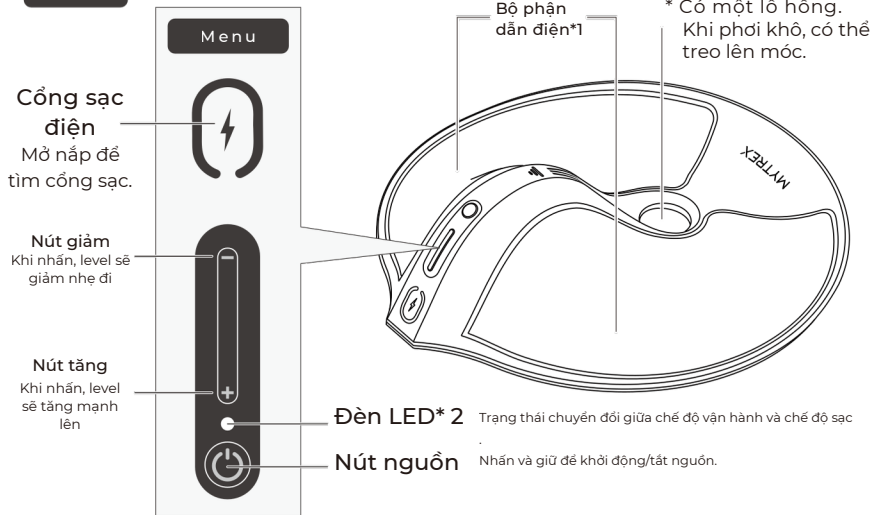

Các bộ phận

*1 Lưu ý về các bộ phận có điện áp


- Carbon được bổ sung vào bộ phận mang dòng điện để dẫn truyền EMS (kích thích điện).
- Do đó, làn da của bạn có thể trở nên sạm màu và bẩn.
- Trong trường hợp này, hãy rửa sạch bằng nước.
- Sau khi sử dụng, một lượng nhỏ carbon có thể hòa tan trong nước và chuyển sang màu đen, nhưng điều này là hoàn toàn bình thường. Nếu nó bị bẩn, hãy rửa sạch bằng nước.

*2 Về đèn LED (trắng)

Đèn LED		Trạng thái đèn
Khi khởi động	Đèn sáng	Đang hoạt động (có sự kích thích)
	Nhấp nháy	EMS cấp 0 (không có kích thích)
Khi sạc pin	Nhấp nháy	Đang sạc
	Đèn sáng	Đã sạc xong

Thiết bị phụ

Bộ chuyển đổi nguồn AC chuyên dụng

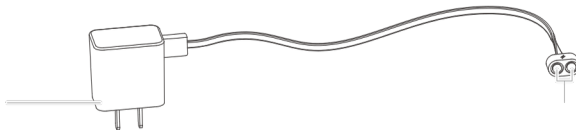

Thiết bị sạc đầu cuối

- * Thân chính có khả năng chống nước IPX-8 (cấp bảo vệ chống nước JIS).
- Đậy nắp cổng sạc và ngâm vào nước nóng.
- Vui lòng lấy nó ra khỏi nước nóng sau mỗi lần sử dụng và không để nó trong nước quá lâu.
- Bộ chuyển đổi AC chuyên dụng không có khả năng chống thấm nước.
- Hãy bảo quản ở nơi khô ráo và không bao giờ sử dụng khi ướt hoặc sạc trong phòng tắm.

Trước khi tiến hành sử dụng (phương pháp sạc)

Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên hoặc khi pin sắp hết, hãy tắt nguồn thiết bị trước khi tiến hành sạc.

Xin vui lòng thông báo cho tôi trước khi tiến hành tính phí. Nếu bạn sạc pin khi vẫn còn nước,

Đảm bảo làm sạch hơi ẩm khỏi cực sạc của bộ phận chính bằng bông tắm, v.v. và lau khô hoàn toàn.

Điều này có thể dẫn đến sự cố.

●Thời gian sạc/hoạt động dự kiến*

Thời gian để sạc đầy	Thời gian hoạt động
khoảng 2 giờ.	kéo dài khoảng 15 tiếng rưỡi.

Thời gian hoạt động là chỉ dẫn khi sử dụng ở mức độ kích thích 1. Ở cấp độ 10, nó có thể được sử dụng trong khoảng 5 giờ 30 phút.

Thời gian sạc và thời gian hoạt động có sự khác biệt lớn tùy thuộc vào mức pin hiện có, điều kiện sạc và điều kiện sử dụng.

*Nhiệt độ sạc được khuyến nghị là từ 15oC đến 35oC. Thời gian sạc có thể kéo dài hơn hoặc pin có thể không được sạc nếu nhiệt độ nằm ngoài khoảng khuyến nghị.

●Khi pin ở mức thấp

Nó sẽ rung 3 lần sau mỗi 30 giây, phát ra âm thanh "bíp, bíp, bíp".

Cùng lúc đó, đèn LED cũng sẽ nhấp nháy 3 lần.

Thời gian sử dụng pin có thể bị giảm khi sạc lần đầu hoặc sau một khoảng thời gian dài không hoạt động.

Nó sẽ trở lại trạng thái bình thường sau khi được sạc và sử dụng nhiều lần.

Trước khi tiến hành sử dụng (phương pháp sạc)

1


Mở nắp cổng sạc của thiết bị chính và kết nối đầu nối sạc của bộ chuyển nguồn AC chuyên dụng đi kèm với thiết bị chính. * Không kéo nắp một cách cưỡng bức.

2

Cắm bộ chuyển đổi nguồn AC chuyên dụng vào ổ cắm trên tường. Đèn LED sẽ nhấp nháy và quá trình sạc sẽ được khởi động.

3

Khi quá trình sạc hoàn tất, hãy ngắt kết nối bộ đổi nguồn AC chuyên dụng khỏi ổ cắm và đóng nắp cổng sạc. * Quá trình sạc hoàn tất khi đèn LED nhấp nháy → phát sáng.

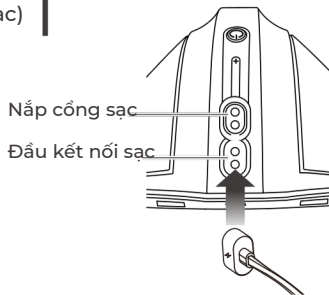

Về ắc quy sạc

- Nếu thời gian sử dụng trở nên rất ngắn ngay cả sau khi đã sạc, pin có thể đã hết tuổi thọ. (Tuổi thọ pin thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, bảo quản, v.v.. Số lần sạc và xả pin ước tính là từ 300 đến 500 lần.)
- Pin không thể thay thế.
- Khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy sạc đầy thiết bị trước khi cất giữ. Vui lòng vận hành sản phẩm này mỗi ba tháng một lần và sạc lại. Nếu bạn để nó không được sạc trong một thời gian dài, nó có thể không sạc được.

Cách sử dụng sản phẩm

Sản phẩm này được sử dụng trong bồn tắm. Hãy áp dụng phương pháp này trong khi tắm.


1

Đóng cổng sạc của máy lại cẩn thận

2

Đặt thiết bị với bảng điều khiển hướng về phía trước và ngồi lên thiết bị, giữ thiết bị giữa hai chân của bạn.


* Hãy đảm bảo rằng làn da của bạn tiếp xúc đồng đều với các khu vực có năng lượng bên trái và bên phải.

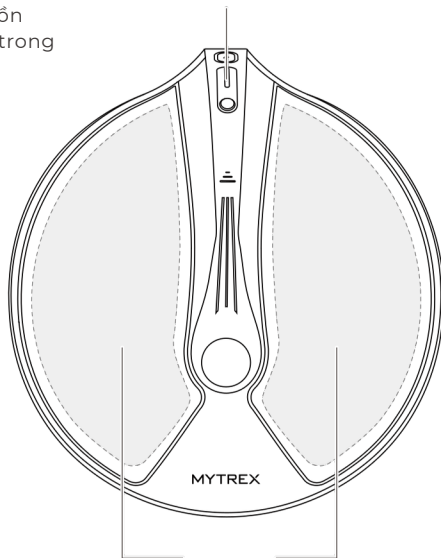

Lời khuyên về
tư thế ngồi

Ngồi thẳng phần thân trên sẽ giúp củng cố
cơ sàn chậu.

Ngồi với đầu gối hơi gập lại

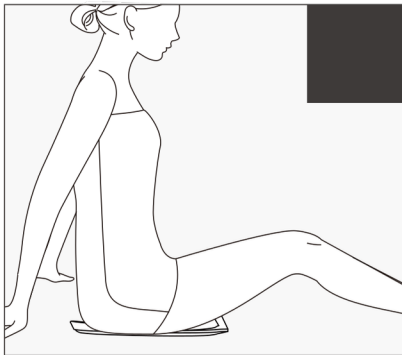

Ngồi bắt chéo chân lại



Cách sử dụng sản phẩm

3




Nhấn và giữ nút nguồn () trong khoảng 2 giây.

●Thiết bị sẽ rung hai lần và bắt đầu hoạt động ở mức kích thích 1.

*Hãy chắc chắn rằng sản phẩm dưới nước được sử dụng với da của bạn tiếp xúc với cả hai mặt của bộ phận mang dòng điện.

Nếu không tiếp xúc với da trong 3 giây, mức EMS sẽ trở về 0 (không có kích thích, đèn LED nhấp nháy chậm).

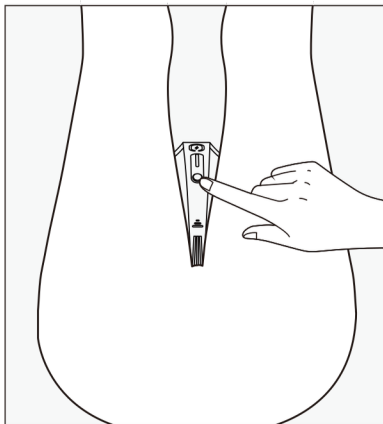

4


Chọn mức độ kích thích bằng các nút cường độ (/).

● Mỗi lần bạn nhấn nút, nút sẽ rung một lần và mức độ sẽ thay đổi.

*Mức độ kích thích có thể được lựa chọn từ cấp độ 1 đến 10. Mặc định là mức độ kích thích 1.

*Nhấn nút tăng level nếu muốn sử dụng mức độ cao hơn
Nếu nhấn giảm level nếu muốn sử dụng mức độ nhẹ hơn

Nó rung hai lần với tiếng “boo-boo-boo” và ở mức tối đa/tối thiểu.

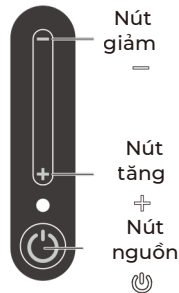

5

Để tạm dừng hoạt động, hãy nhấn và giữ nút nguồn (🔌) trong khoảng 2 giây.

● Thiết bị sẽ rung một lần và sau đó tắt.

Hoặc Nguồn sẽ tự động ngắt sau 15 phút kể từ khi bắt đầu hoạt động.

Cách bảo quản

Hãy làm sạch bộ phận chính sau mỗi lần sử dụng để duy trì sự sạch sẽ.

1

Đảm bảo rằng nguồn đã được tắt và thiết bị được rửa sạch bằng nước chảy.



Nếu bụi bẩn khó loại bỏ, hãy lau nhẹ nhàng bằng vải thấm dung dịch tẩy rửa trung tính pha loãng. Tránh sử dụng các dung môi như chất tẩy có tính kiềm, cồn, chất pha loãng, benzen hoặc nước tẩy sơn móng tay.

2

Lắc nhẹ sản phẩm lên xuống để loại bỏ độ ẩm bên trong, sau đó treo sản phẩm ở nơi mát mẻ và thông thoáng để khô.

*Móc treo khăn tắm

Treo nó lên móc hoặc treo vào lỗ ở giữa bộ phận chính để làm khô. Hãy chú ý không để làm rơi nó.

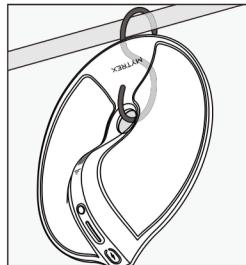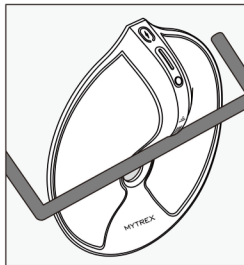

*Không sạc hoặc để pin trong môi trường ẩm ướt. Mùi và sự thay đổi màu sắc. Điều này có thể dẫn đến sự cố.

*Không bao giờ uốn cong thân chính. Hành động này có thể gây ra sự cố.

*Do bộ phận mang dòng điện chứa carbon (than củi), một lượng nhỏ carbon có thể hòa tan vào nước sau khi sử dụng, dẫn đến màu sắc hơi đen. Khi lau, hãy nhớ sử dụng vải không nhạy cảm với bụi bẩn.

Phương pháp bảo quản

- Sau khi sử dụng, xin vui lòng làm sạch bộ phận chính và lau khô hoàn toàn trước khi cất giữ hoặc sạc. Bộ đổi nguồn AC chuyên dụng không có khả năng chống thấm nước. Việc sạc khi bộ phận chính còn ẩm có thể dẫn đến sự cố. Đặc biệt, hãy sử dụng tấm bông để lau sạch hơi ẩm và bụi bẩn trên thân máy cũng như cực sạc của bộ đổi nguồn AC chuyên dụng.
- Khi không sử dụng bộ phận chính trong thời gian dài, hãy làm sạch và bảo quản ở nơi phẳng.
- Khi không sử dụng, hãy tắt nguồn của thiết bị chính và ngắt kết nối bộ chuyển đổi AC chuyên dụng khỏi ổ cắm, v.v.
- Không để gần lửa, dưới ánh nắng chói chang, ở nơi ẩm ướt như phòng tắm hoặc trong ô tô mà hãy bảo quản ở nơi thoáng mát.
- Bảo quản nó ở nơi gọn gàng và có bóng râm.
- Giữ xa tầm tay trẻ em.



Sản phẩm này (thân chính) được trang bị pin lithium-ion tích hợp. Khi loại bỏ sản phẩm này, xin vui lòng thực hiện theo quy định phân loại của cơ quan địa phương.

Vui lòng tham khảo ghi chú bên phải để biết các biện pháp phòng ngừa liên quan đến sản phẩm có pin lithium-ion tích hợp. <https://mytrex.jp/support/safety/battery/>