

MYTREX
MIRAY AIR

Hộp chứa đèn IPL và sản phẩm
chăm sóc sắc đẹp

hướng dẫn sử dụng

PHIẾU BẢO HÀNH XIN GIỮ CẨN THẬN

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và sử dụng sản phẩm đúng cách, an toàn. Tài liệu hướng dẫn này có kèm theo phiếu bảo hành. Sau khi đọc xong, vui lòng bảo quản cẩn thận để sử dụng khi cần.

|| VUI LÒNG KIỂM TRA CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG ||

Trong trường hợp bộ sản phẩm có thiếu sót, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng

[Nội dung bộ sưu tập]


Thân máy	MYTREX MiRAY AIR	1 máy
Phụ kiện	Củ sạc / Bộ sạc (AC Adapter)	1 cái
	Cáp sạc USB	1 sợi
	Kính bảo hộ	1 cái
	Túi vải đựng máy	1 túi
	Sách hướng dẫn sử dụng	1 bản

※ Hình minh họa trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

※ Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

※ Sản phẩm này là thiết bị làm đẹp bằng ánh sáng dùng tại nhà, được thiết kế nhằm mục đích chăm sóc (giảm) lông không mong muốn* và chăm sóc da đẹp. (Không phải là thiết bị y tế.)

TÊN CỦA TỪNG BỘ PHẬN

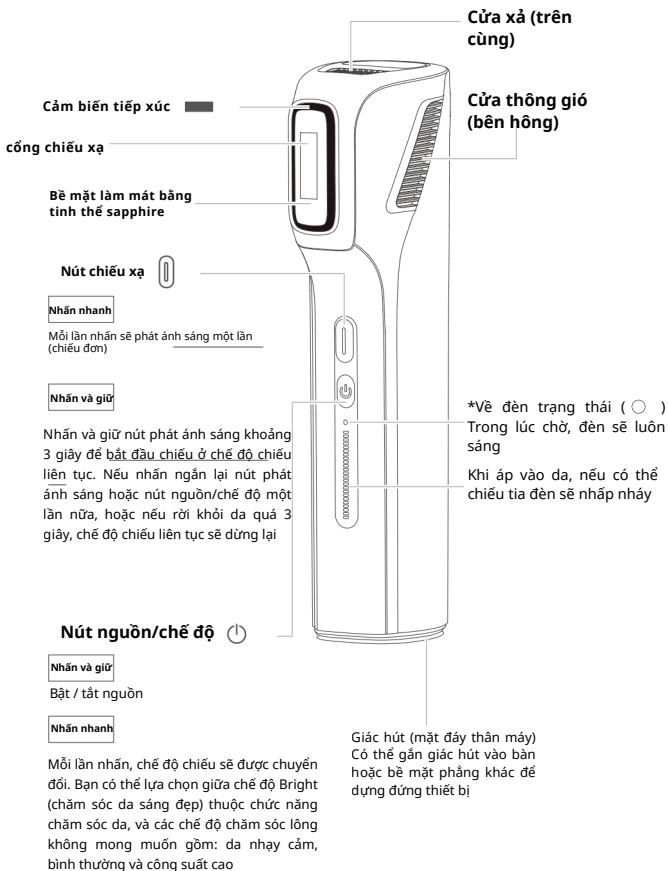

Vẽ đèn trạng thái (○):

Trong chế độ chờ, đèn sẽ luôn sáng

Khi áp máy vào da và sẵn sàng chiếu tia, đèn sẽ nhấp

nháy






Trạng thái đèn (màu trắng)	Trạng thái máy
Sáng	Chờ
Nhấp nháy	Hoàn tất cảm biến da • Có thể chiếu tia
Nhấp nháy nhanh	Chế độ chiếu tia liên tục


*2 Hiển thị đèn chế độ và mức độ

Sản phẩm này được trang bị chức năng chăm sóc da và chức năng loại bỏ lông. Chức năng chăm sóc da có một mức độ (chế độ Bright), còn chức năng chăm sóc lông không mong muốn có 3 mức để lựa chọn: chế độ da nhạy cảm, chế độ bình thường và chế độ công suất cao

Nút nguồn/chế độ

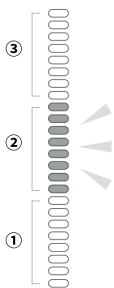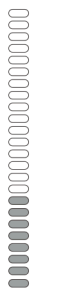Mỗi khi bạn nhấn nút, chế độ sẽ chuyển đổi theo thứ tự sau: Chế độ sáng → Chế độ da nhạy cảm → Chế độ bình thường → Chế độ công suất cao → Chế độ bình thường → Chế độ da nhạy cảm → Chế độ sáng → Chế độ da nhạy cảm...

	Chức năng chăm sóc da	Chức năng chăm sóc da		
Chế độ	Chế độ Bright	Chế độ da nhạy cảm	Chế độ bình thường	Chế độ công suất cao*1
Hiển thị đèn: Màu xanh dương	 <p>①~③ sẽ nhấp nháy lần lượt theo thứ tự</p>			
				

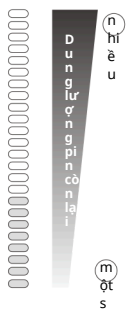	Hiển thị dung lượng pin Khi bật nguồn*2 / Đang sạc
Màn hình chiếu sáng Trắng	

*1 Chế độ công suất cao có mức năng lượng mạnh

Hãy sử dụng khi bạn cảm thấy khó nhận thấy hiệu quả ở chế độ da nhạy cảm hoặc chế độ bình thường. Sản phẩm này được trang bị thiết bị làm mát (làm mát bằng sapphire), tuy nhiên khi sử dụng ở chế độ công suất cao hoặc khi da bị đỏ hay cảm thấy đau, hãy làm mát da bằng túi chườm lạnh (hoặc vật tương tự) trong khoảng 10 giây trước và sau khi sử dụng. Nếu tình trạng đỏ da hoặc đau nghiêm trọng, hoặc nếu các triệu chứng vẫn tiếp tục sau 2 ngày, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ

2 Mức pin còn lại có thể được kiểm tra qua đèn hiển thị sẽ nhấp nháy 2 lần khi bật nguồn thiết bị

| VỀ CHỨC NĂNG VÀ CƠ CHẾ AN TOÀN |

Chế độ chiếu liên tục

Nhấn và giữ nút phát ánh sáng khoảng 3 giây để chuyển sang chế độ chiếu liên tục (đèn trạng thái sẽ nhấp nháy nhanh). Hãy sử dụng bằng cách di chuyển dần vị trí chiếu. Chế độ chiếu liên tục sẽ tiếp tục miễn là thiết bị vẫn tiếp xúc với da. Nếu nhấn ngắn lại nút phát ánh sáng hoặc nút nguồn/chế độ, hoặc nếu đầu phát rời khỏi da khiến cảm biến tiếp xúc không nhận diện được trong khoảng 3 giây, chế độ chiếu liên tục sẽ dừng lại

Cảm biến tiếp xúc

Khi thiết bị nhận diện rằng toàn bộ đầu phát ánh sáng đã tiếp xúc với da, thì có thể phát tia. Khi đèn trạng thái chuyển sang nhấp nháy, bạn có thể thực hiện chiếu flash (phát ánh sáng)

Chức năng làm lạnh

Bề mặt làm mát bằng sapphire ở đầu phát sẽ làm mát da. Do nhiệt độ khu vực gần đầu phát giảm xuống, có thể xuất hiện hiện tượng mờ sương hoặc đọng giọt nước, nhưng đây không phải là bất thường

Chức năng tự động ngắt

Nếu sau khi bật nguồn mà không thực hiện thao tác nào trong 3 phút, thiết bị sẽ tự động tắt nguồn. Sau khi tắt nguồn, quạt sẽ tiếp tục hoạt động khoảng 30 giây, đây không phải là hiện tượng bất thường

VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Trước khi tiến hành điều trị, hãy đảm bảo kiểm tra những yếu tố sau:

■ Chuẩn bị trước khi chăm sóc

※ Hãy nhớ dùng máy cạo lông hoặc dao cạo để loại bỏ lông ở vùng cần chăm sóc

Hãy cạo lông trước khi thực hiện. Không nhổ lông hoặc sử dụng sáp để tẩy lông. Nếu chiều khi chưa xử lý lông, các mẩu lông có thể bám vào thiết bị và gây cháy khét

※ Không thực hiện chăm sóc lông và chăm sóc da liên tiếp cùng một lúc

Hãy đảm bảo cách nhau ít nhất 24 giờ.

※ Khi sử dụng cho mặt, hãy tẩy sạch lớp trang điểm, kem chống nắng, nước hoa... hãy rửa sạch hoàn toàn và sử dụng trên da sạch (không còn mỹ phẩm). Nếu không, có thể gây bong hoặc các vấn đề về da trước khi thực hiện

※ Khi sử dụng lần đầu, sau một thời gian dài không dùng, hoặc khi tăng mức độ, nhất định phải thử phản ứng da trước

Đây là bài kiểm tra đơn giản để kiểm tra trước xem da có gặp vấn đề hay không. Mỗi lần tăng mức độ, hãy đảm bảo thử phản ứng da trước để xác nhận không có vấn đề gì xảy ra.

※ Khi sử dụng lần đầu, sau một thời gian dài không dùng, hoặc khi tăng mức độ, nhất định phải thử phản ứng da trước

Đây là bài kiểm tra đơn giản để kiểm tra trước xem da có gặp vấn đề hay không. Mỗi lần tăng mức độ, hãy đảm bảo thử phản ứng da trước để xác nhận không có vấn đề gì xảy ra.

※ Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem đầu phát tia có bất thường hay không.

Nếu có vết nứt, biến dạng hoặc hư hỏng thì không được sử dụng. Nếu bị bẩn, hãy vệ sinh sạch sẽ. Nếu chiếu khi còn bẩn, chất bẩn sẽ bám vào đầu phát tia và có thể không làm sạch được nữa

※ Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem da có dấu hiệu bất thường hay không

※ Tránh sử dụng ngay sau khi vừa bị cháy nắng

Trước và sau khi chăm sóc, không sử dụng các sản phẩm như mỹ phẩm làm trắng da hoặc mỹ phẩm tẩy tế bào chết có chứa thành phần dễ gây kích ứng mạnh

※ Khi sử dụng lần đầu hoặc cho đến khi quen với máy, hãy luôn bắt đầu ở mức thấp (đối với chăm sóc lông thì dùng chế độ da nhạy cảm) và sử dụng trong thời gian ngắn trước

Hãy thực hiện theo cách này

Chức năng chăm sóc lông có mức độ tăng dần theo thứ tự:

Chế độ da nhạy cảm → Chế độ bình thường → Chế độ công suất cao

※ Không sử dụng ở mức quá cao hoặc ở mức khiến bạn cảm thấy đau

Không được sử dụng trong những trường hợp như vậy. Đặc biệt, với người có làn da sẫm màu hoặc sau khi bị rám nắng, da sẽ dễ hấp thụ ánh sáng hơn, điều này có thể gây ra các vấn đề về da

| VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG |

※ Hãy điều chỉnh mức độ (level) cho phù hợp với vùng da cần chăm sóc khi sử dụng

※ Hãy xác nhận rằng không có người xung quanh. Ngoài ra, không được chiếu tia ở nơi tối vì có thể gây hại cho mắt. Khi chiếu tia, hãy nhắm mắt lại hoặc đeo kính bảo hộ nếu cảm thấy ánh sáng quá chói. Đặc biệt, bắt buộc phải nhắm mắt khi sử dụng cho vùng mặt

※ Hãy kiểm tra bảng màu đi kèm để xác định chế độ sử dụng phù hợp với màu da của bạn

※ Sau khi chăm sóc da, hãy chú ý dưỡng ẩm đầy đủ và thực hiện các biện pháp chống nắng cho da

■ Về giác hút


Mặt đáy của thân máy được thiết kế dạng giác hút. Bạn có thể gắn giác hút vào bàn hoặc bề mặt phẳng để dựng máy đứng lên

※ Khi sử dụng giác hút, hãy chắc chắn gắn vào bề mặt phẳng, ổn định, không gồ ghề

※ Sản phẩm này không có chức năng chống nước. Hãy cẩn thận không để nước dính vào máy. Nếu nước vào máy có thể gây hỏng hóc, điện giật hoặc cháy nổ

※ Không sử dụng khi tay ướt hoặc trên da đang ướt.

※ Nếu giác hút bị bám bụi, hãy dùng khăn mềm thấm nước, vắt thật ráo rồi nhẹ nhàng lau sạch

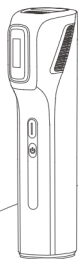

Dính chặt ngay lập tức

■ Cách tiến hành thử nghiệm dị ứng da

Khi sử dụng lần đầu, sau một thời gian dài không dùng, hoặc khi chuyển chế độ và tăng mức độ, nhất định phải thực hiện patch test trước

1 | Làm sạch da, đảm bảo da ở trạng thái sạch sẽ

※ Khi thực hiện patch test cho chế độ chăm sóc lông (da nhạy cảm / bình thường / công suất cao), hãy cạo lông ở vùng cần chiếu bằng máy cạo hoặc dao cạo trước.

Thực hiện chiếu 1 lần theo đúng chế độ và cách thức được hướng dẫn bên dưới

2 |

Thử nghiệm dị ứng trên da (Chế độ ánh sáng)	Mặt trong cánh tay
Thử nghiệm với chế độ chăm sóc lông (Chế độ da nhạy cảm)	Vùng gần khu vực bạn muốn chăm sóc vị trí kín đáo, khó nhìn thấy

※ Đối với vùng da lần đầu tiên sử dụng chức năng chăm sóc lông, hãy luôn bắt đầu với chế độ da nhạy cảm

3 |

Nếu sau 24 giờ không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên da, thì có thể sử dụng

Nếu bạn không cảm thấy hiệu quả của chức năng triệt lông không mong muốn, hãy tăng dần mức độ chiếu xạ theo thứ tự sau: Chế độ da nhạy cảm → Chế độ bình thường → Chế độ công suất cao. Vui lòng thử nghiệm trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng mỗi lần tăng mức độ chiếu xạ.

Chế độ công suất cao rất mạnh mẽ, do đó có thể gây kích ứng da hoặc các vấn đề về nhạy cảm

Hãy sử dụng sản phẩm này nếu bạn gặp phải cơn đau dữ dội hoặc tình trạng mẩn đỏ trên da kéo dài hơn hai ngày

• **Chế độ sáng/Chế độ da nhạy cảm:** Ngừng sử dụng và làm mát da

Hãy cung cấp độ ẩm cho da và sau đó tham khảo ý kiến bác sĩ

• **Chế độ bình thường/Chế độ công suất cao:** Không thể sử dụng ở mức công suất đã được kiểm tra. Lần sau, hãy giảm mức công suất và sử dụng chế độ mà lần trước không phát hiện bất thường nào.


Ngay cả khi thử nghiệm dị ứng da không phát hiện bất thường nào, da của bạn có thể bị đỏ hoặc đau tạm thời tùy thuộc vào thể trạng và sức khỏe của bạn. Xin vui lòng chờ khoảng 2 ngày và theo dõi tình trạng.



| VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG |

Điểm quan trọng khi áp máy (cách chiếu):

Áp đầu phát tia sát vào da sao cho tiếp xúc khít, sau đó di chuyển đầu phát từng chút một để chiếu đều toàn bộ vùng cần chăm sóc. Đối với những vùng da mềm hoặc có nhiều mỡ, hãy dùng tay kéo căng da ở khu vực đó rồi thực hiện chăm sóc

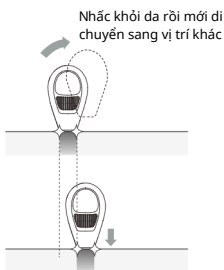

ĐIỂM

Hãy đảm bảo không có khoảng trống nào

Chăm sóc da

Chăm sóc da phải được thực hiện bằng chế độ Bright (đèn mức màu xanh dương nhấp nháy lần lượt từ dưới lên trên).

Trước khi sử dụng, nhất định phải thực hiện test

※ Khi chiếu vào cùng một vị trí, tối đa chỉ nên 3 lần/ngày. Nếu chưa quen sử dụng, hãy bắt đầu với thời gian ngắn và chỉ 1 lần chiếu cho mỗi vị trí



Sử dụng 3 lần mỗi tuần, khoảng 5-10 phút mỗi lần

※ Hãy buộc tóc gọn lại hoặc cố định bằng băng đô, kẹp tóc. Cả phần tóc mái cũng cần được cố định. Hãy dùng kẹp tóc hoặc vật tương tự để cố định lại

Khuôn mặt

- Di chuyển máy sao cho không bỏ sót khoảng trống, và chăm sóc da bên trái - bên phải theo thứ tự ①~⑤. Khi sử dụng cho mặt, hãy dùng trên da sạch (đã tẩy trang và loại bỏ lớp trang điểm)
- Có thể sử dụng chế độ chiếu liên tục cho mặt, nhưng khi chăm sóc vùng da quanh mắt, sử dụng chế độ chiếu từng lần (đơn phát). Khi chiếu lên mặt, hãy luôn nhắm mắt lại
- Không được sử dụng cho đầu, tai, lông mày, mắt và mí mắt, hoặc môi.
- Trước và sau khi sử dụng cho mặt, đặc biệt chú ý tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời (tránh bị cháy nắng)

Cổ và vùng ngực trên

- Đối với vùng cổ, xoay cổng chiếu xạ theo chiều ngang từ trên xuống dưới; còn đối với vùng ngực, xoay cổng chiếu xạ theo chiều dọc. Nên chiếu từ phía trong ra phía ngoài

■ Chăm sóc lông (râu, lông mặt, lông cơ thể)

Chăm sóc lông được thực hiện bằng chế độ da nhạy cảm, chế độ bình thường hoặc chế độ công suất cao. Trước khi sử dụng, nhất định phải thực hiện patch test


※ Hãy luôn cạo sạch lông ở vùng cần chăm sóc bằng máy cạo hoặc dao cạo trước khi sử dụng.

※ Khi chiếu vào cùng một vị trí, hãy tham khảo số lần khuyến nghị dưới đây. Nếu chưa quen sử dụng, hãy bắt đầu với thời gian ngắn và chỉ chiếu 1 lần cho mỗi vị trí

Chế độ da nhạy cảm/Chế độ thông thường	Tối đa 3 liều mỗi ngày
Chế độ hiệu suất cao	Tối đa 2 liều mỗi ngày

● Chăm sóc râu (triệt râu)

Sử dụng 2 lần mỗi tuần, khoảng 5-10 phút mỗi lần

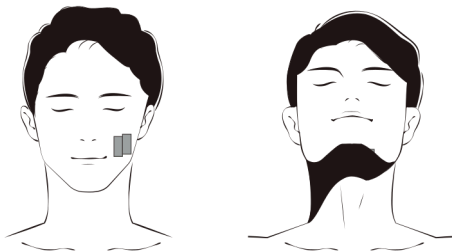

- Hãy sử dụng trên da sạch, ví dụ như sau khi rửa mặt
- Có thể sử dụng chế độ chiếu liên tục. Khi chiếu lên mặt, hãy luôn nhắm mắt lại
- Không được sử dụng cho đầu, tai, lông mày, mắt và mí mắt, môi hoặc cổ. Chỉ sử dụng ở mức chiếu mà bạn cảm thấy hơi ấm nhẹ. Không sử dụng ở chế độ gây cảm giác nóng rát hoặc đau
- Trước và sau khi sử dụng cho mặt, đặc biệt chú ý tránh bị cháy nắng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

■ Chăm sóc lông (triệt lông)

● Chăm sóc (triệt) lông tơ trên mặt và lông cơ thể

Hai tháng đầu tiên

Khoảng hai lần mỗi tuần



Sau ba tháng

Mỗi 2 đến 4 tuần một lần


※ Nếu cảm thấy khó thấy hiệu quả, hãy theo dõi tình trạng da và thử tăng tần suất tối đa 1 lần mỗi 3 ngày. Hiệu quả sẽ khác nhau tùy theo vùng da và cơ địa từng người. Sản phẩm này không phải thiết bị triệt lông vĩnh viễn.

※ Không chiếu quá lâu hoặc lặp lại nhiều lần trên cùng một vùng da.

※ Ngay cả khi chiếu ở vùng khác nhau, cũng phải cách nhau ít nhất 24 giờ trước khi sử dụng lại. (Vì những vùng da không được chiếu cũng có thể trở nên nhạy cảm với ánh sáng.)

※ Nếu ngừng sử dụng trong một thời gian, khi bắt đầu lại hãy dùng với tần suất giống như 2 tháng đầu tiên.

※ Hãy buộc tóc gọn lại hoặc cố định bằng băng đô. Phần tóc mái cũng cần được giữ cố định bằng kẹp tóc hoặc vật tương tự

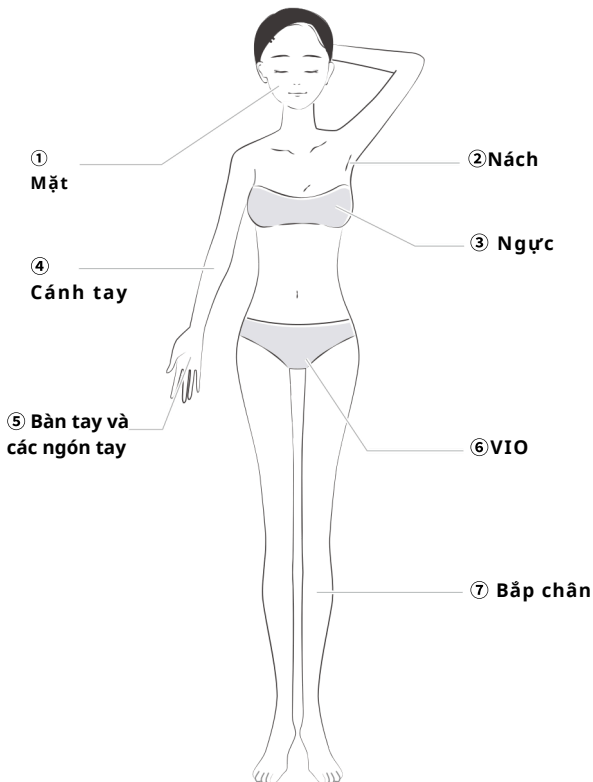

① Mặt

Khi sử dụng cho mặt, hãy dùng trên da sạch (đã tẩy trang và loại bỏ lớp trang điểm). Có thể sử dụng chế độ chiếu liên tục cho mặt, nhưng khi chăm sóc vùng da quanh mắt, dùng chế độ chiếu từng lần (đơn phát). Khi chiếu lên mặt, hãy luôn nhắm mắt lại. Không sử dụng cho đầu, tai, lông mày, mắt và mí mắt, môi hoặc cổ. Chỉ sử dụng ở mức chiếu mà bạn cảm thấy hơi ấm nhẹ. Không sử dụng ở chế độ gây cảm giác nóng rát hoặc đau. Trước và sau khi sử dụng cho mặt, đặc biệt chú ý tránh bị cháy nắng

② Nách

Dùng các ngón tay để kéo căng da khi thoa sản phẩm. Trước khi thoa sản phẩm, hãy đảm bảo loại bỏ sạch sẽ mọi lớp trang điểm, chẳng hạn như chất khử mùi.

③ Ngực

Tránh sử dụng trên núm vú và quầng vú

④ Cánh tay

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ chiếu liên tục

⑤ Bàn tay và các ngón tay

Hãy áp sát toàn bộ đầu phát tia vào da một cách chắc chắn

⑥ VIO

Khi chăm sóc, hãy dùng ngón tay kéo căng da ra. Đối với những vị trí khó nhìn thấy, hãy kiểm tra vùng cần chiếu bằng gương trước, sau đó không nhìn trực tiếp vào gương khi thực hiện chiếu

■ V line (vùng bikini)

Nếu chỉ chăm sóc vùng bikini, hãy mặc quần lót và xác định trước khu vực cần chăm sóc. Ngay cả khi muốn giữ lại một phần lông, vẫn phải cạo sạch toàn bộ lông trước khi thực hiện

■ Vùng IO

Hãy chuẩn bị gương đứng để có thể nhìn rõ vùng cần sử dụng. Ngồi trên sàn hoặc giữ tư thế ổn định khi sử dụng. Cẩn thận không chiếu trực tiếp vào vùng niêm mạc.


⑦ Bắp chân

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ chiếu liên tục

| TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (CÁCH SẠC PIN)|

Khi sử dụng lần đầu hoặc khi pin yếu, hãy tắt nguồn thiết bị trước khi sạc. Khi pin cạn hoàn toàn, đèn mức sẽ nhấp nháy khoảng 5 giây rồi thiết bị tự động tắt nguồn.

• Khi pin yếu (trong lúc sử dụng)

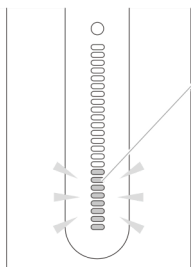

Đèn mức (màu trắng):Đèn của mức đang sử dụng sẽ nhấp nháy nhanh trong 5 giây, cứ mỗi 30 giây một lần

• Thời gian sạc

Thời gian sạc	Thời gian hoạt động
khoảng 3 giờ	khoảng 30 phút

* Thời gian hoạt động là giá trị tham khảo khi sử dụng ở mức 1 (nhiệt độ phòng 23°C)

Thời gian sạc và thời gian hoạt động có thể thay đổi đáng kể tùy vào dung lượng pin còn lại, môi trường sạc và môi trường sử dụng

※ Nhiệt độ khuyến nghị khi sạc là 15°C~35°C. Nếu sạc ngoài khoảng nhiệt độ này, thời gian sạc có thể kéo dài hoặc có thể không sạc được

※ Khi sạc lần đầu hoặc sau thời gian dài không sử dụng, thời lượng pin có thể ngắn hơn bình thường. Sau vài lần sạc và sử dụng lặp lại, pin sẽ trở lại trạng thái bình thường

1 **Cắm đầu nối Type-C của dây sạc USB đi kèm vào cổng sạc trên thân máy**

※ *Hãy cắm vào đúng chiều sao cho hình dạng đầu nối khớp với cổng sạc*



2 **Cắm đầu nối Type-A của dây USB vào bộ đổi nguồn AC đi kèm**

※ *Nếu sử dụng adapter dưới 2A, thời gian sạc có thể kéo dài. Hãy sử dụng bộ đổi nguồn AC đi kèm*

※ *Có thể sạc qua cổng USB của máy tính, tuy nhiên một số máy tính hoặc pin sạc dự phòng có thể không sạc được. Trong trường hợp đó, hãy đổi nguồn cấp điện và thử sạc lại. Không sử dụng bộ sạc nhanh vì có thể gây hỏng thiết bị*

3 **Cắm bộ đổi nguồn AC vào ổ điện trên tường**

● *Đèn mức sẽ nhấp nháy lần lượt từ dưới lên trên và bắt đầu sạc*

※ *Trong khi đang sạc, không thể sử dụng thiết bị*

4 **Khi sạc hoàn tất (tất cả đèn mức đều sáng), hãy rút bộ đổi nguồn AC ra khỏi ổ điện**

[CÁCH SỬ DỤNG]

Hãy sử dụng các chế độ khác nhau tùy thuộc vào mục đích của bạn. Để biết thêm chi tiết về các chế độ, vui lòng tham khảo mục hiển thị đèn chế độ và mức độ" Ngoài ra, xin vui lòng đọc kỹ các lưu ý trước khi sử dụng

Trường hợp chăm sóc da	Trường hợp triệt
※ Ở chế độ Bright, không thể thực hiện chăm sóc/ triệt lông	Có thể chọn giữa: <ul style="list-style-type: none">• Chế độ da nhạy cảm• Chế độ bình thường• Chế độ công suất cao


1

Nhấn nút Nguồn/Chế độ để khởi động máy



Nhấn và giữ nút nguồn trong khoảng 3 giây để khởi động

- Đèn trạng thái sẽ sáng và quạt làm mát bắt đầu hoạt động (chế độ chờ)
- ※ Nếu không thao tác trong 3 phút liên tục, thiết bị sẽ tự động tắt nguồn

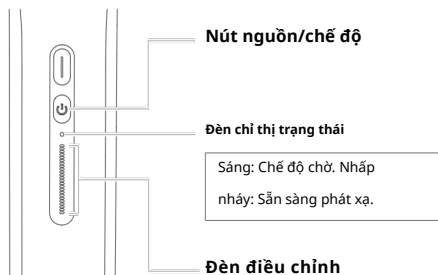






2

Nút nguồn/chế độ  **Nhấn nhanh một lần để thay đổi chế độ**


Có thể kiểm tra chế độ thông qua trạng thái của đèn báo mức. Nút nguồn/chế độ

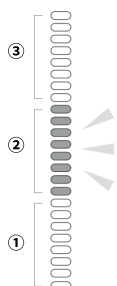
Mỗi khi bạn nhấn nút, chế độ sẽ chuyển đổi theo thứ tự sau: Chế độ sáng → Chế độ da nhạy cảm → Chế độ bình thường → Chế độ công suất cao → Chế độ bình thường → Chế độ da nhạy cảm → Chế độ sáng → Chế độ da nhạy cảm...

Chức năng dưỡng da**Chức năng triệt lông**


Chế độ	Chế độ Bright	Chế độ da nhạy cảm	Chế độ bình thường	Chế độ công suất cao
Hiện thị đèn Màu xanh dương  Đèn ① đến ③ nhấp nháy lần lượt theo thứ tự				
Mức độ chiếu xạ	-	Thấp	Trung bình	cao

3

Áp chắc cảm biến tiếp xúc và đầu phát tia sát vào da. Khi đèn trạng thái bắt đầu nhấp nháy, hãy nhấn nhanh nút chiếu  một lần

※ Nếu muốn sử dụng chế độ chiếu liên tục, hãy nhấn giữ nút chiếu 

※ Để biết chi tiết cách thực hiện chăm sóc da và chăm sóc/triệt lông, vui lòng xem mục “Vui lòng đọc trước khi sử dụng”

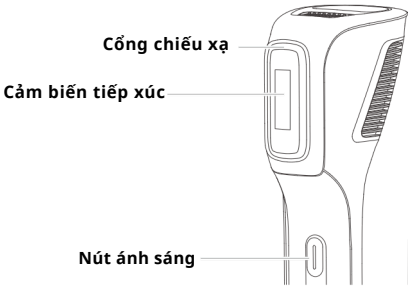

Chiếu đơn phát

Nhấn nút chiếu và di chuyển vị trí, chiếu từng lần một. Khi thiết bị sẵn sàng cho lần chiếu tiếp theo, máy sẽ rung một lần và phát ra tiếng “bụp”

Chiếu xạ liên tục

Di chuyển vị trí chiếu từng chút một trong khi sử dụng. Miễn là đầu máy vẫn tiếp xúc với da, chế độ chiếu liên tục sẽ tiếp tục hoạt động. Nếu nhấn lại nhanh nút chiếu hoặc nút nguồn/chế độ, hoặc nếu rời khỏi da trong khoảng 3 giây trở lên, chế độ chiếu liên tục sẽ dừng lại

4

Nhấn giữ nút nguồn / chế độ khoảng 3 giây để tắt nguồn

※ Quạt làm mát sẽ tiếp tục hoạt động trong khoảng 30 giây sau khi tắt máy

Sau khi triệt lông

※ Sau khi chăm sóc, hãy dưỡng ẩm đầy đủ cho da

※ Nếu sau khi chăm sóc da bị nóng rất, hãy làm mát kỹ bằng túi chườm lạnh hoặc khăn lạnh. Tùy cơ địa và cách sử dụng, da có thể giữ nhiệt. Nếu tình trạng bất thường không giảm, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ

※ Sau khi chăm sóc, tránh để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm, hãy chú ý tránh bị cháy nắng

※ Sau mỗi lần sử dụng, hãy vệ sinh sạch đầu nhô, tinh chất hoặc mỹ phẩm bám trên sản phẩm

ISAU KHI SỬ DỤNG

■Phương pháp chăm sóc

※ Trước khi vệ sinh, hãy chắc chắn rút bộ đổi nguồn AC ra khỏi ổ điện. Không được rửa bằng nước

※ Sau mỗi lần sử dụng, hãy dùng khăn mềm và khô để lau sạch đầu phát tia

※ Không lau bằng cồn, dung môi pha loãng (thinner), xăng, nước tẩy sơn móng tay, dầu hỏa hoặc các loại dung môi/hóa chất khác, cũng không dùng bột mài hoặc chất tẩy rửa. Những chất này có thể gây nứt, đổi màu hoặc hư hỏng thân máy

※ Không lau bằng khăn ướt vì có thể gây hỏng thiết bị.

1. Dùng khăn mềm, khô để nhẹ nhàng lau sạch đầu phát tia và khu vực xung quanh.
2. Dùng khăn mềm, khô lau sạch bụi ở cửa hút và thoát khí



■Cách bảo quản

※ Khi không sử dụng, hãy tắt nguồn thiết bị và rút bộ đổi nguồn AC ra khỏi ổ điện trước khi bảo quản. ※ Không để máy gần lửa, dưới trời nắng gắt, trong phòng tắm hoặc trong xe hơi – những nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao. Hãy bảo quản ở nơi sạch sẽ, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. ※ Để xa tầm tay trẻ em. ※ Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy vệ sinh thiết bị trước khi bảo quản

Hãy cho máy vào túi hoặc bao đựng khi bảo quản để tránh bụi bám vào

※ Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc đầy pin trước khi cất giữ. Ngoài ra, mỗi tháng một lần, hãy bật máy hoạt động và sạc lại. Nếu để lâu không sạc, có thể dẫn đến không sạc được nữa

Do đặc tính của pin, ngay cả khi không sử dụng, pin vẫn sẽ tự xả dần, vì vậy dung lượng pin sẽ giảm từ từ trong thời gian bảo quản

■ Về pin sạc

Nếu thời gian sử dụng trở nên rất ngắn ngay cả sau khi đã sạc đầy, có khả năng pin đã hết tuổi thọ. Không nên sử dụng pin có hiệu suất kém. (Tuổi thọ pin thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và bảo quản. Số lần sạc và xả pin ước tính khoảng 300 đến 500 lần.)

Pin không thể thay thế. Vui lòng tham khảo bên dưới để biết các biện pháp phòng ngừa liên quan đến sản phẩm có pin lithium-ion tích hợp

Sản phẩm này (thân máy) có tích hợp pin lithium-ion. Khi thải bỏ sản phẩm, hãy tuân thủ quy định phân loại và xử lý rác thải của địa phương



I VỀ HIỂN THỊ LỖI I

Nếu có lỗi xảy ra, đèn báo trạng thái sẽ nhấp nháy màu đỏ để thông báo cho bạn. Vui lòng kiểm tra chi tiết lỗi bên dưới và khắc phục nguyên nhân gây ra sự cố.

Hiển thị lỗi của đèn mức	Nội dung lỗi	Cách xử lý
Nhấp nháy 10 lần trong 10 giây	Lỗi quạt làm mát	Đèn sẽ nhấp nháy khoảng 5 giây, sau đó thiết bị tự động tắt nguồn. Hãy chờ cho đến khi máy nguội tự nhiên. Vui lòng sử dụng trong môi trường có nhiệt độ từ 5°C~35°C. Nếu vẫn xảy ra lỗi ngay cả khi sử dụng trong phạm vi nhiệt độ này, hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
Nhấp nháy 20 lần trong 10 giây	Bất thường do nhiệt độ cao	Đèn sẽ nhấp nháy khoảng 10 giây và sau đó tự động tắt nguồn. Vui lòng ngừng sử dụng và liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng
Nhấp nháy 10 lần trong 5 giây	Bất thường mạch điện	

| CÂU HỎI THƯỜNG GẶP |

Câu hỏi	Trả lời
Có thể sử dụng mỗi ngày không?	Tần suất sử dụng sẽ khác nhau tùy theo chức năng bạn dùng <ul style="list-style-type: none">• Chăm sóc da (làm đẹp da): 3 lần/tuần, khoảng 5 phút mỗi lần• Chăm sóc râu: 2 lần/tuần, khoảng 5 phút mỗi lần• Chăm sóc/triệt lông:<ul style="list-style-type: none">+Trong 2 tháng đầu: khoảng 1-2 lần/tuần+Từ tháng thứ 3 trở đi: khoảng 1 lần mỗi 2-4 tuần
Có thể sử dụng khi đang trang điểm không? Có thể sử dụng khi đã thoa toner hoặc sữa dưỡng không?	Không thể sử dụng trong những trường hợp đó. Hãy sử dụng trên da sạch (không có mỹ phẩm)
Tại sao máy không phát tia?	Nếu đầu phát tia không áp sát vào da, máy sẽ không thể phát tia. Khi đèn trạng thái nhấp nháy, bạn có thể nhấn nút chiếu để thực hiện phát tia.
Đèn trạng thái không chuyển từ sáng liên tục sang nhấp nháy?	Cảm biến tiếp xúc (touch sensor) đã áp đúng vào da chưa? Hãy điều chỉnh hướng và góc đặt máy sao cho tiếp xúc đúng với da.
Máy tự tắt nguồn trong khi sử dụng?	Có thể bạn đã vô tình chạm vào nút nguồn/chế độ. Hãy nhấn nút chiếu để tiếp tục chiếu. Ngoài ra, nếu sau khi bật nguồn mà không thao tác trong 3 phút, thiết bị sẽ tự động tắt nguồn. (Chức năng tự động tắt - Auto Off)
Ánh flash quá chói, phải làm sao?	Hãy áp sát đầu phát tia vào da để không bị hờ khi chiếu. Khi chiếu, hãy nhắm mắt lại hoặc sử dụng kính bảo hộ

| CÂU HỎI THƯỜNG GẶP |

Câu hỏi	Trả lời
Có thể sử dụng mỗi ngày không?	<p>Có mùi khét ngay sau khi chiếu</p> <ul style="list-style-type: none">• Khi chiếu, nhiệt tác động lên lông có thể gây ra mùi khét. Hãy đảm bảo cạo sạch lông đen trước khi sử dụng.• Có còn lông vụn bám trên đầu phát tia hoặc trên da không? Hãy lau sạch kỹ các vết bẩn trước khi sử dụng
Cảm thấy flash nóng, da bị đỏ hoặc đau thì sao?	<ul style="list-style-type: none">• Khi chiếu, bạn sẽ cảm thấy hơi ấm nhẹ. Mức độ cảm nhận khác nhau tùy từng người. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau, bạn có thể cảm thấy nóng hơn:<ul style="list-style-type: none">• Cạo lông chưa sạch• Mức công suất quá cao• Chiếu nhiều lần vào cùng một vị trí• Chiếu trên da bị cháy nắng• Hãy cạo sạch lông, đảm bảo da không bị cháy nắng và bắt đầu từ mức chiếu thấp.• Chỉ sử dụng ở mức khiến bạn cảm thấy ấm nhẹ. Không sử dụng ở chế độ gây nóng rất hoặc đau• Sản phẩm được trang bị chức năng làm mát (làm mát sapphire). Tuy nhiên, khi sử dụng chế độ công suất cao hoặc khi da bị đỏ/đau, hãy làm mát da khoảng 10 giây bằng túi chườm lạnh trước và sau khi sử dụng• Tùy cơ địa và tình trạng sức khỏe, da có thể tạm thời bị đỏ hoặc đau. Nếu tình trạng đỏ hoặc đau nghiêm trọng, hãy ngừng sử dụng ngay và làm mát, dưỡng ẩm cho da• Nếu sau 2 ngày triệu chứng vẫn không cải thiện, hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ
Trong khi sử dụng có xuất hiện hơi nước hoặc nhiệt	<p>Do nhiệt độ khu vực gần đầu phát tia giảm xuống, có thể xảy ra hiện tượng mờ hoặc xuất hiện giọt nước. Đây không phải là lỗi. Ngoài ra, vì flash đi kèm với nhiệt, nên việc phát sinh nhiệt là hiện tượng bình thường</p>
Tại sao máy không chiếu liên tục?	<p>Áp sát máy vào da và nhấn giữ nút chiếu khoảng 3 giây trở lên. Di chuyển vị trí chiếu từng chút một trong khi sử dụng. Nếu bạn nhấn lại nhanh nút chiếu hoặc nút nguồn/chế độ, hoặc nếu rời khỏi da trong khoảng 3 giây trở lên, chế độ chiếu liên tục sẽ dừng lại</p>

Câu hỏi	Trả lời
Có tiếng kêu phát ra, có sao không?	Đó là âm thanh hoạt động của quạt làm mát bên trong máy, không phải lỗi hay hư hỏng. Ngay cả sau khi tắt nguồn, quạt vẫn có thể tiếp tục chạy khoảng 30 giây, đây là hiện tượng bình thường