

MYTREX HEAD SPA DEEP X

Các thiết bị làm đẹp sử dụng tại nhà

hướng dẫn sử dụng


ĐỂ LƯU TRỮ

BẢO HÀNH

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm này. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và đảm bảo sử dụng sản phẩm một cách đúng đắn và an toàn. Hướng dẫn sử dụng này đi kèm với bảo hành. Xin hãy bảo quản cẩn thận sau khi đã đọc xong

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Máy Head Spa Deep X

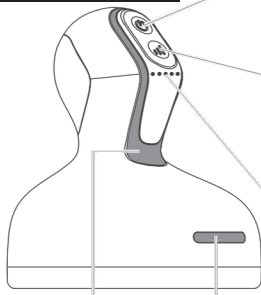

Nút khởi động

- **Nhấn giữ:** Bật/tắt nguồn
- **Nhấn giữ:** Thay đổi tốc độ quay



Nút chuyển đổi chế độ hoạt động

- **Nhấn nhanh:** Chuyển đổi giữa các cấp độ trong chế độ EMS (cấp độ 1 đến 5)
- **Nhấn hai lần liên tiếp:** Chuyển đổi giữa các chế độ



Đèn LED màu trắng

Hiển thị chỉ số EMS (khi chế độ EMS được lựa chọn)

LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
Cấp độ một	Cấp độ hai	Cấp độ ba	Cấp độ bốn	Cấp độ năm

Đèn LED màu xanh dương

Hiển thị trạng thái pin (khi bật nguồn*/đang sạc)



*Mức pin còn lại sẽ được hiển thị khi bật nguồn thiết bị

Bạn có thể kiểm tra thông qua số lượng đèn LED đang sáng

Điện cực tiếp điểm (phần tay cầm)

Khi sử dụng chế độ Làm sạch (CLEAN) hoặc Dưỡng ẩm (MOIST), bạn cần cầm máy sao cho lòng bàn tay chạm trực tiếp vào điện cực ở thân máy để kích hoạt chức năng ion.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thân máy - Mặt sau

Bộ phận chuyển động

※ **Lưu ý:** Không kéo mạnh hoặc tác động lực quá lớn lên bộ phận này để tránh gây hư hỏng

Đèn LED đỏ

Cổng sạc điện

Cảm biến tay cầm

Khi sử dụng chế độ Làm sạch (CLEAN) và Dưỡng ẩm (MOIST), bạn lưu ý phải cầm máy sao cho lòng bàn tay chạm vào dải điện cực trên thân máy để kích hoạt chức năng ion.

*CHÚ Ý

Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng nếu bộ sản phẩm bị thiếu linh kiện. Thiết bị đạt chuẩn chống nước IPX7 nên có thể dùng khi tắm, nhưng không được ngâm máy lâu trong nước. Lưu ý, thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi không báo trước để cải tiến chất lượng.

Đầu máy/ đầu massage

Dành cho đầu & toàn thân



Lưu ý: Bộ phận này đã được lắp sẵn vào máy khi mua

Dành cho da đầu

Đầu kim nhọn



Dành cho da mặt

Đầu mềm làm bằng chất liệu Silicon



Dành cho mặt

Đầu kim loại tròn




Phụ kiện đi kèm



Dây cáp USB



Bàn chải vệ sinh

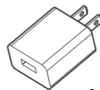

Củ sạc

Cổng sạc điện

Ổ cắm USB

Để sạc máy

*CHÚ Ý

Để sạc chỉ có khả năng chống tia nước bắn (IPX4), vui lòng không dội nước trực tiếp. Ngoài ra, cáp USB và củ sạc không có tính năng chống nước. Hãy bảo quản các phụ kiện ở nơi khô ráo, tuyệt đối không sử dụng khi đang ướt hoặc sạc điện trong phòng tắm.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (CÁCH SẠC ĐIỆN)


Khi sử dụng lần đầu hoặc khi pin sắp hết, hãy tắt nguồn thiết bị rồi mới tiến hành sạc

LƯU Ý

Trước khi đặt máy và phụ kiện lên đế sạc, hãy lau khô hoàn toàn hơi ẩm. Nếu đặt thân máy còn ướt lên đế sạc, thiết bị có thể gặp sự cố hoặc hư hỏng.

• Khi pin yếu

LED 1 sẽ nhấp nháy màu xanh, đồng thời mỗi 30 giây sẽ phát 6 tiếng bip để thông báo

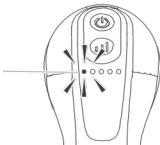

• Thời gian sạc và thời gian sử dụng tham khảo*

THỜI GIAN SẠC	THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Khoảng 3 giờ	tối đa khoảng 4,5 giờ


※ Thời gian sử dụng là ước tính khi dùng tốc độ thấp + EMS mức 1; nếu dùng tốc độ cao + EMS mức 5 có thể sử dụng khoảng 3 giờ (ở nhiệt độ phòng 25°C). Thời gian sạc và thời gian sử dụng có thể thay đổi đáng kể tùy theo dung lượng pin còn lại, môi trường sạc và môi trường sử dụng.

※ Nhiệt độ sạc khuyến nghị: 15°C–35°C. Ngoài khoảng này, thời gian sạc có thể lâu hơn hoặc không sạc được.

※ Khi sạc lần đầu hoặc sau thời gian dài không sử dụng, pin có thể dùng được ngắn hơn. Sạc và sử dụng vài lần, pin sẽ ổn định trở lại.

1 | Kết nối để sạc với cáp USB và bộ chuyển đổi AC đi kèm theo đúng sơ đồ

※ Lắp đặt sao cho các đầu kết nối khớp chính xác với nhau

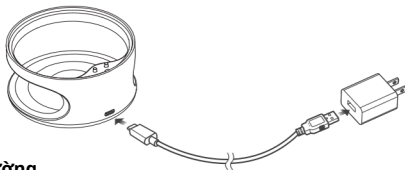

2 | Cắm bộ chuyển đổi AC vào ổ điện trên tường

※ Luôn sử dụng bộ chuyển đổi AC đi kèm. Bộ chuyển đổi AC này cũng có thể được sử dụng với các sản phẩm 5V/1A.

※ Có thể sạc từ cổng USB trên máy tính, nhưng có thể không sạc được với một số máy tính hoặc pin điện thoại di động. Hãy thử thay đổi nguồn điện và sạc lại. Không sử dụng bộ sạc nhanh vì có thể gây ra sự cố.

3 | Đặt thiết bị lên để sạc sao cho các đầu nối sạc tiếp xúc đúng vị trí

※ Trước khi sạc, hãy lau khô hoàn toàn nước đọng trên thân máy và cổng sạc. Nếu sạc khi cổng sạc còn ướt, có thể gây hư hỏng thiết bị.

※ Đèn LED màu xanh nhấp nháy cho biết quá trình sạc đã bắt đầu.

LƯU Ý

Nếu thiết bị không bắt đầu sạc, hãy nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí sang trái hoặc phải để các phần lõi-lỗm gần đầu nối sạc của thiết bị và để sạc khớp chính xác với nhau

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG (CÁCH SẠC ĐIỆN)

4

Sau khi sạc đầy, hãy rút bộ chuyển đổi AC khỏi ổ điện.

※ Trong quá trình sạc, đèn LED màu xanh sẽ lần lượt nhấp nháy và sáng lên. Khi LED 1-5 đều sáng, nghĩa là đã sạc xong.

VỀ PIN SẠC

- Nếu thời gian sử dụng giảm rõ rệt dù đã sạc, có thể pin đã đến cuối tuổi thọ (Tuổi thọ pin thay đổi tùy điều kiện sử dụng và bảo quản; số lần sạc-xả ước tính 300-500 lần.)
- Pin không thể thay thế.
- Khi không sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc đầy pin trước khi cất giữ. Ngoài ra, mỗi 1 tháng nên bật thiết bị để vận hành và sạc lại.

Hãy tiến hành sạc pin. Nếu để quá lâu không sạc, pin có thể không sạc lại được.



Li-ion

Sản phẩm này (thân máy) được tích hợp pin lithium-ion. Khi thải bỏ sản phẩm, vui lòng tuân thủ quy định phân loại rác của địa phương

VUI LÒNG ĐỌC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

■ Tính năng sản phẩm

Vùng tóc mai

Giữ chắc da đầu hoặc da, xoa bóp nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu. Khi chỉ sử dụng chức năng xoa bóp, không cần làm ướt da

※ Tốc độ xoay có thể điều chỉnh với 3 mức khác nhau.

EMS

Sử dụng xung điện để làm co cơ, kích thích và hỗ trợ chăm sóc

※ Mức độ kích thích có thể điều chỉnh với 5 cấp độ

CLEAN

(giải phóng ion)

Dùng lực ion để hút sạch bụi bẩn mà gội đầu hay rửa mặt thông thường không thể loại bỏ hết

※ Không thể điều chỉnh mức độ

MOIST

(ion thẩm thấu)

Nhờ lực ion, các thành phần làm đẹp có thể thẩm thấu sâu đến lớp sừng của da


※ Không thể chọn mức độ

Ánh sáng

(Đèn LED màu đỏ)

Chiếu ánh sáng LED lên da đầu hoặc da để hỗ trợ chăm sóc

※ Không thể tắt chức năng đèn led

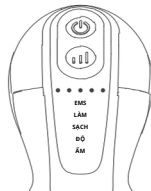

VUI LÒNG ĐỌC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

■ Các chức năng khác

Về chức năng tự động tắt

Sau khi bật nguồn, nếu đã được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định (Xoa bóp/EMS: 10 phút, CLEAN/MOIST: 5 phút), thiết bị sẽ tự động tắt nguồn.


Thiết bị bảo hộ an toàn

Nếu một phần cơ thể bị kẹp trong quá trình sử dụng quá 3 giây, thiết bị sẽ tự động dừng để đảm bảo an toàn. Để tiếp tục sử dụng, hãy bật lại nguồn.

Gồm chế độ CLEAN và chế độ MOIST

Khi sử dụng (Ion dẫn vào), hãy luôn đặt tay vào một trong các điện cực trên tay cầm.

Hãy nắm chắc tay cầm để tay chạm vào điện cực

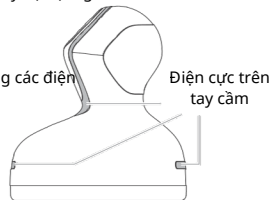

※Trong quá trình sử dụng chế độ CLEAN (ion dẫn ra) và MOIST (ion dẫn vào), sẽ có tiếng bip điện tử “bíp, bíp, bíp...”.

PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Hãy thay đầu/phụ kiện phù hợp với mục đích sử dụng. Phụ kiện là vật phẩm tiêu hao; khi bị mòn, hãy thay bằng đầu/phụ kiện mới (bản rời)

LƯU Ý VỀ CÁC PHỤ KIỆN

※ Để truyền xung điện EMS, phụ kiện silicon được pha trộn carbon (than). Do đó, khi cọ xát vào da hoặc vật khác, có thể bị bám bẩn màu đen. Hãy tránh sử dụng trên quần áo và chỉ dùng trực tiếp trên da trần. Ngoài ra, màu carbon có thể dính lên lớp sừng hoặc bã nhờn trên da.

Khi đó, có thể để lại những hạt màu đen như bụi than. Trong trường hợp này, hãy rửa sạch bằng nước



※ Hãy cắm chắc đầu đi cùng khi lắp. Nếu không lắp đúng, trong quá trình sử dụng có thể bị rơi ra.

VUI LÒNG ĐỌC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

VỀ EMS (KÍCH THÍCH ĐIỆN CƠ)

Có thể kích thích cơ bắp bằng xung điện. Khi mới sử dụng, da nhạy cảm, hoặc dùng ở cổ, hãy bắt đầu từ EMS mức 1 (chỉ LED 1 sáng).


LƯU Ý VỀ EMS

[EMS hoạt động dựa trên cơ chế truyền điện qua độ ẩm như nước]

Nếu da khô, sẽ khó cảm nhận được tác dụng EMS. Để cảm nhận EMS hiệu quả, hãy làm ẩm vùng sử dụng bằng nước hoặc nước ấm khi cần. Da đầu là vùng khó cảm nhận EMS, nhưng nếu làm ẩm da đầu trước, tạo bọt gội và để đầu/phụ kiện chạm vào da, bạn sẽ cảm nhận EMS dễ hơn. Cảm giác EMS tùy từng người. Ngoài ra, có thể dùng trên tóc hoặc da khô, nhưng EMS sẽ khó cảm nhận hơn.

[Trên 4 con lăn, cực dương (+) và âm (-) được sắp xếp như hình bên phải]

Điện được truyền khi cả cực + và - cùng chạm vào da. Khi 4 con lăn tiếp xúc với da, điện sẽ được truyền hiệu quả hơn.

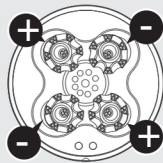

LƯU Ý VỀ EMS

[Sản phẩm này có thể sử dụng cho da đầu, mặt và cơ thể, nhưng cảm giác xung điện sẽ khác nhau tùy từng vùng]

Khi thay đổi vùng sử dụng, hãy luôn bắt đầu từ EMS mức 1 (chỉ LED 1 sáng) để điều chỉnh. Trước khi dùng, hãy đọc kỹ phần “Lưu ý an toàn” và sử dụng trong phạm vi vừa sức.

[Sau khi sử dụng sản phẩm, da có thể hơi đỏ tạm thời do tác dụng kích thích]

Hiện tượng này sẽ mờ dần theo thời gian, không có gì đáng lo. Tuy nhiên, nếu tình trạng không hồi phục, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

CÁC CHẾ ĐỘ VÀ PHỤ KIỆN (CHĂM SÓC DA ĐẦU)

Hãy sử dụng đầu/phụ kiện dành cho da đầu và cơ thể hoặc đầu dạng kim chuyên dụng cho da đầu. Mỗi lần chăm sóc toàn bộ da đầu nên trong khoảng 10 phút, và theo dõi tình trạng da khi sử dụng

**Có thể sử dụng
cho toàn bộ cơ thể**

Đầu dành cho da đầu và cơ thể:
Dùng cho da đầu, bắp tay, eo,
đùi và bắp chân.



**Đầu kim loại dành
riêng cho da đầu***

Dùng khi muốn tăng cường
kích thích. Có thể sử dụng
trên da đầu



※ Không dùng phụ kiện dạng kim trên mặt hoặc cơ thể, vì lực kẹp mạnh có thể kẹp da gây nguy hiểm

■ Hướng dẫn sử dụng từng chế độ

Xoa bóp + Đèn LED màu đỏ

Bạn có thể tắt EMS, CLEAN, MOIST và chỉ sử dụng chức năng xoa bóp. Khi chỉ dùng chức năng xoa bóp, không cần làm ướt da đầu.

※ Tốc độ xoay có thể chọn thấp, trung bình hoặc cao thời gian hẹn giờ là 10 phút.

Chế độ EMS + Xoa bóp (có thể bật/tắt) + Đèn LED màu đỏ

Hãy sử dụng khi da đầu đã được làm ướt bằng nước, lotion tóc, hoặc thuốc mọc tóc (không phải dạng dầu), hoặc trong khi tắm với tóc đã tạo bọt bằng dầu gội

※ Mức độ kích thích EMS có thể chọn trong 5 cấp độ và thời gian hẹn giờ là 10 phút

Chế độ CLEAN (Ion dẫn ra) + Xoa bóp (có thể bật/tắt) + Đèn LED màu đỏ

Hãy sử dụng khi da đầu đã được làm ướt bằng nước hoặc trong khi tắm với tóc đã tạo bọt bằng dầu gội. Luôn nắm chắc tay cầm để tay chạm vào điện cực; nếu không chạm điện cực, không thể sử dụng chế độ Ion dẫn ra (CLEAN)

※ CLEAN không thể chọn mức độ thời gian hẹn giờ là 5 phút

※ Trong quá trình dẫn điện, sẽ có tiếng bip điện tử “bíp, bíp, bíp...”.

Chế độ MOIST (Ion dẫn vào) + Xoa bóp (có thể bật/tắt) + Đèn LED màu đỏ

Khi chăm sóc da đầu sau khi tắm, hãy sử dụng kết hợp với lotion tóc hoặc thuốc mọc tóc. Luôn nắm chắc tay cầm để tay chạm vào điện cực; nếu không chạm, không thể sử dụng chế độ Ion dẫn vào (MOIST)

※ MOIST không thể chọn mức độ và thời gian hẹn giờ là 5 phút

※ Trong quá trình dẫn điện, sẽ có tiếng bip điện tử “bíp, bíp, bíp...”

CÁC CHẾ ĐỘ VÀ PHỤ KIỆN (CHĂM SÓC CƠ THỂ)

Hãy sử dụng đầu/phụ kiện silicon mềm dành cho mặt hoặc đầu/phụ kiện dạng bóng nhô. Có thể sử dụng cho mặt, cổ và vùng ngực. Mỗi lần chăm sóc, toàn bộ mặt, cổ và ngực nên trong khoảng 10 phút, và theo dõi tình trạng da khi sử dụng.

Silicon mềm: nhẹ nhàng nâng và nắm da

Đầu

Khi muốn chăm sóc vùng da bằng đầu này



Đầu dạng bóng nhô

Khi muốn nắm chắc và xoa bóp mạnh để kích thích da



Không dùng đầu dạng bóng nhô trên da đầu, vì có thể cuốn tóc vào gây nguy hiểm

■ Hướng dẫn sử dụng từng chế độ

Chế độ EMS

+

Xoa bóp (có thể bật/tắt)

+

Đèn LED màu đỏ

Sử dụng sau khi làm ẩm da bằng nước, kem dưỡng ẩm, serum hoặc gel dưỡng ẩm. Bạn cũng có thể áp dụng sản phẩm này lên trên mặt nạ giấy mua ở cửa hàng. Hơn nữa, bạn cũng có thể sử dụng trong quy trình chăm sóc da sau khi tắm hoặc rửa mặt.

* Bạn có thể lựa chọn mức độ kích thích EMS từ 5 cấp độ. Thời gian hẹn giờ được cài đặt là 10 phút.

Chế độ CLEAN

+

rung massage

+

Đèn LED đỏ

Vui lòng sử dụng sau khi tẩy trang và rửa mặt, khi da đang được làm ẩm bằng nước hoặc toner ion.

Khi dùng, hãy cầm máy sao cho tay chạm vào điện cực ở thân máy. Nếu không chạm vào điện cực tay cầm thì chế độ ion làm sạch sẽ không hoạt động.

※ Chế độ CLEAN không điều chỉnh được mức độ, thời gian tự động 5 phút. Khi máy đang hoạt động sẽ có tiếng bíp

Chế độ MOIST

+

rung massage

+

Đèn LED đỏ

Vui lòng sử dụng khi da đang được làm ẩm bằng toner, serum hoặc gel dưỡng. Có thể chăm sóc da ngay trên mặt nạ giấy. Phù hợp dùng sau khi rửa mặt hoặc sau khi tắm trong quy trình skincare hằng ngày. Khi sử dụng, hãy cầm máy sao cho tay chạm vào điện cực trên thân máy. Nếu không chạm vào điện cực tay cầm thì chế độ ion đẩy dưỡng sẽ không hoạt động

※ Chế độ MOIST không điều chỉnh được mức độ, thời gian tự động 5 phút. Khi máy đang hoạt động sẽ có tiếng bíp

CÁC CHẾ ĐỘ VÀ PHỤ KIỆN (CHĂM SÓC CƠ THỂ)

Vui lòng sử dụng đầu gắn dành cho da đầu & cơ thể. Mỗi lần chăm sóc không quá 10 phút, hãy điều chỉnh theo tình trạng da khi sử dụng.

Đầu gắn cho da đầu & cơ thể Dùng cho da đầu, bắp tay, eo, đùi, bắp chân... có thể sử dụng toàn thân



■ Hướng dẫn sử dụng từng chế độ

Chế độ EMS

+

rung massage

+

Đèn LED đỏ

Vui lòng sử dụng khi da đã được làm ẩm bằng nước, lotion body hoặc gel

※ Mức độ EMS có 5 cấp để lựa chọn, thời gian tự động 10 phút.

THỬ NGHIỆM TRƯỚC TRÊN DA

Khi sử dụng lần đầu, hãy nhớ thực hiện một bài kiểm tra trước để tránh các vấn đề về da

1

Làm sạch da trước khi sử dụng

※ Rửa mặt trong cánh tay bằng xà phòng

2

Làm ướt mặt trong cánh tay bằng nước, bật nguồn và sử dụng khoảng 1 phút

※ Thực hiện ở tốc độ thấp, EMS mức 1 (chỉ bật LED 1). Di chuyển nhẹ từng vị trí, không ấn mạnh

※ Nếu trong quá trình test xuất hiện phát ban, ngứa, đau hoặc dấu hiệu bất thường, hãy ngừng ngay

3

Hãy theo dõi trong 24 giờ, đảm bảo da không có dấu hiệu bất thường (đau, nóng rát).

※ Sau khi dùng, da có thể đỏ nhẹ tạm thời do kích thích; hiện tượng này sẽ mờ dần theo thời gian. Nếu không cải thiện, hãy ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, không tiếp tục sử dụng



Vui lòng sử dụng
đầu gắn dành cho
da đầu & cơ thể



CÁCH SỬ DỤNG

Nhiệt độ nước được khuyến nghị sử dụng nằm trong khoảng từ 5°C đến 42°C.

1 Chọn đầu gắn phù hợp và lắp vào thân máy

※ Hãy cắm thẳng đứng, đảm bảo khớp đúng hình dạng giữa phần chuyển động của thân máy và lỗ cắm của đầu gắn để tránh hư hỏng hoặc lỗi máy.


Vì có thể gây hư hỏng, không xoay trái-phải hoặc tác động mạnh vào phần chuyển động của máy.

2 Nhấn giữ nút nguồn khoảng 3 giây để bật máy


- Đèn LED xanh (hiển thị dung lượng pin) và đèn LED đỏ ở đáy máy
Đèn sẽ phát sáng

3 Nhấn nhanh nút nguồn để bật chức năng massage

- Máy sẽ khởi động ở tốc độ thấp, EMS mức 1.
※ Mỗi lần nhấn nút, tốc độ massage sẽ thay đổi.

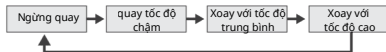

Khi mới bắt đầu sử dụng hoặc cho đến khi bạn quen với nó, hãy luôn bắt đầu với tốc độ chậm

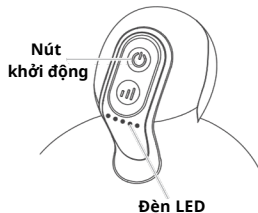

4 | Nhấn nút chuyển chế độ 2 lần liên tiếp để chọn chế độ

※ Mỗi lần nhấn 2 lần, chế độ sẽ chuyển theo thứ tự sau:



※ Chi tiết từng chế độ vui lòng tham khảo mục “Các chế độ & đầu gắn (chăm sóc da đầu)”.



Nút chuyển chế độ

5 | Trong chế độ EMS, nhấn nút chuyển chế độ từng lần để chọn mức EMS

※ Nếu nhấn quá nhanh, máy có thể chuyển sang chế độ khác. Hãy nhấn chậm rãi để điều chỉnh từng mức một

※ EMS có 5 mức, mặc định là mức 1

※ Người mới dùng, da nhạy cảm hoặc khi dùng cho vùng cổ, luôn bắt đầu từ EMS mức 1 (chỉ bật LED 1)


※ Sản phẩm có thể dùng cho da đầu, mặt và cơ thể, tuy nhiên cảm giác kích thích điện sẽ khác nhau tùy từng vùng

Vì vậy, mỗi khi thay đổi vùng sử dụng, hãy luôn điều chỉnh lại từ EMS mức 1

CÁCH SỬ DỤNG

6 | Cầm chắc thân máy như hình minh họa bên phải

※ Trước khi cầm, hãy rửa sạch shampoo, toner... dính trên tay để tránh trơn trượt. Nếu làm rơi máy có thể gây chấn thương hoặc hư hỏng
※ Khi dùng chế độ CLEAN (ion làm sạch) và MOIST (ion dưỡng ẩm), hãy cầm sao cho tay chạm vào điện cực trên thân máy

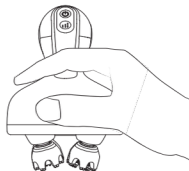

7 | Hãy thực hiện chăm sóc theo hướng dẫn dưới đây.

Chăm sóc
da đầu
đúng cách

Sử dụng đầu gắn cho da đầu & cơ thể hoặc đầu gắn chuyên dụng cho da đầu (dạng kim) và chăm sóc theo các bước dưới đây.

Lượng/loại độ ẩm sử dụng sẽ khác nhau tùy chế độ và vùng chăm sóc. Chi tiết vui lòng xem “Các chế độ & đầu gắn (chăm sóc da đầu)”

■ Những điều cần lưu ý khi tắm

Chăm sóc da với chế độ EMS / CLEAN

※ Làm ẩm kỹ da đầu hoặc tạo bọt shampoo rồi mới sử dụng.

※ Da đầu là vùng khó cảm nhận EMS, vì vậy hãy làm ướt kỹ bằng nước hoặc shampoo để cảm nhận tốt hơn

Khi sử dụng, hãy đảm bảo đầu gắn tiếp xúc trực tiếp với da đầu để dễ cảm nhận kích thích EMS hơn



CÁCH ĐẶT MÁY ĐÚNG



Toàn bộ máy phải tiếp xúc với da đầu



Một phần máy bị nhấc khỏi da đầu

BƯỚC 1

Chăm sóc vùng trán và hai bên đầu

① Áp máy vào đường chân tóc khoảng 5 giây.

② Từ đường chân tóc, di chuyển chậm lên đỉnh đầu trong khoảng 5 giây.

※ Lặp lại bước ① và ② mỗi bước 2 lần.

※ Khi bắt đầu bước ①, di chuyển máy nhẹ và ngấn để đầu gần tiếp xúc sát da đầu hơn

※ Chỉ áp nhẹ, không ấn mạnh.

● Áp nhẹ

→ Trượt nhẹ theo hướng mũi tên



CÁCH SỬ DỤNG

BƯỚC 2

Chăm sóc vùng sau đầu

Thực hiện giống bước 1, chăm sóc theo cùng cách từ đường chân tóc di chuyển dần lên đỉnh đầu



BƯỚC 3

Chăm sóc vùng đỉnh đầu và sau đầu

Ấn và di chuyển thiết bị theo thứ tự từ đỉnh đầu xuống gáy, mỗi vị trí khoảng 5 giây như hình



BƯỚC 4

Nếu đã dùng dầu gội, hãy xả sạch trước khi tiến hành chăm sóc

Thực hiện các bước chăm sóc khác như dưỡng tóc

■ Chăm sóc sau khi tắm

Chăm sóc bằng chế độ MOIST

※Khi chăm sóc da đầu sau khi tắm, có thể sử dụng cùng với tinh chất dưỡng tóc hoặc thuốc mọc tóc

※Nếu da đầu đã đủ ẩm, bạn cũng có thể sử dụng chế độ EMS

Chăm sóc
làn da mặt

Vui lòng sử dụng đầu silicon mềm cho mặt hoặc đầu hình quả bóng massage. Có thể dùng cho mặt, cổ và vùng ngực trên. Khi sử dụng cho mặt: tắt chức năng nhào hoặc chọn tốc độ thấp, không ấn mạnh. Lượng nước sử dụng sẽ khác nhau tùy chế độ và vùng chăm sóc. Chi tiết xem phần “Các chế độ và đầu gắn (chăm sóc mặt)”. Khi dùng cho mặt, hãy tẩy trang trước.


Chăm sóc bằng chế độ CLEAN

- ※Chế độ CLEAN nên sử dụng sau khi tẩy trang hoặc rửa mặt, dùng với nước hoặc lotion dẫn ion
- ※Chế độ CLEAN nên dùng trên làn da đã được làm ướt
- ※Khuyến nghị sử dụng đầu gắn hình quả bóng massage
- ※Với những vùng nhỏ như cánh mũi, chỉ chạm một điểm của đầu gắn vào vùng đó

➔ Di chuyển từ từ theo hướng mũi tên



Những vùng không được sử dụng

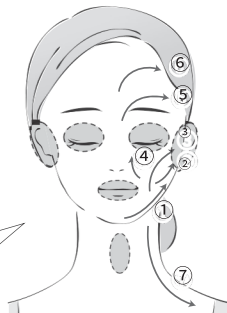

CÁCH SỬ DỤNG

Chăm sóc bằng chế độ MOIST

※ Sử dụng khi da đã được làm ướt bằng nước hoa hồng, serum hoặc gel dưỡng. Chế độ EMS cũng có thể dùng trên da đã được làm ướt bằng nước

※ Có thể chăm sóc trên mặt nạ giấy đang sử dụng.

※ Chế độ MOIST nên dùng cùng đầu gắn hình quả bóng massage

Khuyến nghị sử dụng cùng đầu gắn hình quả bóng massage

※ Với những vùng nhỏ như cánh mũi, chỉ chạm một điểm của đầu gắn vào vùng đó


Hãy thực hiện chăm sóc như hướng dẫn



Di chuyển từ từ theo hướng mũi tên




Những vùng không được sử dụng

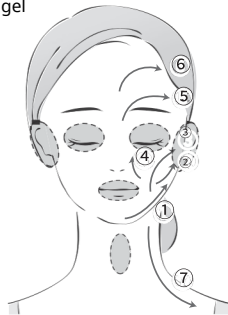

Chăm sóc bằng chế độ EMS

※Sử dụng khi da đã được làm ướt bằng nước, nước hoa hồng, serum hoặc gel dưỡng

※Có thể chăm sóc trên mặt nạ giấy đang sử dụng

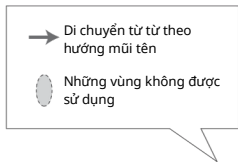

※Nếu da khô, bạn sẽ khó cảm nhận được tác dụng của EMS. Để cảm nhận đầy đủ, hãy sử dụng khi da đủ ẩm
Hãy đảm bảo làm ẩm đầy đủ vùng da cần chăm sóc bằng nước trong suốt quá trình sử dụng

※Khi sử dụng ở vùng cổ, có thể cảm thấy tác dụng EMS mạnh hơn, nên chú ý khi dùng

CÁCH SỬ DỤNG

Chăm sóc
cơ thể

Sử dụng đầu gắn cho da đầu và cơ thể cho các vùng như bắp tay, eo, đùi, bắp chân

※Không dùng đầu gắn hình kim cho cơ thể vì lực kẹp mạnh có thể gây kẹp vào da

Có thể xảy ra trường hợp không an toàn

※Trước khi sử dụng, hãy đọc kỹ phần “Lưu ý an toàn” và chú ý không dùng cho những vùng ngoài vùng được chỉ định, vì có thể gây ra sự cố

8

Sau khi chăm sóc xong, nhấn giữ nút nguồn để tắt thiết bị

※Nếu không nhấn giữ, sau một khoảng thời gian từ khi bắt đầu hoạt động, thiết bị sẽ tự động tắt nguồn

CHẾ ĐỘ	Nhào / EMS	CLEAN / MOIST
	10 phút	5 phút

※Khi chuyển đổi giữa các chế độ EMS / CLEAN / MOIST, cài đặt hẹn giờ sẽ bị đặt lại. Chỉ thay đổi tốc độ quay chức năng nhào hoặc mức EMS thì hẹn giờ sẽ không bị đặt lại

※Khi tắt nguồn, các bộ phận chuyển động sẽ tiếp tục chạy vài giây cho đến khi về vị trí định sẵn, không phải là lỗi

※Sau khi sử dụng, hãy vệ sinh thiết bị để giữ sạch. Chi tiết xem phần “Cách vệ sinh”

CÁCH VỆ SINH

1

Xác nhận rằng thiết bị đã tắt nguồn.

2

Rửa sạch tóc và bụi bẩn trên thân máy bằng nước. Tháo rời đầu phụ kiện khỏi thân máy (xem Hình 1)

※ Hãy nhẹ nhàng tháo để đầu phụ kiện không bị rách

3

Dùng bàn chải vệ sinh đi kèm để làm sạch các bộ phận, sau đó rửa lại bằng nước

4


※ Vệ sinh các bộ phận chuyển động của thân máy và đầu phụ kiện như Hình 2, 3

※ Nếu bụi bẩn khó rửa, có thể dùng nước rửa trung tính pha loãng




Không kéo mạnh các bộ phận chuyển động


Nếu kéo quá mạnh, nó có thể bị đứt

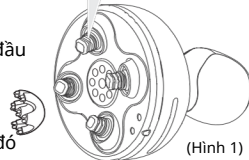

(Hình 1)

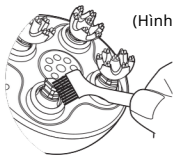

(Hình 2)

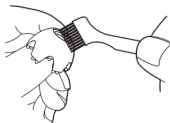

(Hình 3)

CÁCH VỆ SINH

5

Dùng khăn khô như khăn tắm để lau khô nước trên thân máy và đầu phụ kiện, sau đó để ở nơi thoáng khí cho khô.

※ Sau khi sử dụng, có thể còn nước bên trong các bộ phận chuyển động ở đáy thân máy và trong nắp che, nhưng bên trong thân máy....

Thiết bị này có khả năng chống nước (IPX7) và không thể bị ngâm trong nước. Nếu bạn lo lắng, hãy lắc thiết bị để loại bỏ hoàn toàn nước bên trong.

※ Vì đầu phụ kiện bằng silicone có pha than (carbon), sau khi sử dụng, một lượng nhỏ than có thể hòa tan ra trong nước khiến thân máy hoặc đầu phụ kiện hơi màu đen. Hãy dùng khăn không lo bị dơ để lau.

※ Đặc biệt, hãy lau khô hoàn toàn các đầu sạc trên thân máy để không còn nước

※ Không đặt máy lên để sạc hoặc để máy ẩm ướt; điều này có thể gây mùi, ố màu hoặc hỏng máy

6

Khi thân máy và đầu phụ kiện đã khô hoàn toàn, lắp lại đầu phụ kiện vào thân máy

※ Hãy lắp nhẹ nhàng để đầu phụ kiện không bị rách

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Không thể bật nguồn

⇒ Nếu nhấn nút nguồn mà máy không phản hồi, có thể pin của máy đang yếu. Hãy sạc máy theo hướng dẫn trong mục “Trước khi sử dụng (Cách sạc)”

⇒ Để bật nguồn, nhấn giữ nút nguồn khoảng 3 giây

Máy không vào pin

⇒ Bạn đã cắm adapter vào ổ điện chưa?

Hãy kết nối và sạc máy theo hướng dẫn trong mục “Trước khi sử dụng (Cách sạc)”

Hãy chắc chắn sử dụng adapter AC và cáp USB đi kèm để sạc máy

⇒ Các đầu sạc của thân máy và đế sạc đã tiếp xúc đúng cách chưa?

Nếu máy không bắt đầu sạc, hãy di chuyển nhẹ thân máy sang trái hoặc phải để các gờ và rãnh gần các đầu sạc của thân máy và đế sạc khớp với nhau

⇒ Các đầu sạc trên thân máy có bị ướt không?

Hãy lau khô các đầu sạc và để khô hoàn toàn trước khi đặt lên đế sạc. Ngoài ra, vệ sinh định kỳ các đầu sạc của cả thân máy và đế sạc.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bị dừng giữa chừng

⇒ Vì lý do an toàn, thiết bị sẽ tự động ngừng hoạt động nếu bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bạn bị kẹt quá 3 giây trong quá trình sử dụng

⇒ Pin của thiết bị đang ở mức thấp

Hãy sạc máy theo hướng dẫn trong mục “Trước khi sử dụng (Cách sạc)”

⇒ Sau một khoảng thời gian nhất định từ khi bắt đầu hoạt động (Nhào/EMS: 10 phút, CLEAN/MOIST: 5 phút), máy sẽ tự động dừng

Kích thích EMS yếu hoặc không cảm nhận được

⇒ Nhấn nút chuyển chế độ để chọn chế độ EMS, sau đó nhấn từng lần để tăng mức cường độ.

⇒ Đầu phụ kiện chưa tiếp xúc tốt với da; đảm bảo cả 4 đầu phụ kiện đều chạm vào da.

⇒ Da có quá khô không? Hãy làm ẩm da bằng nước hoặc lotion trước khi sử dụng.

**kích thích EMS
quá mạnh hoặc
đau**

⇒ Nhấn nút chuyển chế độ từng lần một để giảm mức cường độ
⇒ Da có quá khô không? Hãy làm ẩm da bằng nước hoặc lotion trước khi sử dụng

Tùy cá nhân và vị trí sử dụng, bạn có thể cảm thấy kích thích mạnh hơn. Hãy điều chỉnh mức cường độ phù hợp và thoải mái. Nếu da có biểu hiện bất thường, ngưng sử dụng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa

**Sau khi sử dụng,
còn nước bên
trong máy**

⇒ Có thể còn nước bên trong các bộ phận chuyển động ở đáy máy và nắp che, nhưng thân máy được chống nước theo chuẩn IPX7, không phải bị ngâm nước. Nếu lo lắng, bạn có thể lắc nhẹ thân máy để nước thoát ra

**Có thể sử dụng
ngoài da đầu
không?**

⇒ Có thể sử dụng trên mặt và cơ thể
Chi tiết, vui lòng xem mục “Cách sử dụng”